

SATELEC tips and accessories for SUPRASSON

スプラソン アクセサリーガイド




90種類以上のチップで様々な治療に対応します。

ENDO

 ET-25 P.36	 ET-18D P.36	 ET-BD P.37	 ET-PR P.37	 ET-20 P.38	 ET-25S P.38	 ET-25L P.39							
 ET40 P.40							 ET20D P.40	 ET40D P.41					
 CAP1 P.41							 CAP2 P.42	 CAP3 P.42	 コンデンサー P.54				
 AS3D P.43	 AS6D P.43	 AS9D P.44	 ASRD P.44	 ASLD P.45	 P14D P.46	 P15RD P.46	 P15LD P.47	 S12-70D P.45					
 IRR 20/21mm P.52									 IRR 20/25mm P.52	 IRR 25/21mm P.53	 IRR 25/25mm P.53	 AM 21mm P.48	 AM 25mm P.50

BOOST

 #5AE P.66	 C20 P.66
---	--

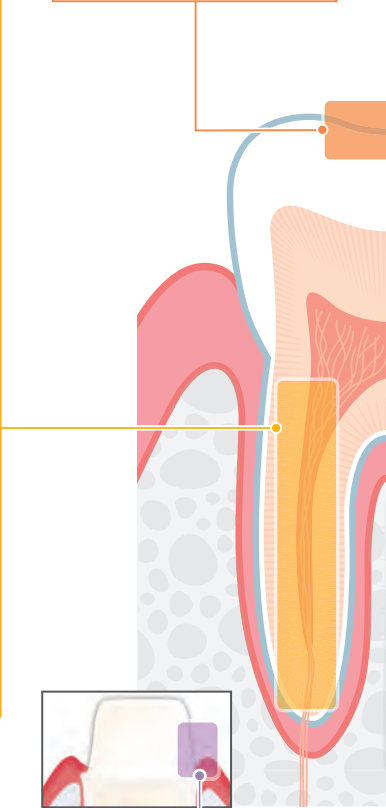


PROTHETICS

 PMU1 P.58	 PMU2 P.58	 PMU3 P.59	 PMU4 P.59	 PMU5 P.60	 PMU6 P.60	 FLT-L-D P.61	 FLT-L P.61	 FLT-H-D P.62	 FLT-H P.62	 FLT-D-D P.63	 FLT-D P.63	 MF.N-1 P.56	 MF.N-2 P.57
---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	---	--

■チップ一覧の見方


SCALING

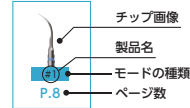


■スプラソンP-MAX2で使用する動作モード

- スケーリングモード
- ペリオモード
- エンドモード
- プースト


SCALING

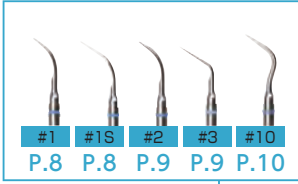

PERIO

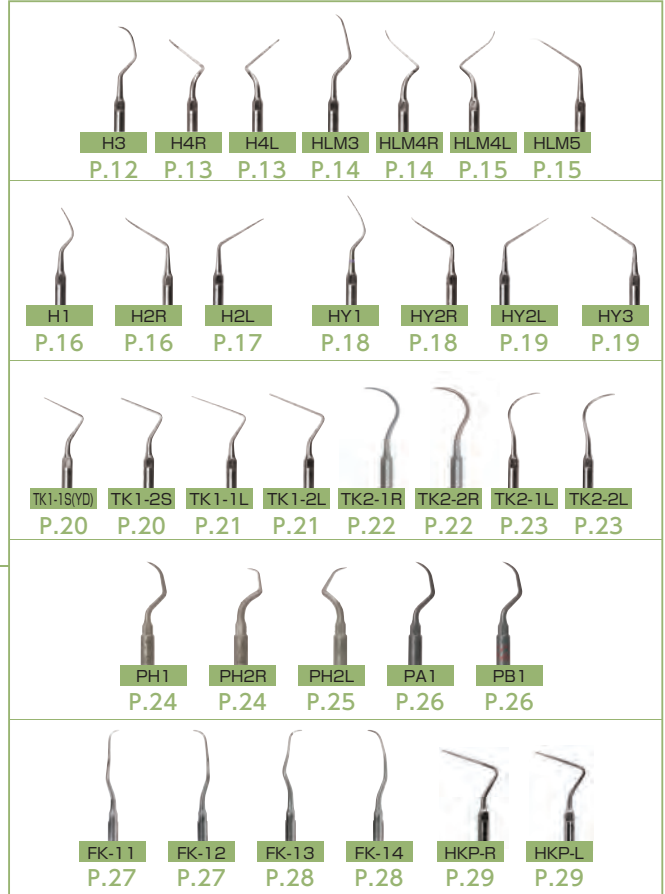

IMPLANT (Pure Titanium)

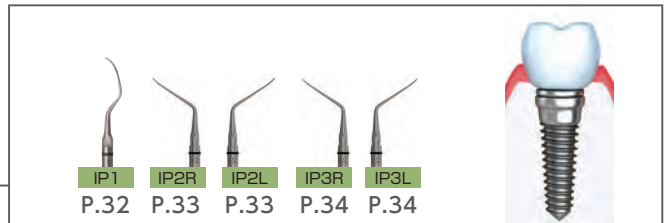

はじめに

多目的超音波治療器「スプラソン P-MAX 2」は、従来のスケーリングモードのほかに、エンドモード、ペリオモードを備え、日々の診療の様々な場面で使用する事が出来る機器です。

この「スプラソンアクセサリガイド」では、各専用チップの特徴や使用方法を説明しています。これらのチップは、「スプラソン P-MAX 2」をはじめ、「スプラソン P-MAX +」「スプラソン P-MAX」でも使用する事が可能です。また、スケーラー用チップとペリオ用チップは、姉妹機である「スプラソン P5 ニュートロン」でも使用して頂くことが出来ます。スプラソン P-MAX2 に関する Q&A を白水貿易株式会社ホームページに掲載しています。

詳しくは、QR コードを読み取ってホームページをご覧ください。



スプラソン P-MAX2 の
Q&A は QR コードを
Check!



サテレック社製の超音波スケーラーをご使用の際は、サテレック社および白水貿易株式会社が指定する純正チップをご使用ください。純正チップはサテレック社製の超音波スケーラーの特性に合わせて設計されているので、安心してお使いいただけます。純正でないチップをお使いの場合は、チップが破折したり、ハンドピースのネジ山を傷めたりする等、色々な問題が発生する可能性があります。純正以外のチップを使用し、ハンドピースに故障が発生した場合、保証期間内であっても有償修理となりますのでご了承ください。



純正チップを使用した正常なハンドピースのネジ山





純正以外のチップを使用して破損したハンドピースのネジ山
チップを取り付けることは可能ですが、チップのネジ山とハンドピースのネジ山の精度が異なるためにハンドピースのネジ山を破損する場合があります。
チップが装着出来た場合でも正しく発振しません。



純正以外のチップを使用して破折したハンドピースのネジ山
純正以外のチップを取り付けることでハンドピースのネジ山を傷め、破折する場合があります。

チップカードについて

チップカードは各チップに同梱されております。チップの先端は、使用頻度により摩耗が生じます。また、長時間の使用や必要以上のパワー、圧をかけると消耗や破損の原因となります。チップの先端が短くなると作業効率が低下しますので、チップカードをご活用いただき、チップの交換目安をご確認ください。

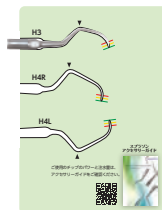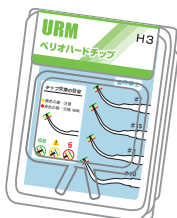

Contents

カタログの見方	04
アイコンについて	04
超音波スケーラーを正しく使うコツ	06

A スケーリング	07
スプラソンチップ #1、#1S、#2、#3、#10	08

B ペリオ	11
URMペリオハードチップ キュレット —— H3、H4R、H4L	12
ロングミニ —— HLM3、HLM4R、HLM4L、HLM5	14
ダイヤモンド —— H1、H2R、H2L	16
メタルソフト —— HY1、HY2R、HY2L、HY3	18
B.D.R.チップ TK1-1S(YD)、TK1-2S、TK1-1L、TK1-2L、TK2-1R、TK2-2R、TK2-1L、TK2-2L	20
URMペリオソフトチップ(プラスチック製) PH1、PH2R、PH2L、PA1、PB1	24
超音波グレーシーチップ—— FK-11、FK-12、FK-13、FK-14	27
HKPチップ—— HKP-R、HKP-L	29

C インプラントケア	31
純チタンチップ(インプラントプロテクト) IP1、IP2R、IP2L、IP3R、IP3L	32


D エンド	35
エンドサクセスチップ ET-25、ET-18D、ET-BD、ET-PR、ET-20、ET-25S、ET-25L	36
ETチップ ET40、ET20D、ET40D	40
エンドサクセス キャナル アクセスチップ CAP1、CAP2、CAP3	41
エンドサクセス アピカル サージェリーチップ AS3D、AS6D、AS9D、ASRD、ASLD	43
レトロフィリングチップ S12-70D	45
マイクロレトロチップ P14D、P15RD、P15LD	46
AMファイル 21mm #10、#15、#25、#30、25mm #10、#15、#25、#30	48
イリセーフ ファイル IRR 20/21mm、IRR 20/25mm、IRR 25/21mm、IRR 25/25mm	52
コンデンサー #1(S04)	54

E 形成	55
マージンファイル MF.N-1、MF.N-2	56
パーフェクトマージンチップ ウルトラ PMU1、PMU2、PMU3、PMU4、PMU5、PMU6	58
FLTチップ FLT-L-D、FLT-L、FLT-H-D、FLT-H、FLT-D-D、FLT-D	61

F 補綴	65
スプラソンチップ #5AE	66
ピエゾセムチップ C20	66

G アクセサリー・オプション	67
-----------------------------	----

カタログの見方

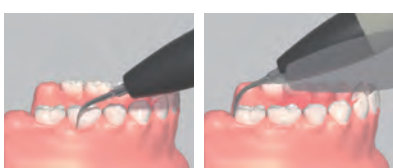商品名 スブラソンチップ#1					
	商品コード 00444101 00444104 標準価格 ¥10,000 ¥24,000				
③ 使用部位 全顎 ③ 用途 歯肉縁上のスケーリング ③ 特長 歯肉縁上スケーリングのスタンダードチップ。	② 				
⑤ 使用するパワー <table border="1"> <tr> <td>P-MAX</td> <td>S1~S2</td> <td>P5</td> <td>8~10</td> </tr> </table>	P-MAX	S1~S2	P5	8~10	
P-MAX	S1~S2	P5	8~10		


- ① 製品画像：正面・側面の画像を掲載しております。
 ② 各種アイコン：該当するアイコンを掲載しております。詳細は「アイコンについて」をご覧ください。
 ③ 製品概要、用途解説：製品の特長、用途と解説を記載しております。
 ④ 用途画像：チップの使用方法。例えばチップのアプローチ方法を画像で表わしています。
 ⑤ パワー：チップを利用する際の本体のパワー設定を記載しております。
 ※実際に使用する際は、弱いパワーから始め、徐々にパワーを強くしてください。
 P: ペリオモード、E: エンドモード、S: スケーリングモード



アイコンについて

アイコン	用 途
	スブラソン P-MAX2 の標準装備品

アイコン	用 途
	スブラソン P5 ニュートロン / スブラソン P5 ニュートロン LED の標準装備品

アイコン	用 途
	QRコードを読み込めば、使用動画にアクセスいただけます。  見てわかる! 詳細・使用方法はQRコードをCheck! 動画公開中

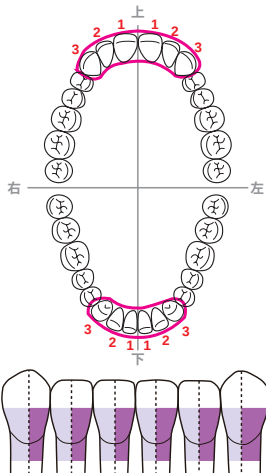アイコン	用 途
	チップの形状に沿った注水 
	噴霧状の注水 
	注水無しで使用
	ダイヤモンドコーティング
	シャープニングが必要
	下記の部位にご使用ください。 

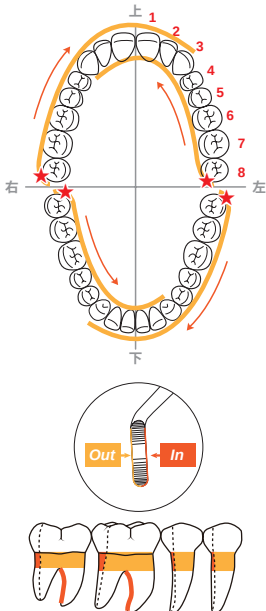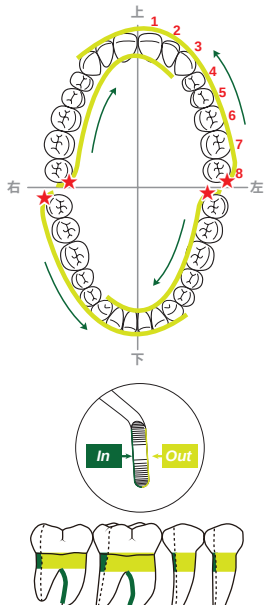アイコン	用 途
	下記の部位にご使用ください。 
	下記の部位にご使用ください。 

※臼歯部(★)から矢印に沿って操作します。

超音波スケーラーを正しく使うコツ

超音波スケーラーは、超音波振動を活用することで歯石やプラーク、沈着物等を効率的、且つ安全に除去することが出来ます。

使用の際は、その治療目的、部位、到達性などにあわせて適切なチップとパワーを選択してください。

以下のポイントを押さえることで、その効果を最大限に活かすことが出来ます。

Point 1 チップのあて方

ピエゾ式超音波スケーラーのスプラソンシリーズでは、チップは前後の往復運動で振動します。

一般的に先端から2～3mmの部分が最も効率よく振動する部分とされており、チップの振動方向に沿ってチップの側面を使用します。



Point 2 ハンドピースの持ち方

ハンドピースはCの字を描くように把持し、隅角部ではハンドピースをゆっくりと回転させるように使用してください。(執筆状変法)

Point 3 ストローク

使用目的別にそれぞれ最適なストロークがあります。

下図を参考にしてください。

目的	主なチップ	ストローク	チップの接触部位	チップの角度
縁上スケーリング	縁上チップ	タッピングストローク (大量の歯石)	側面	0°～15°以内 (歯面に対し)
縁下スケーリング	H3	水平・斜行・垂直ストローク	側面	キュレット第1シャングを 約20°歯面に対して傾斜
縁下デブリドメント	HY1	スウィーピングストローク	側面	0°～15°以内

Point 4 パワーの設定方法

超音波スケーラーを使用の際は、弱いパワーから使用を開始し、徐々にパワーを強くして最適なパワーを設定してください。
パワーが強ければ強いほど、チップの消耗が早くなるだけでなく、歯面を傷める恐れがあります。

Point 5 水量調節

スプラソンP-MAX 2は、その使用目的に応じた水量を調節することが可能です。

適切な水量に関しては、下図を参考にしてください。

目的	歯肉縁下スケーリング/デブリドメント	縁上スケーリング
パワー	弱い	強い
注水目的	ポケット内の洗浄・発熱防止	発熱防止
調整方法	チップの形状に沿って注水	噴霧状
		

SCALING

スケーリング



スケーリング

歯肉縁上、歯間部等に使用し、歯石や沈着物を除去します。

ピエゾ式超音波スケーラーは、前後方向に振動する特性を持っており、歯石や沈着物等へ有効にアプローチし、エナメル質やセメント質に不要な衝撃を与えません。

本項ではSモードでの使用を推奨していますが、より小さなパワー（Eモード）を使用して除去することも可能なケースがあります。

■ スプラソンチップ

ストローク : 硬く強固な歯石除去（タッピング）、一般の歯石やブラーク除去（スウィーピング）

操作ポイント : 操作方向にチップの先端が向き、先端2～3mm位を側面に当てます。

操作角度 : 歯面とチップは0～15度以内

商品名 スプラソンチップ# 1



商品コード 00444101

標準価格 ¥10,000

3本セット

00444104

¥24,000



P-MAX2

P 5


■ 使用部位
全顎

■ 用途
歯肉縁上のスケーリング

■ 特長
歯肉縁上スケーリングの
スタンダードチップ

■ 使用するパワー

P-MAX	S1～S2	P5	8～10
-------	-------	----	------

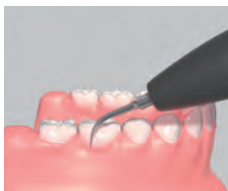

商品名 スプラソンチップ# 1S



商品コード 00444108

標準価格 ¥10,000



P-MAX2

P 5



■ 使用部位
全顎

■ 用途
歯肉縁上のスケーリング

■ 特長
#1 より先端部分が細く、さらに長くなっているため、歯間部分や最後臼歯遠心部の歯石除去に最適

■ 使用するパワー

P-MAX	S1～S2	P5	8～10
-------	-------	----	------

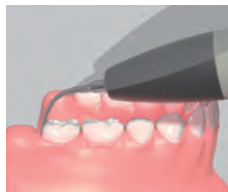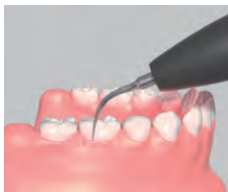

商品名 スプラソンチップ# 2



商品コード 00444102
標準価格 ¥10,000



■ 使用部位
下顎前歯舌側部

■ 用途
厚みのある歯石の除去

■ 特長
下顎前歯舌側部の厚みがある大量の
歯石除去に最適

■ 使用するパワー

P-MAX	S1 ~ S2	P5	8 ~ 10
-------	---------	----	--------



商品名 スプラソンチップ# 3



商品コード 00444103
標準価格 ¥10,000



■ 使用部位
下顎前歯舌側部

■ 用途
厚みのある歯石の除去

■ 特長
#2 より先端が丸いので、歯肉に炎症が
ある時にチップが触れても痛みを軽減

■ 使用するパワー

P-MAX	S1 ~ S2	P5	8 ~ 10
-------	---------	----	--------



商品名 スプラソンチップ# 10



商品コード 00444110

標準価格 ¥10,000



P-MAX2


■ 使用部位
全顎

■ 用途
歯肉縁上のスケーリング

■ 特長
歯間隣接部に最適・歯間空隙がない部位の
硬く大きな歯石除去を短時間で除去可能

■ 使用するパワー

P-MAX	S1 ~ S2	P5	8 ~ 10
-------	---------	----	--------

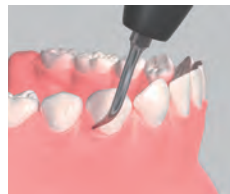

PERIO

ペリオ



ペリオ

超音波スケーラーで歯肉縁下にアプローチすることは禁忌とされていましたが、歯肉縁下に挿入してもチップを発熱させることなく、安全で安定した微小パワーを実現したペリオモードを搭載したスプラソン P-MAX が発売されて以降、超音波スケーラーによる歯肉縁下へのアプローチが可能になりました。

このペリオモードにより URM チップ（姫野先生）、B.D.R チップ（熊谷先生）、超音波グレーシーチップ（藤本先生）等、ペリオモードで使用する様々なチップが開発され、多くの皆様にご愛用頂いております。

■ URM ペリオハードチップーキュレットー

歯肉縁下の SRP およびデブライドメントに適したキュレット型チップです。

商品名 URM ペリオハードチップ H3



商品コード 00413030 00413033
標準価格 ¥8,000 ¥21,000

3本セット



- 使用部位
前歯及び臼歯部遠心
- 用途
歯肉縁下の SRP およびデブライドメント
- 特長
ユニバーサルキュレット型チップ

■ 使用するパワー

P-MAX	SRP : P1 ~ P7 デブライドメント : P1 ~ P3
P5	SRP : 1 ~ 3 デブライドメント : 1 ~ 2



商品名 URM ペリオハードチップ H4R




商品コード 00413040
標準価格 ¥9,000



- 使用部位
臼歯部（5 ページの歯式ライト参照）
- 用途
SRP およびデブライドメント
H4L/H4R 2 本で使用
- 特長
ユニバーサルキュレット型チップ
- 使用するパワー

P-MAX	SRP : P1 ~ P7 デブライドメント : P1 ~ P3
P5	SRP : 1 ~ 3 デブライドメント : 1 ~ 2

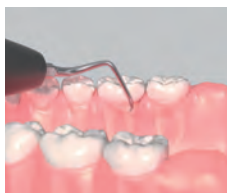

商品名 URM ペリオハードチップ H4L



商品コード 00413041
標準価格 ¥9,000



- 使用部位
臼歯部（5 ページの歯式レフト参照）
- 用途
SRP およびデブライドメント
H4L/H4R 2 本で使用
- 特長
ユニバーサルキュレット型チップ。
- 使用するパワー

P-MAX	SRP : P1 ~ P7 デブライドメント : P1 ~ P3
P5	SRP : 1 ~ 3 デブライドメント : 1 ~ 2



ペリオ

■ URM ペリオハードチップ ロングミニ

深さが 4mm 以上の歯周ポケットや狭窄部位の SRP およびデブライドメントに最適なキュレット型チップです。

商品名 URM ペリオハードチップ ロングミニ HLM3



商品コード 00413035

標準価格 ¥8,000




- 使用部位
前歯及び臼歯部遠心

- 用途
深さが 4mm 以上の歯周ポケットの
SRP およびデブライドメント

- 特長
H3 チップよりシャンクが長く、エッジが
小さいので、H3 チップで届きにくい深く
て狭窄した部位に最適

■ 使用するパワー

P-MAX	SRP : P1 ~ P7 デブライドメント : P1 ~ P3
P5	SRP : 1 ~ 3 デブライドメント : 1 ~ 2

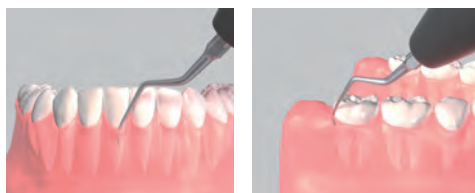

商品名 URM ペリオハードチップ ロングミニ HLM4R



商品コード 00413045

標準価格 ¥9,000




- 使用部位
臼歯部 (5 ページの歯式ライト参照)

- 用途
臼歯部の深さが 4mm 以上の歯周ポケット
の SRP およびデブライドメント
HLM4R/HLM4L 2 本で使用

- 特長
H4R では届きにくい、深くて狭窄された
部位や根分岐部の歯石除去に最適

■ 使用するパワー

P-MAX	SRP : P1 ~ P7 デブライドメント : P1 ~ P3
P5	SRP : 1 ~ 3 デブライドメント : 1 ~ 2

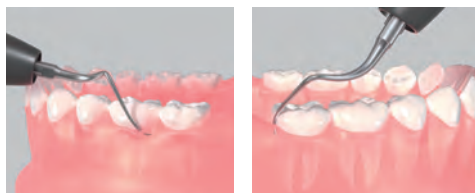

商品名 URM ペリオハードチップ ロングミニ HLM4L



商品コード 00413046

標準価格 ¥9,000



■ 使用するパワー

P-MAX	SRP : P1 ~ P7 デブライドメント : P1 ~ P3
P5	SRP : 1 ~ 3 デブライドメント : 1 ~ 2



- 使用部位
臼歯部 (5 ページの歯式レフト参照)
- 用途
臼歯部の深さが 4mm 以上の歯周ポケットの SRP およびデブライドメント
HLM4R/HLM4L 2 本で使用
- 特長
H4L では届きにくい、深くて狭窄された部位や根分岐部の歯石除去に最適

商品名 URM ペリオハードチップ ロングミニ HLM5



商品コード 00413050

標準価格 ¥8,000



■ 使用するパワー

P-MAX	SRP : P1 ~ P7 デブライドメント : P1 ~ P3
P5	SRP : 1 ~ 3 デブライドメント : 1 ~ 2



- 使用部位
上顎口蓋側
- 用途
上顎口蓋側の深さが 4mm 以上の歯周ポケットのスケリング
- 特長
HLM4R/HLM4L では操作しにくい上顎臼歯口蓋側、最後臼歯遠心に最適

ペリオ

■ URM ペリオハードチップ ーダイヤモンドー

キュレット型チップが挿入困難な狭窄部位等、特殊部位の SRP に最適なダイヤモンド付チップです。
※キュレット型チップが操作困難な部位にポイント的活用がおすすめです。

商品名 URM ペリオハードチップ H1



商品コード 00413010 00413013
標準価格 ¥9,000 ¥24,000

3本セット




- 使用部位
前歯部
- 用途
歯肉縁下の SRP

- 特長
ユニバーサルキュレットチップの挿入が
困難な部位、特に垂直性骨吸収部位の歯
石除去に最適

- 使用するパワー

P-MAX	SRP : P1 ~ P7	P5	SRP : 1 ~ 3
-------	---------------	----	-------------

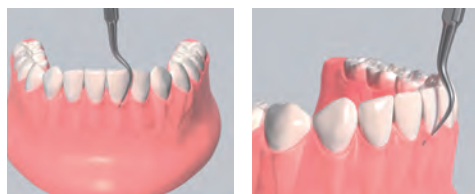

商品名 URM ペリオハードチップ H2R



商品コード 00413020
標準価格 ¥9,000



使用動画
はこちら




- 使用部位
臼歯部 (5 ページの歯式ライト参照)

- 用途
歯肉縁下の SRP
H2L/H2R 2 本で臼歯部に使用

- 特長
ユニバーサルキュレットチップの挿入が
困難な部位、特に根分岐部の歯石除去に
最適

- 使用するパワー

P-MAX	SRP : P1 ~ P7	P5	SRP : 1 ~ 3
-------	---------------	----	-------------

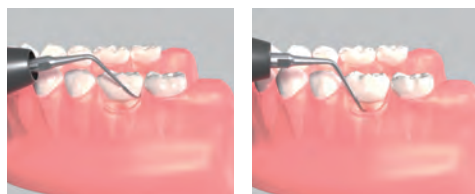

商品名 URM ペリオハードチップ H2L



商品コード 00413021
標準価格 ¥9,000



- 使用部位
臼歯部（5 ページの歯式レフト参照）
- 用途
歯肉縁下の SRP
H2L/H2R 2 本で使用
- 特長
ユニバーサルキュレットチップの挿入が
困難な部位、特に根分岐部の歯石除去に
最適
- 使用するパワー

P-MAX	SRP : P1 ~ P7	P5	SRP : 1 ~ 3
-------	---------------	----	-------------



ペリオ

■ URM ペリオハードチップ メタルソフト

メンテナンス時のデブリッドメント / バイオフィーム除去に適したチップです。
※Pモード専用 歯肉縁下イリゲーションにも最適です。

商品名 URM ペリオハードチップ メタルソフト HY1



商品コード 00413210 00413211
標準価格 ¥8,000 ¥21,000

3本セット



- 使用部位
前歯部及び隣接面
- 用途
メンテナンス時のデブリッドメント、
バイオフィーム除去
- 特長
前歯部及び隣接面のメンテナンスに
最適
- 使用するパワー

P-MAX	P1 ~ P3	P5	1 ~ 2
-------	---------	----	-------



商品名 URM ペリオハードチップ メタルソフト HY2R



商品コード 00413220
標準価格 ¥8,000



- 使用部位
臼歯部 (5 ページの歯式ライト参照)
- 用途
メンテナンス時のデブリッドメント、
バイオフィーム除去
HY2R/HY2L 2 本で使用
- 特長
臼歯部の根分岐部のメンテナンスに
最適
- 使用するパワー

P-MAX	P1 ~ P3	P5	1 ~ 2
-------	---------	----	-------



商品名 URM ペリオハードチップ メタルソフト HY2L



商品コード 00413221
標準価格 ¥8,000



- 使用部位
臼歯部（5 ページの歯式レフト参照）
- 用途
メンテナンス時のデブリッドメント、
バイオフィルム除去
- 特長
臼歯部の根分岐部のメンテナンスに
最適
- 使用するパワー

P-MAX	P1 ~ P3	P5	1 ~ 2
-------	---------	----	-------



商品名 URM ペリオハードチップ メタルソフト HY3




商品コード 00413230
標準価格 ¥8,000



- 使用部位
臼歯部遠心
- 用途
メンテナンス時のデブリッドメント、
バイオフィルム除去
- 特長
臼歯遠心部もメンテナンスに最適
- 使用するパワー

P-MAX	P1 ~ P3	P5	1 ~ 2
-------	---------	----	-------

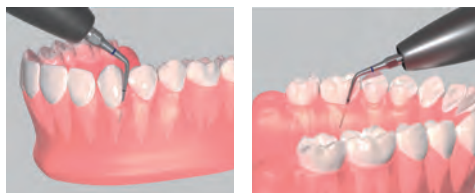

URM ペリオハードチップ メタルソフト セット 4 本入

内容チップ HY1、HY2R、HY2L、HY3 各 1 本

商品コード 00413204

標準価格 ¥30,000

ペリオ

B.D.R. チップ

B.D.R チップ (Biofilm Disruption Removal tip) は「プローブを挿入できるところであればどこにでも挿入できる」ことをコンセプトに熊谷崇先生が考案されたメンテナンス用チップです。

※メンテナンス時の歯石除去のみ、E3 まで使用可能

商品名 BDR チップ TK1-1S(YD)



商品コード 00823940

標準価格 ¥7,000



■ 使用部位 全顎

■ 用途 メンテナンス時のデブリドメント、 バイオフィーム除去 および歯石除去

■ 特長 プロービングを行う要領で全顎使用可能。 垂直性骨吸収部位、遠心面にも最適

■ 使用するパワー

P-MAX	デブリドメント：P1～P3 歯石除去：P1～E3
P-5	デブリドメント：1～2 歯石除去：1～5



商品名 BDR チップ TK1-2S



商品コード 00414412

標準価格 ¥7,000



■ 使用部位 全顎

■ 用途 メンテナンス時のデブリドメント、 バイオフィーム除去 および歯石除去

■ 特長 形状はTK1-1S チップと同じで、先端の 太さがTK1-1S より太い

■ 使用するパワー

P-MAX	デブリドメント：P1～P3 歯石除去：P1～E3
P-5	デブリドメント：1～2 歯石除去：1～5



商品名 BDR チップ TK1-1L



商品コード 00414411
標準価格 ¥7,000



- 使用部位
全顎
- 用途
メンテナンス時のデブライドメント、
バイオフィーム除去 および歯石除去
- 特長
形状は TK1-1S チップと同じで、シャンクが TK1-1S より長い
- 使用するパワー

P-MAX	デブライドメント：P1～P3 歯石除去：P1～E3
P-5	デブライドメント：1～2 歯石除去：1～5



商品名 BDR チップ TK1-2L



商品コード 00414413
標準価格 ¥7,000



- 使用部位
全顎
- 用途
メンテナンス時のデブライドメント、
バイオフィーム除去 および歯石除去
- 特長
形状は TK1-1L チップと同じで、先端の太さが TK1-1L より太い
- 使用するパワー

P-MAX	デブライドメント：P1～P3 歯石除去：P1～E3
P-5	デブライドメント：1～2 歯石除去：1～5



商品名 BDR チップ TK2-1R



商品コード 00414421

標準価格 ¥7,000



■ 使用するパワー

P-MAX	デブライドメント：P1～P3 歯石除去：P1～E3
P-5	デブライドメント：1～2 歯石除去：1～5

- 使用部位
根分岐部 (5 ページの歯式参照)

- 用途
メンテナンス時のデブライドメント、
バイオフィーム除去 および歯石除去
TK2-1R/TK2-1L 2 本で使用

- 特長
ファークেশヨンプローブと同じような
形状のチップ



商品名 BDR チップ TK2-2R



商品コード 00414423

標準価格 ¥7,000



■ 使用するパワー

P-MAX	デブライドメント：P1～P3 歯石除去：P1～E3
P-5	デブライドメント：1～2 歯石除去：1～5

- 使用部位
根分岐部 (5 ページの歯式参照)

- 用途
メンテナンス時のデブライドメント、
バイオフィーム除去 および歯石除去
TK2-2R/TK2-2L 2 本で使用

- 特長
ファークেশヨンプローブと同じような
形状のチップ



商品名 BDR チップ TK2-1L



商品コード 00414422

標準価格 ¥7,000



- 使用部位
根分岐部 (5 ページの歯式参照)

- 用途
メンテナンス時のデブリッドメント、
バイオフィルム除去 および歯石除去
TK2-1R/TK2-1L 2 本で使用

- 特長
ファークেশヨンプローブと同じような
形状のチップ

■ 使用するパワー

P-MAX	デブリッドメント：P1～P3 歯石除去：P1～E3
P-5	デブリッドメント：1～2 歯石除去：1～5



商品名 BDR チップ TK2-2L



商品コード 00414424

標準価格 ¥7,000



- 使用部位
根分岐部 (5 ページの歯式参照)

- 用途
メンテナンス時のデブリッドメント、
バイオフィルム除去 および歯石除去
TK2-2R/TK2-2L 2 本で使用

- 特長
ファークেশヨンプローブと同じような
形状のチップ

■ 使用するパワー

P-MAX	デブリッドメント：P1～P3 歯石除去：P1～E3
P-5	デブリッドメント：1～2 歯石除去：1～5



B.D.R. チップ セット 8 本組

内容チップ TK1-1S、TK1-2S、TK1-1L、TK1-2L、TK2-1R、TK2-2R、TK2-1L、TK2-2L 各 1 本

商品コード 00414408

標準価格 ¥50,000

ペリオ

■ URM ペリオソフトチップ (プラスチック製)

着色除去、補綴物やインプラントに付着したプラーク除去に適したチップです。

※研磨剤入チップ (PA1、PB1) はプラスチックの素材の中に研磨材が入っている為、チップの当たった面に研磨効果があります。

チップ	PH	PA	PB
プラスチック素材に含まれる研磨剤の有無	なし	あり (細)	あり (極細)

商品名 URM ペリオソフトチップ PH1 (4 本入)



商品コード 00823710
標準価格 ¥8,000 (4 本入)



■ 使用部位
全顎

■ 用途
補綴物やインプラントに付着したプラークの除去

■ 特長
プラスチック製なのでインプラントや補綴物に優しいチップ

■ 使用するパワー

P-MAX	P1 ~ P3	P5	1 ~ 2
-------	---------	----	-------



商品名 URM ペリオソフトチップ PH2R (4 本入)



商品コード 00823720
標準価格 ¥8,000 (4 本入)





■ 使用部位
臼歯部

■ 用途
補綴物やインプラントに付着したプラークの除去
PH2R/PH2L 2 本で使用

■ 特長
プラスチック製なのでインプラントや補綴物に優しいチップ。臼歯の湾曲の強い部分に最適

■ 使用するパワー

P-MAX	P1 ~ P3	P5	1 ~ 2
-------	---------	----	-------

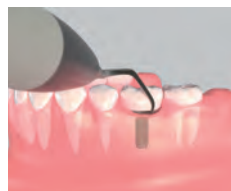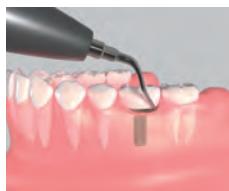

商品名 URM ペリオソフトチップ PH2L（4 本入）




商品コード 00823721
標準価格 ¥8,000（4 本入）



- 使用部位
臼歯部
- 用途
補綴物やインプラントに付着したプラークの除去
PH2R/PH2L 2 本で使用
- 特長
プラスチック製なのでインプラントや補綴物に優しいチップ。臼歯の湾曲の強い部分に最適
- 使用するパワー

P-MAX	P1 ～ P3	P5	1 ～ 2
-------	---------	----	-------

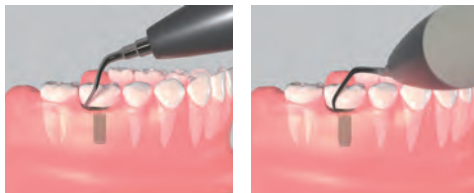

ペリオソフトセーフティー セット

内容チップ PH1、PH2R、PH2L 各 4 本
商品コード 00823700
標準価格 ¥16,500

ペリオ

商品名 URM ペリオソフトチップ PA1 (2 本入)



商品コード 00823810
標準価格 ¥5,000 (2本入)



- 使用部位
全顎
- 用途
矯正用ブラケットの周囲、下顎前歯舌側
歯頸部及び舌側面溝の着色除去など
- 特長
研磨剤を含んでいるので、着色除去にも
使用可能



使用するパワー

P-MAX	P1 ~ P3	P5	1 ~ 2
-------	---------	----	-------

商品名 URM ペリオソフトチップ PB1 (2 本入)



商品コード 00823910
標準価格 ¥5,000 (2本入)



- 使用部位
全顎
- 用途
矯正用ブラケットの周囲、下顎前歯舌側
歯頸部及び舌側面溝の着色除去など
- 特長
PA1 より更に細かい研磨剤を含んでいる
ので、薄い着色除去も使用可能



使用するパワー

P-MAX	P1 ~ P3	P5	1 ~ 2
-------	---------	----	-------

■ 超音波グレーシーチップ

超音波グレーシーチップは、東京都・藤本浩平先生により考案されたチップです。ミニグレーシーキュレットに準じた形状をしているため、操作が簡単。臼歯部への到達性に優れています。超音波を利用して歯面に付着したバイオフィルムや歯石などの堆積物を低侵襲に除去します。

商品名 超音波グレーシーチップ FK-11



商品コード 00414801

標準価格 ¥9,000



■ 使用部位
全顎（主に臼歯部近心）

■ 用途
歯面に付着したバイオフィルムや歯石などの堆積物を除去

■ 特長
ミニグレーシーキュレット #11 と同じ形状をしているので、操作が簡単

■ 使用するパワー

P-MAX	SRP：P1～P7 デブライドメント：P1～P3
P-5	SRP：1～3 デブライドメント：1～2

商品名 超音波グレーシーチップ FK-12



商品コード 00414802

標準価格 ¥9,000



■ 使用部位
全顎（主に臼歯部近心）

■ 用途
歯面に付着したバイオフィルムや歯石などの堆積物を除去

■ 特長
ミニグレーシーキュレット #12 と同じ形状をしているので、操作が簡単

■ 使用するパワー

P-MAX	SRP：P1～P7 デブライドメント：P1～P3
P-5	SRP：1～3 デブライドメント：1～2

ペリオ

商品名 超音波グレイシーチップ FK-13



商品コード 00414803
標準価格 ¥9,000



- 使用部位
全顎（主に臼歯部遠心）
- 用途
歯面に付着したバイオフィルムや歯石など
堆積物を除去
- 特長
ミニグレイシーキュレット #13 と同じ
形状をしているので、操作が簡単

■ 使用するパワー

P-MAX	SRP : P1 ~ P7 デブライドメント : P1 ~ P3
P-5	SRP : 1 ~ 3 デブライドメント : 1 ~ 2

商品名 超音波グレイシーチップ FK-14



商品コード 00414804
標準価格 ¥9,000



- 使用部位
全顎（主に臼歯部遠心）
- 用途
歯面に付着したバイオフィルムや歯石など
堆積物を除去
- 特長
ミニグレイシーキュレット #14 と同じ
形状をしているので、操作が簡単

■ 使用するパワー

P-MAX	SRP : P1 ~ P7 デブライドメント : P1 ~ P3
P-5	SRP : 1 ~ 3 デブライドメント : 1 ~ 2

超音波グレイシーチップ 4 本セット

内容チップ FK-11、FK-12、FK-13、FK-14 各 1 本

商品コード 00414800

標準価格 ¥35,000



…アイコンについては、P.04、05 をご覧ください。

■ HKP チップ

HKP チップは、帆足公人先生により考案されたチップです。

螺旋状のネガティブブレードがついている歯面に傷をつけにくい形状、先端が丸い形状で安全安心な SPT を。

NEW

商品名 HKP チップ HKP-R



商品コード 00823731

標準価格 ¥7,900



■ 使用部位
全顎

■ 用途
根面歯石、プラークの除去。歯肉縁下のデブリドメント

■ 特長
・螺旋状のネガティブブレードがついており、歯面を傷つけにくい

※基本長軸方向に動かしてください。

■ 使用するパワー

P-MAX	P1 ~ E3	P5	1 ~ 5
-------	---------	----	-------



前歯部



臼歯部

NEW

商品名 HKP チップ HKP-L



商品コード 00823730

標準価格 ¥7,900



■ 使用部位
全顎

■ 用途
根面歯石、プラークの除去。歯肉縁下のデブリドメント

■ 特長
・螺旋状のネガティブブレードがついており、歯面を傷つけにくい

※基本長軸方向に動かしてください。

■ 使用するパワー

P-MAX	P1 ~ E3	P5	1 ~ 5
-------	---------	----	-------



前歯部



臼歯部



IMPLANT

インプラントケア

ーインプラントメンテナンス

ーインプラントサージェリー



インプラントケア

スプラソンシリーズには、純チタンで作られた純チタンチップがラインナップされています。インプラント体と同じ素材でできている為、異種金属汚染を起こす可能性を最小限に抑えることができます。

インプラント周囲炎症例のオープンサージェリー等に使用が可能です。

■ 純チタンチップ（インプラントプロテクト）

商品名	純チタンチップ（インプラントプロテクト） IP1
-----	--------------------------



商品コード 00824002

標準価格 ¥20,000



■ 使用部位
インプラント体のスレッド
（ラージスレッド）

■ 用途
インプラントのメンテナンス時もしくは
外科処置時において石灰化物の除去

■ 特長
インプラント体と同じ素材であるチタン
（グレード 4）製のチップなので、異種金
属汚染のリスクを最小限に抑制可能

■ 使用するパワー

P-MAX

P1 ~ P5



商品名 純チタンチップ（インプラントプロテクト） IP2R




商品コード 00824004
標準価格 ¥20,000



- 使用部位
インプラント体のスレッド（ミディアムスレッド）
- 用途
インプラントのメンテナンス時もしくは外科処置時において石灰化物の除去
- 特長
インプラント体と同じ素材であるチタン（グレード 4）製のチップなので、異種金属汚染のリスクを最小限に抑制可能
- 使用するパワー

P-MAX

P1 ~ P5

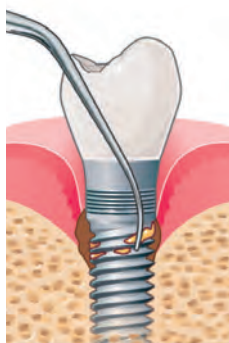

商品名 純チタンチップ（インプラントプロテクト） IP2L



商品コード 00824003
標準価格 ¥20,000



- 使用部位
インプラント体のスレッド（ミディアムスレッド）
- 用途
インプラントのメンテナンス時もしくは外科処置時において石灰化物の除去
- 特長
インプラント体と同じ素材であるチタン（グレード 4）製のチップなので、異種金属汚染のリスクを最小限に抑制可能
- 使用するパワー

P-MAX

P1 ~ P5



インプラントケア

商品名 純チタンチップ（インプラントプロテクト）IP3R




商品コード 00824006
標準価格 ¥20,000



- 使用部位
インプラント体のスレッド（マイクロスレッド）
- 用途
インプラントのメンテナンス時もしくは外科処置時において石灰化物の除去
- 特長
インプラント体と同じ素材であるチタン（グレード 4）製のチップなので、異種金属汚染のリスクを最小限に抑制可能
- 使用するパワー

P-MAX P1 ~ P5

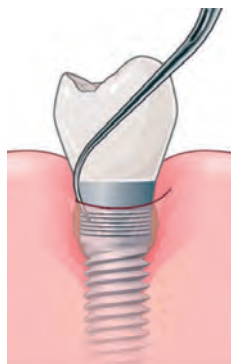

商品名 純チタンチップ（インプラントプロテクト）IP3L




商品コード 008240005
標準価格 ¥20,000



- 使用部位
インプラント体のスレッド（マイクロスレッド）
- 用途
インプラントのメンテナンス時もしくは外科処置時において石灰化物の除去
- 特長
インプラント体と同じ素材であるチタン（グレード 4）製のチップなので、異種金属汚染のリスクを最小限に抑制可能
- 使用するパワー

P-MAX P1 ~ P5

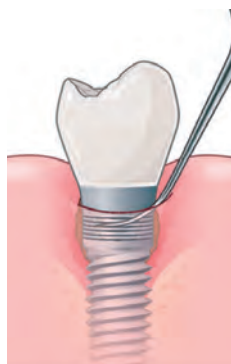

純チタンチップ（インプラントプロテクト）キット

内容チップ IP1、IP2R、IP2L、IP3R、IP3L 各 1 本

商品コード 00824001

標準価格 ¥100,000



…アイコンについては、P.04、05 をご覧ください。

ENDO

エンド



エンド

エンド症例にも、スプラソンチップは有効です。
髄質開拡や根管口の拡大、根管形成、MB 根の探索や残存ポスの除去、根管内の洗浄、逆根管治療等、様々な歯内療法になくてはならないチップです。

■ エンドサクセスチップ

商品名 エンドサクセス ET-25 チップ




商品コード 00824257
標準価格 ¥17,000



- 使用部位
根管中央部から根尖
- 用途
破折したエンドインスツルメントなどの異物除去
- 特長
チタンニオブウム合金製で振動の伝達性に優れ、強靱性と柔軟性を持ったチップ
- 使用するパワー

P-MAX E8 ~ E10

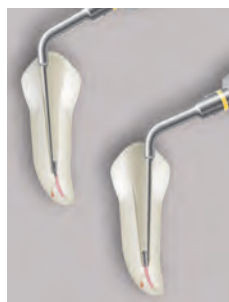

長さ: 18.6 mm
テーパ率: 3%

商品名 エンドサクセス ET-18D チップ



商品コード 00824256
標準価格 ¥16,000



- 使用部位
髄室部など
- 用途
髄室部の象牙質オーバーハング、石灰化象牙質及び充填物などの除去
- 特長
ダイヤモンドコーティングが施され、切削性に優れたチップ
- 使用するパワー

P-MAX E8 ~ E10



ダイヤモンド: 76 μ m
長さ: 18mm
テーパ率: 5%

商品名 エンドサクセス ET-BD チップ



商品コード 00824258
標準価格 ¥17,000



- 使用部位
根管
- 用途
根管内のプロービング、石灰化した
根管内壁の探索及び石灰化物の除去
- 特長
先端部分がダイヤモンドコーティングが
施された球状になったチップ
- 使用するパワー

P-MAX	E7 ~ E9
-------	---------



ダイヤモンド：46 μ m
長さ：20 mm
テーパ率：5%

商品名 エンドサクセス ET-PR チップ



商品コード 00824259
標準価格 ¥12,000



- 使用部位
ポストがある歯牙
- 用途
ポスト及びクラウン等の除去（ポストの
長軸方向に沿ってフルパワー、注水下で使用）
- 特長
太くて短い形状で超音波振動を効率よく伝え、
ポスト及びクラウンの除去に最適
- 使用するパワー

P-MAX	S10
-------	-----



エンド

商品名 エンドサクセス ET-20 チップ (ステンレススチール製)



商品コード 00824250

標準価格 ¥13,000



- 使用部位
歯冠部から根管中央部

- 用途
破折したエンドインスツルメントや充填物などの除去及び根管形成時の切削片の除去

- 使用するパワー

P-MAX

E8 ~ E10



長さ: 15mm

テーパ率: 6%

商品名 エンドサクセス ET-25S チップ (ショート) (チタン ニオブウム合金製)



商品コード 00824261

標準価格 ¥17,000



- 使用部位
根管中央部から根尖


- 用途
破折したエンドインスツルメントなどの異物除去

- 特長
エンドサクセス ET-25 チップのショートバージョン

- 使用するパワー

P-MAX

E8 ~ E10

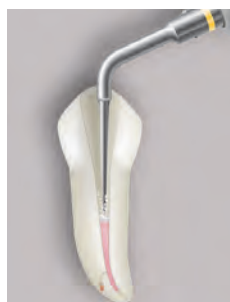

長さ: 15mm

テーパ率: 4%

商品名 エンドサクセス ET-25L チップ (ロング) (チタン ニオブウム合金製)



商品コード 00824262
標準価格 ¥17,000



- 使用部位
根管中央部から根尖
- 用途
破折したエンドインストルメントなどの
異物除去
- 特長
エンドサクセス ET-25 チップのロング
バージョン
- 使用するパワー

P-MAX E8 ~ E10



長さ: 23.6mm
テーパ率: 3%

エンド

エンドサクセスチップ

エンドサクセス キット

内容チップ ET-25、ET-18D、ET-BD、ET-PR、
ET-20、ET-25S 各 1 本
(※ ET-25L は含まれません)

商品コード 00824255
標準価格 ¥92,000



チップスタンド

(※チップスタンドのみ)

商品コード 00824260
標準価格 ¥13,000



エンド

■ ET チップ

商品名 ET チップ (ET40)



商品コード 00824251

標準価格 ¥13,000



長さ: 25mm

テーパ率: 4%

■ 使用するパワー

P-MAX E8 ~ E10

- 使用部位
根管の中間部及び根尖 1/3
- 用途
閉塞および破折エンドインスツルメントの除去
- 特長
再治療に使用するチップで最もパワフルなチップ



商品名 ET チップ (ET20D)



商品コード 00824252

標準価格 ¥15,000



長さ: 15mm

テーパ率: 5%

ダイヤモンドコーティング

■ 使用するパワー

P-MAX E8 ~ E10

- 使用部位
歯冠部から 1/3
- 用途
固い材料の除去
- 特長
ダイヤモンドコーティングが施され、
切削性に優れたチップ



商品名 ET チップ (ET40D)



商品コード 00824253
標準価格 ¥15,000



長さ: 25mm
テーパ率: 4%
ダイヤモンドコーティング

■ 使用するパワー

P-MAX E8 ~ E10

■ 使用部位
根管の中間部及び根尖 1/3

■ 用途
固い材料の除去

■ 特長
ダイヤモンドコーティングが施され、
再治療に使用するチップで最もパワフル



■ エンドサクセス キャナル アクセスチップ

商品名 エンドサクセスキャナルアクセスチップ CAP1



商品コード 00824281
標準価格 ¥18,000



長さ: 12mm
テーパ率: 6%

■ 使用部位
髓室部など

■ 用途
髓室部の側壁部の形成

■ 特長
セメントや象牙質残渣を効率的に除去し、
均質な根管壁形成が可能

■ 使用するパワー

P-MAX E5 ~ E7



エンド

商品名 エンドサクセスキャナルアクセスチップ CAP2



商品コード 00824282
標準価格 ¥18,000




長さ: 9mm
テーパ率: 5%

- 使用部位
髄室部など
- 用途
第 4 根管や隠れた根管を特定。髄床底の清掃や近心根管の開口
- 特長
先端部分に切削効果があるチップ

■ 使用するパワー

P-MAX E5 ~ E7

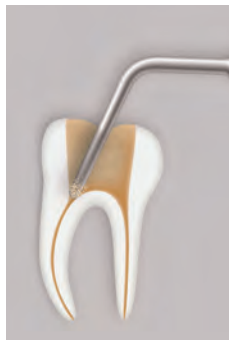

商品名 エンドサクセスキャナルアクセスチップ CAP3



商品コード 00824283
標準価格 ¥18,000




長さ: 8mm
テーパ率: 6%

- 使用部位
髄室部など
- 用途
根管の特定と根管口の明示、歯髄結石・突起・充填物など石灰化物や象牙組織の除去

- 特長
先端部分に切削効果があるチップ

■ 使用するパワー

P-MAX E5 ~ E7

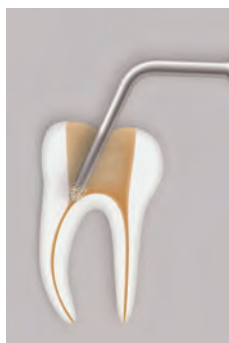

エンドサクセス キャナルアクセスチップ キット

内容チップ CAP1、CAP2、CAP3 各 1 本

商品コード 00824280

標準価格 ¥54,000

■ エンドサクセス アピカル サージェリーチップ (逆根充用チップ)

商品名 エンドサクセスアピカルサージェリーチップ AS3D




商品コード 00824271
標準価格 ¥16,000



- 使用部位
前歯
- 用途
前歯部分の逆根管形成。シークエンスの第1ステップで使用
- 特長
新しいダイヤモンドコーティングの採用で効率良くなると共に逆根管充填治療をより精密に進めることが可能になっただけでなく、骨と歯周組織を保護します

■ 使用するパワー

P-MAX E2 ~ E5

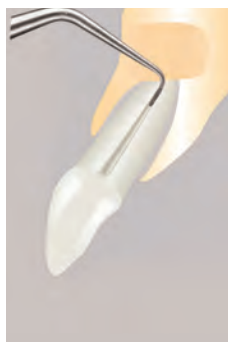

ダイヤモンド: 30μm
チップの作業長: 3mm
テーパ率: 9%

商品名 エンドサクセスアピカルサージェリーチップ AS6D



商品コード 00824272
標準価格 ¥16,000



- 使用部位
前歯
- 用途
前歯部分の逆根管充填。シークエンスの第2ステップで使用
- 特長
新しいダイヤモンドコーティングの採用で効率良くなると共に逆根管充填治療をより精密に進めることが可能になっただけでなく、骨と歯周組織を保護します

■ 使用するパワー

P-MAX E2 ~ E5



ダイヤモンド: 30μm
チップの作業長: 6mm
テーパ率: 9%

エンド

商品名 エンドサクセスアピカルサージェリーチップ AS9D



商品コード 00824273
標準価格 ¥16,000



- 使用部位
前歯
- 用途
前歯部分の逆根管形成。シークエンスの第3ステップで使用
- 特長
新しいダイヤモンドコーティングの採用で効率が悪くなると共に逆根管充填治療をより精密に進めることが可能になっただけでなく、骨と歯周組織を保護します
- 使用するパワー

P-MAX E2 ~ E5



ダイヤモンド: 30 μ m
チップの作業長: 9mm
テーパ率: 8%

商品名 エンドサクセスアピカルサージェリーチップ ASRD



商品コード 00824274
標準価格 ¥16,000



- 使用部位
臼歯
- 用途
臼歯部の逆根管形成
- 特長
チップの形状が右カーブ。小臼歯や大臼歯の逆根管充填に最適
- 使用するパワー

P-MAX E5 ~ E9



ダイヤモンド: 30 μ m
チップの作業長: 3mm
テーパ率: 10%

商品名 エンドサクセスアピカルサージェリーチップ ASLD



商品コード 00824275
標準価格 ¥16,000



- 使用部位
臼歯
- 用途
臼歯部の逆根管形成
- 特長
チップの形状が左カーブ。小臼歯や大臼歯の逆根管充填に最適

■ 使用するパワー

P-MAX

E5 ~ E9



ダイヤモンド: 30 μ m
チップの作業長: 3mm
テーパ率: 10%

エンドサクセス アピカルサージェリーチップ キット

内容チップ AS3D、AS6D、AS9D、ASRD、ASLD 各 1 本

商品コード 00824270

標準価格 ¥78,000

■ レトロフィリングチップ (逆根充用チップ)

商品名 レトロチップ S12-70D



商品コード 00824221
標準価格 ¥15,000



- 使用部位
臼歯
- 用途
臼歯部の逆根管形成
- 特長
バックアクションタイプで先端角度が70、臼歯の逆根管充填に最適

■ 使用するパワー

P-MAX

E5 ~ E10



ダイヤモンド: 30 μ m
チップの作業長: 5mm
テーパ率: 9%

エンド

■ マイクロレトロチップ (逆根充用チップ)

商品名 マイクロレトロチップ P14D



商品コード 00824244

標準価格 ¥15,000



ダイヤモンド: 30 μ m

チップの作業長: 5mm

テーパ率: 7%

■ 使用部位
前歯

■ 用途
前歯部の逆根管形成

■ 特長
ダイヤモンドコーティングが施された
ユニバーサルタイプ

■ 使用するパワー

P-MAX

E2 ~ E10



商品名 マイクロレトロチップ P15RD



商品コード 00824246

標準価格 ¥15,000



ダイヤモンド: 30 μ m

チップの作業長: 5mm

テーパ率: 7%

■ 使用部位
臼歯

■ 用途
臼歯部の逆根管形成

■ 特長
ダイヤモンドコーティングが施された右
に湾曲したチップ

■ 使用するパワー

P-MAX

E5 ~ E10



商品名 マイクロレトロチップ P15LD



商品コード 00824245

標準価格 ¥15,000



ダイヤモンド: 30 μ m

チップの作業長: 5mm

テーパ率: 7%

■ 使用部位
前歯

■ 用途
臼歯部の逆根管形成

■ 特長
ダイヤモンドコーティングが施された左
に湾曲したチップ

■ 使用するパワー

P-MAX

E5 ~ E10



エ
ン
ド

マ
イ
ク
ロ
レ
ト
ロ
チ
ッ
プ

エンド

■ AM ファイル

商品名 AM ファイル 21mm #10



商品コード 00823421
標準価格 ¥6,000 (4 本入)



■ 使用するパワー

P-MAX E1 ~ E6

- 使用部位
全顎
- 用途
根管拡大、注水、石灰化したデンチン及びガッタパーチャ、破折ファイルの除去など
- 特長
切削力に優れたインスツルメント。フレキシブルでプレカーブの付与が可能



商品名 AM ファイル 21mm #15



商品コード 00823422
標準価格 ¥6,000 (4 本入)



■ 使用するパワー

P-MAX E1 ~ E6

- 使用部位
全顎
- 用途
根管拡大、注水、石灰化したデンチン及びガッタパーチャ、破折ファイルの除去など
- 特長
切削力に優れたインスツルメント。フレキシブルでプレカーブの付与が可能



商品名 AM ファイル 21mm #25



商品コード 00823424
標準価格 ¥6,000 (4 本入)



■ 使用するパワー

P-MAX E1 ~ E6

- 使用部位
全顎
- 用途
根管拡大、注水、石灰化したデンチン及びガッタパーチャ、破折ファイルの除去など
- 特長
切削力に優れたインスツルメント。フレキシブルでプレカーブの付与が可能



商品名 AM ファイル 21mm #30



商品コード 00823425
標準価格 ¥6,000 (4 本入)



■ 使用するパワー

P-MAX E1 ~ E6

- 使用部位
全顎
- 用途
根管拡大、注水、石灰化したデンチン及びガッタパーチャ、破折ファイルの除去など
- 特長
切削力に優れたインスツルメント。フレキシブルでプレカーブの付与が可能



エンド

商品名 AM ファイル 25mm #10



商品コード 00823431
標準価格 ¥6,000 (4 本入)



■ 使用するパワー

P-MAX	E1 ~ E6
-------	---------

- 使用部位
全顎
- 用途
根管拡大、注水、石灰化したデンチン及びガッタパーチャ、破折ファイルの除去など
- 特長
切削力に優れたインスツルメント。フレキシブルでプレカーブの付与が可能



商品名 AM ファイル 25mm #15



商品コード 00823432
標準価格 ¥6,000 (4 本入)



■ 使用するパワー

P-MAX	E1 ~ E6
-------	---------

- 使用部位
全顎
- 用途
根管拡大、注水、石灰化したデンチン及びガッタパーチャ、破折ファイルの除去など
- 特長
切削力に優れたインスツルメント。フレキシブルでプレカーブの付与が可能



商品名 AM ファイル 25mm #25



商品コード 00823434
標準価格 ¥6,000 (4 本入)



■ 使用するパワー

P-MAX E1 ~ E6



- 使用部位
全顎
- 用途
根管拡大、注水、石灰化したデンチン及びガッタパーチャ、破折ファイルの除去など
- 特長
切削力に優れたインスツルメント。フレキシブルでプレカーブの付与が可能

商品名 AM ファイル 25mm #30



商品コード 00823435
標準価格 ¥6,000 (4 本入)



■ 使用するパワー

P-MAX E1 ~ E6



- 使用部位
全顎
- 用途
根管拡大、注水、石灰化したデンチン及びガッタパーチャ、破折ファイルの除去など
- 特長
切削力に優れたインスツルメント。フレキシブルでプレカーブの付与が可能

エンド

■ イリセーフ ファイル

スメア層、デンチンの切除片、バクテリアを根管内から取り除くことを目的として開発されたファイルです。次亜塩素酸ナトリウムや EDTA と組み合わせて根管内の洗浄に使用します。切削効果がないので、根管内を傷つけることなく根管洗浄が可能です。

商品名 イリセーフ ファイル IRR 20/21mm



商品コード 00824290
標準価格 ¥13,500（4本入）



■ 使用するパワー

P-MAX E1 ~ E4

■ 使用部位
全顎

■ 用途
スメア層、デンチンの切削片、バクテリアの除去。次亜塩素酸ナトリウムや EDTA と組み合わせて根管内の洗浄

■ 特長
切削効果がないので、根管内を傷つけることなく根管洗浄が可能



商品名 イリセーフ ファイル IRR 20/25mm



商品コード 00824291
標準価格 ¥13,500（4本入）



■ 使用するパワー

P-MAX E1 ~ E4

■ 使用部位
全顎

■ 用途
スメア層、デンチンの切削片、バクテリアの除去。次亜塩素酸ナトリウムや EDTA と組み合わせて根管内の洗浄

■ 特長
切削効果がないので、根管内を傷つけることなく根管洗浄が可能



商品名 イリセーフ ファイル IRR 25/21mm



商品コード 00824292

標準価格 ￥13,500 (4本入)



■ 使用するパワー

P-MAX	E1 ~ E4
-------	---------



- 使用部位
全顎
- 用途
スミア層、デンチンの切削片、バクテリアの除去。次亜塩素酸ナトリウムや EDTA と組み合わせて根管内の洗浄
- 特長
切削効果がないので、根管内を傷つけることなく根管洗浄が可能

商品名 イリセーフ ファイル IRR 25/25mm



商品コード 00824293

標準価格 ￥13,500 (4本入)



■ 使用するパワー

P-MAX	E1 ~ E4
-------	---------



- 使用部位
全顎
- 用途
スミア層、デンチンの切削片、バクテリアの除去。次亜塩素酸ナトリウムや EDTA と組み合わせて根管内の洗浄
- 特長
切削効果がないので、根管内を傷つけることなく根管洗浄が可能

エンド

商品名 コンデンサー #1 (S04)

商品コード 00444131

標準価格 ¥12,000



■ 使用部位
全顎

■ 用途
ガッタパーチャポイントの充填

■ 特長
ガッタパーチャポイントと根管壁がよく
なじみ、緊密で均質な根管充填が可能

■ 使用するパワー

P-MAX

E5 ~ E10

ガッタパーチャ充填用 直径：0.4 mm

長さ：40mm

テーパ率：4%



PROTHETICS

形成



形成

形成後のショルダー部の凹凸部の仕上げ等にもスプラソンのチップは有効に使用する事が出来ます。

歯肉にダメージを与えず、クリアなフィニッシュラインの形成を超音波を利用することにより安全かつ簡単、確実に行うことが出来ます。

■ マージンファイル

マージンファイルは東京の内藤 正裕先生により考案されたものです。

ダイヤモンドバーやカーバイドバーを使用して形成を行ったときにできるショルダー部の凹凸面の仕上げや、形成限界のラインアングルを歯肉にダメージを与えずに超音波によって正確、容易に仕上げることを目的として開発されました。特に高度な適合精度が必要なカラーレスメタルボンドやオールセラミックス等のマージン部の形成には不可欠なものです。

- ・ マージンファイルの先端にはダイヤモンドがコーティングされています。
- ・ ショルダー形成等でバーの使用の際にできた凹凸面を、マージンファイルを使用することによって滑沢にできます。
- ・ チゼルチップのようにシャープニングの必要がありません。

商品名 マージンファイル MF, N-1



商品コード 00414610

標準価格 ¥9,000



■ 使用部位
支台歯のマージン部


■ 用途
ダイヤモンドバーやカーバイドバーを使用して形成を行ったときにできる凹凸面の仕上げ

■ 特長
カラーレスメタルボンドやオールセラミックス等のマージン形成に不可欠

■ 使用するパワー

P-MAX

E5 ~ E10

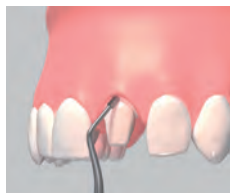

商品名 マージンファイル MF, N-2



商品コード 00414620

標準価格 ¥9,000



■ 使用部位
支台歯のマージン部

■ 用途
ダイヤモンドバーやカーバイドバーを使用して形成を行ったときにできる凸凹面の仕上げ

■ 特長
カラーレスメタルボンドやオールセラミックス等のマージン形成に不可欠

■ 使用するパワー

P-MAX

E5～E10



マージンファイル セット (2本組)

内容チップ MF, N-1、MF, N-2 各1本

商品コード 00414601

標準価格 ¥17,000

形成

マージンファイル

形成

■ パーフェクトマージンチップ ウルトラ

パーフェクトマージンチップウルトラは、南昌宏先生によって考案されたチップです。
CAD/CAM システムによる補綴物の製作と支台歯形成の仕上げで求められる厳しい要求に応えるために開発されたチップです。

商品名 パーフェクトマージンチップ ウルトラ PMU1



商品コード 00823681

標準価格 ¥20,000




■ 使用部位
支台歯のマージン部

■ 用途
ダイヤモンドバーで歯肉縁上を形成した後の
歯肉溝内の形成（歯肉縁上の研磨）に使用

■ 特長
オールセラミッククラウンの支台歯の仕上げに適しています。先端から 1mm の位置にレーザーマーキング施されていて、チップの先端がどの程度の深さまで入っているか確認可能

■ 使用するパワー

P-MAX E5

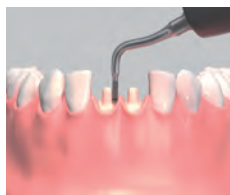

商品名 パーフェクトマージンチップ ウルトラ PMU2



商品コード 00823682

標準価格 ¥20,000



■ 使用部位
支台歯のマージン部

■ 用途
ダイヤモンドバーで歯肉縁上を形成した後の
歯肉溝内の形成（歯肉縁上の研磨）に使用

■ 特長
オールセラミッククラウンの支台歯の仕上げに適しています。先端から 2mm の位置にレーザーマーキング施されていて、チップの先端がどの程度の深さまで入っているか確認可能

■ 使用するパワー

P-MAX E5



商品名 パーフェクトマージンチップ ウルトラ PMU3



商品コード 00823683

標準価格 ¥20,000



- 使用部位
支台歯のマージン部
- 用途
先端にφ 1.7mmの半球型ダイヤモンドコーティングチップ。近心側に未形成の歯牙が存在する際のフィニッシュラインの仕上げに可能
- 特長
回転切削器具では到達のむつかしい隣接面でもこのチップを使うと簡単に到達可能
- 使用するパワー

P-MAX	E5
-------	----

商品名 パーフェクトマージンチップ ウルトラ PMU4



商品コード 00823684

標準価格 ¥20,000



- 使用部位
支台歯のマージン部
- 用途
先端にφ 1.7mmの半球型ダイヤモンドコーティングチップ。遠心側に未形成の歯牙が存在する際のフィニッシュラインの仕上げに可能
- 特長
回転切削器具では到達のむつかしい隣接面でもこのチップを使うと簡単に到達可能
- 使用するパワー

P-MAX	E5
-------	----

形成

パーフェクトマージンチップウルトラ

形成

商品名 パーフェクトマージンチップ ウルトラ PMU5



商品コード 00823685

標準価格 ¥20,000



- 使用部位
支台歯のマージン部
- 用途
先端に ϕ 1.7mm の半球型ダイヤモンドコーティングチップ。先端の半球を左に45°傾けてセット。前歯部隣接面フィニッシュラインの仕上げに使用
- 特長
前歯部において隣接歯を傷つけずに隣接面の形成を行うことができる
- 使用するパワー

P-MAX

E5

商品名 パーフェクトマージンチップ ウルトラ PMU6



商品コード 00823686

標準価格 ¥20,000



- 使用部位
支台歯のマージン部
- 用途
先端に ϕ 1.7mm の半球型ダイヤモンドコーティングチップ。先端の半球を右に45°傾けてセット。前歯部隣接面フィニッシュラインの仕上げに使用
- 特長
前歯部において隣接歯を傷つけずに隣接面の形成を行うことができる
- 使用するパワー

P-MAX

E5

パーフェクトマージンチップ ウルトラ セット

内容チップ PMU1、PMU2、PMU3、PMU4、PMU5、PMU6 各1本

商品コード 00823680

標準価格 ¥100,000

■ FLT チップ

ダイヤモンドバーやカーバイドバーを使用して支台歯形成を行った後の最終仕上げとして使用します。チップの先端形状により、ライトシャンファー用、ヘビィシャンファー用、ディープシャンファー用の3種類に各々先端がダイヤモンドコーティングされた物とされていない物の合計6種類あります。

商品名 FLT チップ FLT-L-D (ダイヤモンド付ライトシャンファー)



商品コード 00414501

標準価格 ¥9,000



- 使用部位
支台歯のマージン部


- 用途
臼歯金属冠の支台歯形成で比較的切削量の少ないフィニッシングラインに使用

- 特長
先端の形状がライトシャンファーになっていて、ダイヤモンドコーティングが施されている

- 使用するパワー

P-MAX

P1 ~ P5

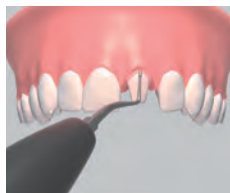

商品名 FLT チップ FLT-L (ライトシャンファー)



商品コード 00414502

標準価格 ¥8,000



- 使用部位
支台歯のマージン部

- 用途
臼歯金属冠の支台歯形成で比較的切削量の少ないフィニッシングラインに使用

- 特長
先端の形状がライトシャンファーになっている

- 使用するパワー

P-MAX

P1 ~ P5

形成

商品名 FLT チップ FLT-H-D (ダイヤモンド付ヘビーシャンファア)

商品コード 00414503

標準価格 ¥9,000



使用部位

支台歯のマージン部

用途

審美性を考慮した支台歯で切削量が極めて多いフィニッシングライン、ショルダータイプのフィニッシングラインに使用

特長

先端の形状がヘビーシャンファアになっていて、ダイヤモンドコーティングが施されている

使用するパワー

P-MAX

P1 ~ P5

商品名 FLT チップ FLT-H (ヘビーシャンファア)

商品コード 00414504

標準価格 ¥8,000



使用部位

支台歯のマージン部

用途

審美性を考慮した支台歯で切削量が極めて多いフィニッシングライン、ショルダータイプのフィニッシングラインに使用


特長

先端の形状がヘビーシャンファアになっている

使用するパワー

P-MAX

P5 程度

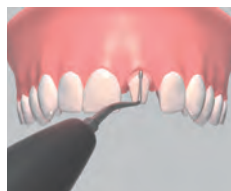

商品名 FLT チップ FLT-D-D (ダイヤモンド付ディープシャンファア)

商品コード 00414505

標準価格 ¥9,000



■ 使用部位
支台歯のマージン部

■ 用途
臼歯金属冠および前歯前装冠の支台形成で比較的小削量の多いフィニッシングラインに使用

■ 特長
先端の形状がディープシャンファアになっていて、ダイヤモンドコーティングが施されている

■ 使用するパワー

P-MAX

P5 程度

商品名 FLT チップ FLT-D (ディープシャンファア)

商品コード 00414506

標準価格 ¥8,000



■ 使用部位
支台歯のマージン部

■ 用途
臼歯金属冠および前歯前装冠の支台形成で比較的小削量の多いフィニッシングラインに使用

■ 特長
先端の形状がディープシャンファアになっている

■ 使用するパワー

P-MAX

P5 程度

FLT チップ 6 本セット

内容チップ FLT-L-D、FLT-L、FLT-H-D、FLT-H、FLT-D-D、FLT-D 各 1 本

商品コード 00414500

標準価格 ¥48,000



BOOST

補綴



補綴

クラウンやポストの除去、セメントに流動性を与える等、補綴時に有効なチップ類です。

■ スプラソンチップ

商品名 スプラソンチップ #5AE (水あり)



商品コード 00444125

標準価格 ¥14,000



■ 使用部位
全顎

■ 用途
クラウン・ポストの撤去

■ 特長
注水が可能な撤去用チップ

■ 使用するパワー

P-MAX S10



商品名 ピエゾセムチップ C20 (曲)



商品コード 00823620

標準価格 ¥14,500



■ 使用部位
臼歯部

■ 用途
臼歯部、インレー / オンレーの接着時の
コンデンセーション

■ 特長
セメントの流動性を増し、補綴物の浮き
上がりを防止します

■ 使用するパワー

P-MAX S1 ~ S3



P-MAX

アクセサリー・
オプション



アクセサリー・オプション

商 品	用途・内容	標準価格
 ニュートロンLED スリムハンドピース (ホワイト) 商品コード 00822320 ニュートロンLED スリムハンドピース (ブルー) 商品コード 00822321	より細く使い易くなったハンドピースです。LED (ホワイト/ブルー) 付です。ブルーLEDはF.L.A.G. (フラグ) システムと併せて使うことで、プラークの残渣を確認しながらプラーク除去ができます。ハンドピース内部の発振体がチタン製なので、耐腐食性に優れたハンドピースです。  	¥113,000
 ニュートロンチタンハンドピース 商品コード 00822230	ハンドピース内部の発振体がチタン製なので、耐腐食性に優れたハンドピースです。(ライト無)	¥68,000
 ニュートロンLED チタンハンドピース 商品コード 00822232	ハンドピース内部の発振体がチタン製なので、耐腐食性に優れたハンドピースです。(ライト付)	¥90,000
F.L.A.G. (フラグ) 液 商品コード 00822332	 ブルーLEDライト (B-LED) F.L.A.G. 液を組み合わせることによって今まで見えなかったプラークが浮き上がるので、患者のプラークの状態を確認しながらディブラーキングができます。	¥17,000
F.L.A.G. システム スターターキット 商品コード 00822333	セット内容 ・ニュートロンLED スリムハンドピース (ブルー) ・F.L.A.G. (フラグ) 液 1.5mL × 5 ヶ	¥135,000
 ニュートロンスリム ハンドピースキット 商品コード 00822331	スプラソン P-MAX 2 (LED 無) をスリムLED付に変更するためのキットです。	¥145,000
 ニュートロンLED キット 商品コード 00822235	スプラソン P-MAX 2 (LED 無) をLED付に変更するためのキットです。	¥150,000

商 品		用途・内容	標準価格
ユニバーサルレンチ 商品コード 00823416		全てのチップに使用可能なレンチです。	¥4,500
オートクレープ ボックス プラスチック 商品コード 00822251		ハンドピースやスケーリングチップ等をまとめてオートクレープ滅菌する時に使用します。	¥9,000
トルクレンチ 商品コード 00822259		プラスチック製のボックス型トルクレンチ（スケーリングチップのみ）です。トルクレンチなので適切な締め付け具合でチップを取り付けることができます。	¥4,000
ハンドピースホルダーカバー (スリム LED ハンドピース) 商品コード 00822318		シリコン製のハンドピースサポートは取り外してジェットウォッシャーでの洗浄・消毒およびオートクレープ滅菌が可能。より清潔にお使い頂けます。	¥1,500
スプラゾン P-MAX 2 注水カセット 商品コード 00822276		タンク式注水システムを使用する時に使用する注水カセットの補充品です。	¥2,800
チタン ステリジョイント 商品コード 00822246		ステリ式注水システムを使用する時はハンドピースとハンドピースコードの間に接続します。	¥55,000
チタン LED ステリジョイント 商品コード 00822248		タンク式注水システムを使用するときは、本体とハンドピースコードの間に接続します。ステリ式注水システムを使用する時はハンドピースとハンドピースコードの間に接続します。	¥63,000
P-MAX 2 ステリジョイント スリム LED ハンドピース用 商品コード 00822335		ステリ式注水システムを使用する時にハンドピースコードとスリムハンドピースの間に接続します。	¥68,000

アクセサリ・オプション

商 品	用途・内容	標準価格
タンク式注水システム 商品コード 00822240 	スプラソン P-MAX 2ベーシックシステムをタンク式注水システムに変更する際に使用します。	¥62,000
スteri式注水システム (LED 無) (チタンステリジョイント付) 商品コード 00822242	スプラソン P-MAX 2ベーシックシステムをSteri式注水システム付に変更する際に使用します。 ご使用の機種により 3 種類のキットからの選択になります。ご使用の機種に最適なキットにつきましては、弊社および取扱店までご相談ください。	¥80,000
Steri式注水システム (LED 付) (チタン LED ステリジョイント付) 商品コード 00822244		¥90,000
P-MAX 2 Steri式注水システム スリム LED (スリム LED ステリジョイント付) 商品コード 00822334		¥95,000
チップ プロテクター 商品コード 00823419 	ハンドピースに装着された未使用のチップにカバーをして指等が触れてケガをするのを防ぎます。	¥1,600
P-MAX オートクレープ ボックス 商品コード 00823417 	P-MAX ニュートロンハンドピースやスケーリングチップ等をまとめてオートクレープ滅菌する時に使用します。	¥14,000
注水チューブ P-MAX 用 (1 本) 商品コード 00823454 	P-MAX 注水システム／Steri式注水システム用の注水チューブです。	¥3,600
ガラスボトル 300mL (グレーキャップ付) 商品コード 00823448 	P-MAX 注水システム／Steri式注水システム用ガラスボトルです。	¥2,500
ゴム栓 (10ヶ入) 商品コード 00823456 	P-MAX 注水システム／Steri式注水システム用のゴム栓です。	¥6,000
ボトルハンガー (プラスチック) 商品コード 00823463 	Steri式注水システムのプラスチック製のガラスボトル用のハンガーです。	¥600
LM セルボマックス ウルトラソニックチップケース 商品コード 00233197 	滅菌可能なウルトラソニックチップ専用のホルダーです。	¥5,500

ステリジョイント適合表

ステリジョイントは3種類あり、使用するハンドピース、注水システムにより選択する必要があります。
適応する各ステリジョイントは、以下の通りになります。

	タンク式注水システム			ステリ式注水システム		
ハンドピース	ニュートロン チタンハンドピース	ニュートロンLED スリムハンドピース	ニュートロンLED チタンハンドピース	ニュートロン チタンハンドピース	ニュートロンLED スリムハンドピース	ニュートロンLED チタンハンドピース
ステリジョイント	チタン LEDステリジョイント			チタンステリジョイント	ステリジョイント スリムLED用	チタンLED ステリジョイント
	スプラソン P-MAX2 本体とハンドピースコードの間に接続 			ハンドピースとハンドピースコードの間に接続 		
ハンドピースコード	スプラソンP-MAX2 ハンドピースコード	スリムLED用 ハンドピースコード	LEDハンドピースコード	スプラソンP-MAX2 ハンドピースコード	スリムLED用 ハンドピースコード	LEDハンドピースコード

スプラソン P-MAX2 が 選ばれる理由

詳細はこちら▶



P-MAX²
ILLUMINATION POWERED



アク
セサ
リ
ー
オ
ブ
シ
ョ
ン



管理医療機器 医療機器認証番号 224ALBZX00039000

管理医療機器 医療機器認証番号 16300BZZ02398000



【札幌営業所】〒064-0824 札幌市中央区北4条西20-2-1 Nord 420BLD1階 TEL(011)616-5814
【関東北営業所】〒336-0017 さいたま市南区南浦和3-34-2 TEL(048)884-3951
【東京支店】〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クロス12階 TEL(03)5217-4618
【名古屋営業所】〒464-0075 名古屋市中千種区内山3-10-17 今池セントラルビル2階 TEL(052)733-1877
【大阪本社】〒532-0033 大阪府大阪市淀川区新高1-1-15 TEL(06)6396-4400
【広島営業所】〒732-0804 広島市南区西蔵屋3-2-1 日通ビル1階 TEL(082)207-2870
【福岡営業所】〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-30 八重洲博多ビル5階 TEL(092)432-4618
<https://www.hakusui-trading.co.jp/>

2023.10.G.3,000 A11 Ver.2.6.1