

NEW!

R-モーション

⚠ R-モーションファイルは使い捨てとなります

医療機器認証番号 305AKBZX00013000 管理医療機器

R-モーション グライダー

種類: 21mm/25mm/31mm  
#15/.03 標準価格 ¥6,800 [1箱3本入]



R-モーション グライダー C

種類: 21mm/25mm/31mm  
#15/.03 標準価格 ¥6,800 [1箱3本入]



R-モーション

種類: 21mm/25mm/31mm  
#20/.04, #25/.06, #30/.04,  
#40/.04, #50/.04

標準価格 ¥6,800 [1箱3本入]



※ #25のみ、.06テーパーとなります



関連商品

レイス エボ

エンジン用ニッケルチタンファイル

医療機器認証番号 302AKBZX00094000 管理医療機器

保険適用品

レイス エボ8%オープン用ファイル

種類: 19mm  
#25  
標準価格 ¥9,500 [1箱6本入]

レイス エボ2%

種類: 21mm/25mm/31mm  
#10,15,20,30  
標準価格 ¥9,500 [1箱6本入]

レイス エボ4%

種類: 21mm/25mm/31mm  
#10,15,20,25,30,35,40,50  
標準価格 ¥9,500 [1箱6本入]

レイス エボ6%

種類: 21mm/25mm/31mm  
#15,25,30,35,40  
標準価格 ¥9,500 [1箱6本入]

フィニッシャー

クリーニング用

医療機器認証番号 228AKBZX00040000 管理医療機器

保険適用品

種類: 21mm/25mm/31mm

#25/0% 標準価格 ¥11,500



フィニッシャーR

クリーニング用

リトリートメント用

医療機器認証番号 228AKBZX00040000 管理医療機器

保険適用品

種類: 21mm/25mm/31mm

#30/0% 標準価格 ¥11,500



XPエンド ライズ

根管形成用

医療機器認証番号 304AKBZX00075000 管理医療機器

保険適用品

XPエンド ライズ グライダー

種類: 21mm/25mm/31mm  
#15/04% 標準価格 ¥9,500 [1箱6本入]



XPエンド ライズ シェーパー

種類: 21mm/25mm/31mm  
#30/04% 標準価格 ¥11,500 [1箱3本入]  
標準価格 ¥22,000 [1箱6本入]




XPエンド ライズ シークエンスセット

種類: 21mm/25mm/31mm  
グライダー(#15/04%)×3本  
シェーパー(#30/04%)×3本  
標準価格 ¥15,200 [1箱6本入]



XPエンド ライズ リトリートメントセット

種類: 21mm/25mm/31mm  
Dレイス/シェーパー(#30/04%)×各1本  
フィニッシャーR(#30/0%)×1本  
標準価格 ¥9,800 [1箱3本入]

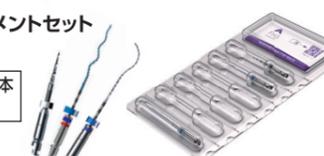

ZEISS

手術顕微鏡

EXTARO 300

デンタルマイクロスコープの次世代スタンダードモデル

製品情報はこちら

製造販売届出番号 一般医療機器 特定保守管理医療機器 手術顕微鏡 EXTARO 300 13B1X00119003570

acteon

豊富なチップラインアップ

歯科用多目的超音波治療器

スプラソン P-MAX2

製品情報はこちら

医療機器認証番号 224ALBZX00039000 管理医療機器 特定保守管理医療機器

FKG

swiss endo

FKG社(スイス)

※記載内容は2023年11月現在のものです。尚、記載価格はすべて税別です。

白水貿易株式会社

【札幌営業所】〒064-0824 札幌市中央区北4条西20-2-1 Nord 420BLD1階 TEL(011)616-5814  
 【関東北営業所】〒336-0017 さいたま市南区南浦和3-3-4-2 TEL(048)884-3951  
 【東京支店】〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クロス12階 TEL(03)5217-4618  
 【名古屋営業所】〒464-0075 名古屋市中千種区内山3-10-17 今池セントラルビル2階 TEL(052)733-1877  
 【大阪本社】〒532-0033 大阪府大阪市淀川区新高1-1-15 TEL(06)6396-4400  
 【広島営業所】〒732-0804 広島市南区西蔵屋3-2-1 日通ビル1階 TEL(082)207-2870  
 【福岡営業所】〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-30 八重洲博多ビル5階 TEL(092)432-4618

https://www.hakusui-trading.co.jp/ 2023.11.P3,000 F01 Ver.1.1.1

破折軽減!

噛み込み軽減!

レシプロケーティング  
モーション

破折リスクの軽減  
を実現した NiTi ファイル

NEW!

R-Motion®

R-モーション

ニッケルチタンファイル

シンプルな操作性!

高い柔軟性!

R-モーション グライダー  
(グライドパス用)

R-モーション  
(根管形成用)



# R-Motion®



## ■ 破折軽減!

ユニークなカッティングエッジデザイン

噛み込み破折を軽減した刃のデザイン

## ■ 認識しやすい!

ISO 規格カラー

※ラバーストッパーも ISO 規格カラー



## ■ 衛生的!

電解研磨

表面に凹凸がなく、  
ファイルの破折が低く衛生的



## ■ 高い切削能力!

強化された三角形の断面形状




- ・断面積のコアが小さいので柔軟性が高い
- ・鋭利で切削効率が高い
- ・部分的に膨らみを入れることにより強度が高い


## ■ 細くて湾曲がきつい根管にも!

先端のチップ形状

先端が #0.15 なので細い根管にも無理なく挿入可能

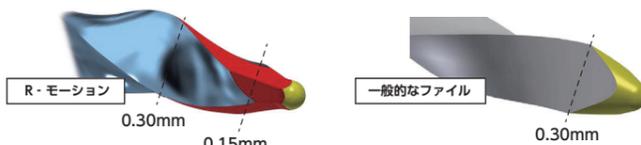


▶ 一般的なファイルを使用した場合

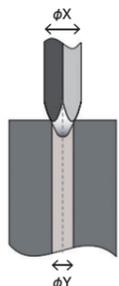

直径がXのファイルを直径がYの根管に挿入することはできません。まず最初にYと同じか小さいサイズのファイルを使用する必要があります。

▶ R-Motionを使用した場合

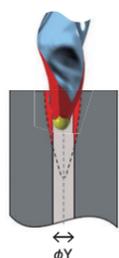

R-Motionだと先端が #15 の細さなので直径が細い根管でも簡単に挿入することができます。

## R-Motion ラインナップ サイズ (21mm、25mm、31mm)


- ・ R-Motion (#20/.04) ▶
- ・ R-Motion (#25/.06) ▶
- ・ R-Motion (#30/.04) ▶
- ・ R-Motion (#40/.04) ▶
- ・ R-Motion (#50/.04) ▶

※ファイルはシングルユースです

## オススメのモーター

レシプロケーティング  
モーション用モーター


150°回転し、次に逆方向に 30°回転したのち、再び 150°回転する動きを繰り返す。

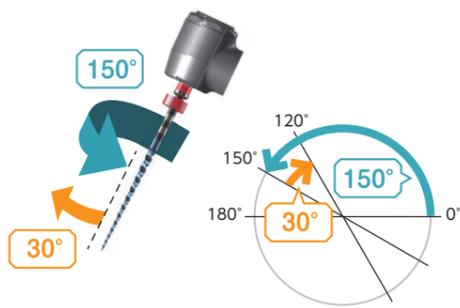

## 2種類の グライドパス用 NiTi ファイル

### R-モーション グライダー / R-モーション グライダー C

R-モーショングライダーを根管形成前に使用することによって湾曲のきつい根管形成も楽に行える

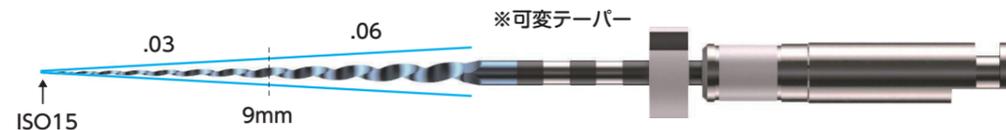

#### R-モーション グライダー (#15/.03)

- ・ヒートトリートメント加工により柔軟性が高い
- ・プリベンド可能



刃の色はブルー

#### R-モーション グライダー C (#15/.03)

- ・100%オーステナイト相で強度を重視
- ・高い切削性
- ・石灰化した根管に使用



刃の色はシルバー

## シーケンス (シングルレングス技法)

R-Motion

チュートリアル動画を **チェック!**



### ネジエーション

手用ファイル



### グライドパス用ファイル

石灰化・細い根管

R-モーション グライダー / R-モーション グライダー C



#15/.03 #15/.03

### 根管形成用ファイル

中間ファイル

細い根管

R-モーション #20



#20/.04

スタンダードな根管 (ほとんどのケース)

R-モーション #25



#25/.06

ミディアム根管

R-モーション #30



#30/.04

ラージ根管

R-モーション #40



#40/.04

ラージ根管

R-モーション #50



#50/.04

※ゆっくりと3回上下運動 (2~3mm) を行い、根管内を洗浄する。根尖に到達するまで継続する。