


クリニカル ステップがかんたん!! 口腔内・外での調整時間短縮!!
コストパフォーマンスが良い!! 用途にあった形態が選べる!!

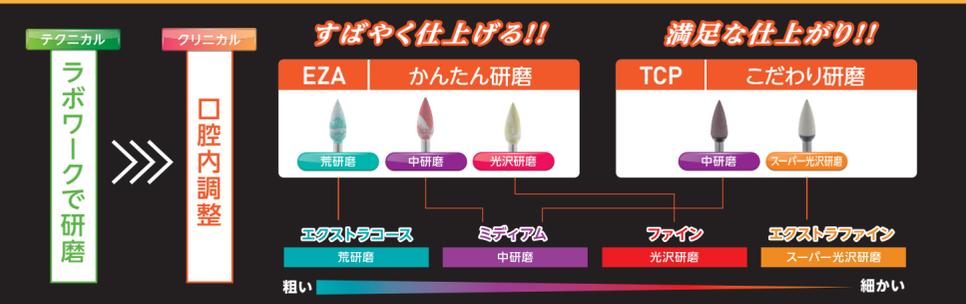

Clinical EZA ジルコニア / セラミック

医療機器届出番号 27B1X0002030012 一般医療機器

■ 研磨性が高い
■ ダイヤモンド粒子入り
■ カラーバリエーションが豊富
■ 微調整で光沢度アップ

コース	荒研磨	中研磨	光沢研磨	CA用
サイズ (mm)	φ4.4 × 10.5	φ3.3 × 7.5	φ6 × 8	φ10
推奨回転数 (rpm)	15,000	10,000	10,000	10,000
商品コード	15800103	15800113	15800123	15800133
標準価格 (3本)	¥ 3,500	¥ 3,000	¥ 3,500	¥ 3,500

Set EZA クリニカルAセット

103204XC / 103204M / 103204F 各1本

商品コード 15800000
標準価格 (1セット3本入) ¥ 3,200

ドレッシングストーン BAW930

65×20×3.5mm

商品コード 15898000
標準価格 (1個) ¥ 1,000

ポリッシングバーの形態を整えるために使用します。

TCP ジルコニア / セラミック

医療機器届出番号 27B1X0002030013 一般医療機器

■ セラミック・ジルコニア用
■ 2工程で完璧な仕上がり
■ 緻密なダイヤモンド粒子で効果アップ
■ 耐摩耗性

ミディアム	中研磨	スーパー光沢研磨	CA用
サイズ (mm)	φ4.4 × 10.5	φ6 × 8	φ10 × 0.8
推奨回転数 (rpm)	8,000	6,000	6,000
商品コード	15801103	15801113	15801123
標準価格 (3本)	¥ 3,500	¥ 3,500	¥ 3,500

エクストラファイン

スーパー光沢研磨	中研磨	スーパー光沢研磨	CA用
サイズ (mm)	φ4.4 × 10.5	φ6 × 8	φ10 × 0.8
推奨回転数 (rpm)	8,000	6,000	6,000
商品コード	15801203	15801213	15801223
標準価格 (3本)	¥ 3,500	¥ 3,500	¥ 3,500

関連商品 VITA shade VITA made. VITA

■ 焼成ファーンズ

ジルコニアファンタジック (焼成) ファーンズ
ビタ ジルコマツト 6100MS
医療機器届出番号 27B1X00020301006 一般医療機器

ポーセレンファーンズ
パキユマツト6000M
医療機器届出番号 27B1X00020223010 一般医療機器

プレスファーンズ
パキユマツト6000MP
医療機器届出番号 27B1X00020223011 一般医療機器

■ ジルコニアディスク

医療機器届出番号 302AKBZX0002000 管理医療機器

ビタYZ T (トランス)

ビタYZ HT (ハイトランス)

ビタYZ ST (スパートランス)

ビタYZ XT (エクストラトランス)

■ プレシント用カラーリング

医療機器届出番号 302AKBZX00017000 管理医療機器

ビタ YZ T カラーリングリキッド

ビタ YZ HT/ST/XT シェードリキッド

ビタ YZ エフェクトリキッド

■ ステイン

ビタアクセントプラス

医療機器届出番号 226AKBZX00042000 管理医療機器

■ ジルコニア陶材

ビタVM9

医療機器届出番号 222AKBZX00138000 管理医療機器

※当製品は株式会社デンタリードでの取り扱いとなります。

ご注文はサンポリッシャー専用の注文書をご利用ください。

白水ホームページよりダウンロード! [サンポリッシャー注文書](#)

サンポリッシャー注文書 ▶ <https://www.hakusui-trading.co.jp/products/92324491/>

記載の標準価格は2023年4月現在のものです。(他別)

SUN サン (ドイツ)

白水貿易株式会社

【札幌営業所】〒064-0824 札幌市中央区北4条西20-2-1 Nord 420BLD1階 TEL(011)616-5814
【関東北支店】〒335-0017 さいたま市南区南瀬和3-3-4-2 TEL(048)884-3561
【東京支店】〒101-0052 東京都千代田区神田川町1-11 千代田川町クロス12階 TEL(03)5211-4618
【名古屋支店】〒464-0075 名古屋市中区栄山3-10-17 栄山セントラルビル2階 TEL(052)733-1977
【大阪支店】〒532-0033 大阪府大阪市淀川区新高1-1-15 TEL(06)6396-4400
【広島営業所】〒732-0804 広島市南区安福3-2-1 白鷺ビル1階 TEL(082)207-2870
【福岡営業所】〒812-0018 福岡市南区多摩多摩東2-18-30 八重瀬ビル5階 TEL(092)2432-4618
<https://www.hakusui-trading.co.jp/> 2023.04.P2.000 D30 Ver.2.2.3

瞬輝!
ジルコニア研磨が
かんたん!!

ジルコニア研磨バー **サンポリッシャー**
Zirconia polishing bur



ジルコニアの「美しさ」再発見
未来を磨く
耐久性を追及!

ジルコニアも **ピッカピカ!**

滅菌 できます!

歯科補綴物(クリニカル)や歯科技工物(テクニカル)の研磨に

品質に自信あり!!

商品開発には、常に顧客の声が反映されています。SUN社独自で開発した材料を調査し、顧客の声を反映して設計された3Dデザインで金型を作成し、ポリッシャーのサンプルが顧客に届くまで何度も試験・改良が繰り返され、製品として完成します。サンポリッシャーは複雑なロボットテクノロジーと熟練スタッフの手作業により生産され製品試験とマイクロスコープチェックにより品質の安全性を保っています。

DIN EN ISO 13485取得

ジルコニア

高強度ジルコニアの表面は繊細な仕上がりが要求されるため、サンポリッシャーはまず外形を整え、次に完璧な表面を作る2段階方式を推奨しています。

ニケイ酸リチウム (LS2) ガラスセラミック

プレス式セラミックのクラウン・インレー・ベニアのマージンの繊細な部分をサンポリッシャーを使うことで、クラックが出ないように丁寧に仕上げることができます。

一般的なセラミックベニア

長石系セラミックは非常に審美的な高い材料です。形態や外形、表面性状はとても自然に仕上がります。緻密な歯頸部形成や切端部を機能的形態に形成できます。

テクニカル 効率よい研磨ステップ

ジルコニアの形態付与や研磨を3つのステップで仕上げる事ができます

STEP 1 形態調整
BWG / AWG

STEP 2 形態修正
MCP / PSC

STEP 3 最終仕上げ研磨
EZA / TCP

シンタリングには VITA社(ドイツ) ジルコニアシンタリングファーンズ ジルコマット6100MS

STEP 1 形態調整 焼結前のジルコニア 安全な調整!

プレシタジルコニア

医師機器届出番号 2781X00020230016 一般医療機器

ミディアム/ファイン
中研削/光沢研削 164104MF

サイズ [mm] φ10 × 22.7
推奨回転数 [rpm] 8,000
商品コード 15854300
標準価格(1本) ¥1,500

ダブル研磨のポイント

■ 緻密な研磨
■ 灰白色のホワイートゾーン

■ すばやく閉合
■ ミディアム

■ ホワイートゾーン
ポリリジャーでサポートピンの閉合部を研磨・形成

使用用途に合わせて2種類の研磨素材を使用し、プレシタクラウンを安全に研磨することができます。グレーゾーンでサポートピンをすばやく正確に閉合し、無着色のホワイートゾーンで表面への色移りなく、緻密な作業部位を破損させずに細かく緻密に研磨することができます。

AWG プレシタジルコニア

医師機器届出番号 2781X00020230015 一般医療機器

AWG テクニカルAセット
111104M / 115104M / 146104M / 560104MF 各1本
商品コード 15854000
標準価格(1セット4本入) ¥2,300

ファイ 10本入
光沢研削 106104F
サイズ [mm] φ4.3 × 12
推奨回転数 [rpm] 8,000
商品コード 15854218
標準価格(10本) ¥3,300

ミディアム/ファイン 10本入
中研削/光沢研削 560104MF
サイズ [mm] φ7 × 19
推奨回転数 [rpm] 8,000
商品コード 15854200
標準価格(1本) ¥1,300

ミディアム 10本入
中研削 111104M 115104M 146104M
サイズ [mm] φ5.6 × 13 φ7 × 13 φ15 × 0.3
推奨回転数 [rpm] 6,000 6,000 6,000
商品コード 15854108 15854118 15854128
標準価格(10本) ¥3,700 ¥4,400 ¥4,400

STEP 2 形態修正 時間短縮! 更に 経済的!

効率の良い修正!! 繊維な仕上げ!!

MCP 大きく修正

荒研削 中研削

PSC 繊維な修正

細研削

NEW 新発売 MCP 形態修正 荒研削 中研削 HP用

医師機器届出番号 2781X0002030001 一般医療機器

MCP テクニカルセット
138104C / 138104M / 151104M 各1本
商品コード 15853500
標準価格(1セット3本入) ¥10,700

■ 高い研削性能
■ 柔らかく滑らかな研磨による印象的な感触
■ あらゆるセラミックに使用
■ 研磨時の発熱が少ない
■ 柔軟性を高めるための2つの粒子サイズ

切削量が多い修正に適しています!

コース	138104C	159104C	219104C
サイズ [mm]	φ4 × 11	φ15 × 3.5	φ22 × 3
推奨回転数 [rpm]	20,000	8,000	8,000
商品コード	15853510	15853520	15853530
標準価格(1本)	¥3,700	¥4,800	¥8,300

■ MCEとMCPの耐久性の比較

コース	133104M	138104M	151104M	239104M
サイズ [mm]	φ6.5 × 13	φ4 × 11	φ12 × 2.5	φ22 × 0.8
推奨回転数 [rpm]	15,000	20,000	10,000	8,000
商品コード	15853540	15853550	15853560	15853570
標準価格(1本)	¥4,000	¥3,700	¥4,500	¥6,900

MCPはMCEと比較して粒子や配合比を変える事により、耐久性が向上しました。

NEW 新発売 PSC 形態修正 細研削 HP用

医師機器届出番号 2781X0002030007 一般医療機器

PSC テクニカルAセット
111104M / 115104M / 146104M / 560104MF 各1本
商品コード 15854000
標準価格(1セット4本入) ¥2,300

■ 研削性が高い
■ ダイヤモンド粒子入り
■ 高い耐久性
■ 滑らかな仕上げ

繊維なマージン部や特長付けに使用します

コース	566104F	151104F	132104F	138104F	199104F	508104F
サイズ [mm]	φ3.5 × 10	φ12 × 2.4	φ5 × 13	φ4 × 10.5	φ5	φ2.5 × 7
推奨回転数 [rpm]	15,000	10,000	15,000	15,000	15,000	15,000
商品コード	15855060	15855030	15855010	15855020	15855040	15855050
標準価格(1本)	¥4,300	¥6,500	¥5,000	¥4,300	¥4,300	¥3,800

PSC パンサー ストーンセット
商品コード 15855000
標準価格(1セット6本入) ¥27,000

STEP 3 研磨 かんたんステップで 驚きの輝き!

研磨の比較

コース	EZA	ミディアム	ファイン	エクストラファイン
サイズ [mm]	φ26 × 2	φ22 × 3.2	φ5.5 × 16	φ11.5 × 2.4
推奨回転数 [rpm]	6,000	6,000	15,000	6,000
商品コード	15850130	15850140	15850100	15850110
標準価格(1本)	¥8,300	¥4,600	¥1,600	¥1,900

■ グレーズファイリングなしのジルコニア修復に対応
■ 研削性が高い
■ 密度の高いダイヤモンド粒子
■ ジルコニアの光沢研削
■ 研磨時間を短縮できる

EZA 最終仕上げ研磨 荒研削 中研削 光沢研削 HP用

医師機器届出番号 2781X0002030012 一般医療機器

EZA テクニカルAセット
105104XC / 105104M / 105104F 各1本
商品コード 15850000
標準価格(1セット3本入) ¥4,300

■ 高い研削性能
■ 柔らかく滑らかな研磨による印象的な感触
■ あらゆるセラミックに使用
■ 研磨時の発熱が少ない
■ 柔軟性を高めるための2つの粒子サイズ

コース	140104XC	200104XC	105104XC	151104XC	177104XC
サイズ [mm]	φ26 × 2	φ22 × 3.2	φ5.5 × 16	φ11.5 × 2.4	φ6 × 15
推奨回転数 [rpm]	6,000	6,000	15,000	6,000	15,000
商品コード	15850130	15850140	15850100	15850110	15850120
標準価格(1本)	¥8,300	¥4,600	¥1,600	¥1,900	¥1,900

3ステップ研磨

コース	140104M	200104M	105104M	151104M	177104M
サイズ [mm]	φ26 × 2	φ22 × 3.2	φ5.5 × 16	φ11.5 × 2.4	φ6 × 15
推奨回転数 [rpm]	6,000	6,000	15,000	6,000	15,000
商品コード	15850230	15850240	15850200	15850210	15850220
標準価格(1本)	¥8,300	¥4,600	¥1,600	¥1,900	¥1,900

コース	140104F	200104F	105104F	151104F	177104F
サイズ [mm]	φ26 × 2	φ22 × 3.2	φ5.5 × 16	φ11.5 × 2.4	φ6 × 15
推奨回転数 [rpm]	6,000	6,000	15,000	6,000	15,000
商品コード	15850330	15850340	15850300	15850310	15850320
標準価格(1本)	¥8,300	¥4,600	¥1,600	¥1,900	¥1,900

TCP 最終仕上げ研磨 中研削 スーパー光沢研削 HP用

医師機器届出番号 2781X0002030013 一般医療機器

TCP テクニカルAセット
111104M / 115104M / 146104M / 560104MF 各1本
商品コード 15854000
標準価格(1セット4本入) ¥2,300

■ あらゆるセラミック修復物の研磨に対応
■ わずか2工程で高い光沢
■ コストパフォーマンスが良い
■ 多様なデザインで様々なシチュエーションに対応
■ 滑らかな仕上げ
■ cad/cam冠の研磨に適合

瞬時に高い光沢を出せるエクストラファインは、新世代ジルコニアに最適!!

コース	100104MSW4Z	140104M	158104MSW4Z	541104MSW4Z
サイズ [mm]	φ5.5 × 18	φ26 × 2	φ17 × 2.4	φ15 × 1
推奨回転数 [rpm]	12,000	8,000	8,000	8,000
商品コード	15851100	15851130	15851110	15851120
標準価格(1本)	¥1,900	¥8,300	¥5,400	¥4,800

コース	100104XFSW4Z	140104XF	158104XFSW4Z	541104XFSW4Z
サイズ [mm]	φ5.5 × 18	φ26 × 2	φ17 × 2.4	φ15 × 1
推奨回転数 [rpm]	12,000	8,000	8,000	8,000
商品コード	15851200	15851230	15851210	15851220
標準価格(1本)	¥1,900	¥8,300	¥5,400	¥4,800

インプラント アバットメント調整用

チタンベースとジルコニア(ニケイ酸)を同時に研磨が可能!

TCP パンサーアバットメントキット
140104M / 541104MSW4Z / 140104XC / 541104XFSW4Z 各1本
商品コード 15851300
標準価格(1セット) ¥31,000

コース	140104XC	541104XC
サイズ [mm]	φ26 × 2	φ15 × 1
推奨回転数 [rpm]	8,000	8,000
商品コード	15851320	15851330
標準価格(1本)	¥9,800	¥5,700