

仕 様

						
商品名	Stemi 305 スタンド型 (フロントレンズ x0.75付)	Stemi 305 Trino スタンド型 (フロントレンズ x0.75付)	Stemi 305 Cam スタンド型 (フロントレンズ x0.75付)	Stemi 305 スイングアーム型 (フロントレンズ x0.75付)	Stemi 305 Trino スイングアーム型 (フロントレンズ x0.75付)	Stemi 305 Cam スイングアーム型 (フロントレンズ x0.75付)
商品コード	45000210	45000230	45000250	45000310	45000330	45000350
総合倍率	6～30			6～30		
ズーム比	5倍ズーム			5倍ズーム		
ズーム方式	グリノー式			グリノー式		
観察角度	45°			45°		
視野径	23mm			23mm		
作業距離	128mm			128mm		
反射照明 LEDスポット	○			X		
反射照明 LED近同軸	○			○		
透過照明 LED明視野	○			X		
透過照明 LED暗視野	○			X		
撮影装置取付	取付不可	Cマウントカメラ用 0.5倍アダプター内蔵 [Cマウントカメラは別売]	1.2MP Wi-Fiカメラ内蔵	取付不可	Cマウントカメラ用 0.5倍アダプター内蔵 [Cマウントカメラは別売]	1.2MP Wi-Fiカメラ内蔵
標準価格	¥213,000	¥284,000	¥381,000	¥511,000	¥532,000	¥629,000

オプション



アジャスタースタンド(キャスター付)

スタンド型のStemi305を4段階に傾斜させることが可能。

標準価格 ¥18,000 [社外品]

商品コード: 45000450




フロントレンズ x0.5

作動距離は185mm。スタンド型には取付不可。

標準価格 ¥29,000

商品コード: 45000570

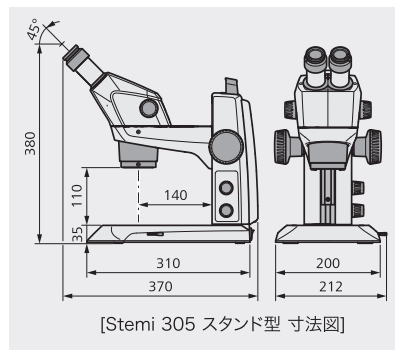

アイカップ boyafit

2ヶ入

標準価格 ¥3,500 [社外品]

商品コード: 45000551



ダブルスポット照明 K LED

フレキシブルアームLEDスポット照明2ヶ
スイングアーム型には取付不可。

標準価格 ¥32,000

商品コード: 45000566



リング照明 K LED ※

LEDリング照明。全点灯・分割点灯可能。

標準価格 ¥41,000

商品コード: 45000560

※ スタンド型以外でリング照明K LEDをLED近同軸照明と同時に使用する場合は
別途、コントローラー K LEDが追加が必要となります。



コントローラー K LED

LED照明用のコントローラー。

標準価格 ¥25,000

商品コード: 45000555

カールツァイスマイクロコピー株式会社

〒160-0003
東京都新宿区本塩町7番地

Tel 03-3355-0332
Fax 03-3359-2118

E-mail microscopy.ja@zeiss.com
URL <http://www.zeiss.co.jp/microscopy>

大阪営業所 〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3-35-22
Tel 06-6337-5465 Fax 06-6337-8017

名古屋営業所 〒465-0043 名古屋市名東区宝が丘25
Tel 052-777-1415 Fax 052-777-1417

福岡営業所 〒810-0062 福岡市中央区荒戸2-1-5
Tel 092-713-7662 Fax 092-711-0776

仙台営業所 〒980-0014 仙台市青葉区本町1-12-7
Tel 022-224-5655 Fax 022-224-5626

白水貿易株式会社

〒064-0824 札幌市中央区北4条西20丁目2番1号 Nord 420BLD1F ☎(011)616-5814
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クロス12F ☎(03)5217-4618
〒464-0075 名古屋市中千種区内山3-10-17 今池セントラルビル2F ☎(052)733-1877
〒532-0033 大阪市淀川区新高1丁目1番15号 ☎(06)6396-4400
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-30 八重洲博多ビル5F ☎(092)432-4618
<http://www.hakusui-trading.co.jp/>
2018.05.P1,000

※製品の仕様および外観は、改良のためお断りすることなく変更することがございますので、ご了承ください。 ※本カタログ中の製品の色彩は印刷物のため実物とは多少異なることがあります。 ※会社名、製品名称等は各社の商標または登録商標です。

GREENOUGH-TYPE Stereo Microscope from ZEISS

実体顕微鏡

Stemi 305
Stemi 305 **Trino**
Stemi 305 **Cam**

ZEISS クオリティーが可能にする
細部が見える 確かな歯科技工



HAKUSUI

ZEISS

We make it visible.

Stemi 305

光源とデータ取得を一体化した ALL IN ONE スタイル
コンパクトで使い勝手の良い歯科技工用実体顕微鏡



オールインワンのコンパクトボディ

照明やデータ取得機能を内蔵したAll In Oneタイプ。コンパクトなデザインなので使いやすく機能的です。
ユーザーのニーズに合う機種を3タイプから選択して頂けます。

■ Stemi 305

双眼観察のベーシックモデル



■ Stemi 305 Trino

Cマウントアダプタ0.5倍内蔵モデル

[Cマウントカメラは別売]



■ Stemi 305 Cam

1.2M Wi-Fi カメラ内蔵モデル
iPadアプリで画像表示や保存が可能。



Stemi 305 Camは専用 iOSアプリ『Labscope』を使用することで、画像の表示や撮影、録画をすることができます。『Labscope』をお手持ちのiPadに入れてご利用ください。(iPhoneでは使用できません。)



Free
開発: Carl Zeiss AG



倍率 (6~30倍) フロントレンズ x0.75 使用時




x6.0




x7.5



x15.0

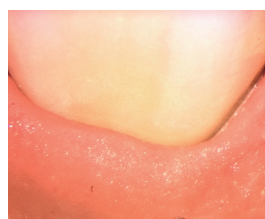

x22.5

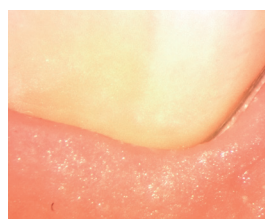

x30.0

※写真はイメージです。


3種類の照明装置を標準装備



近同軸照明
ズーム本体に内蔵。

近同軸照明、スポット照明、透過光照明（明視野、暗視野）を搭載しているので被写体に応じた照明を選択できます。3種類の照明を同時に使用することも可能です。

注：スイングアーム型には近同軸照明のみ装備

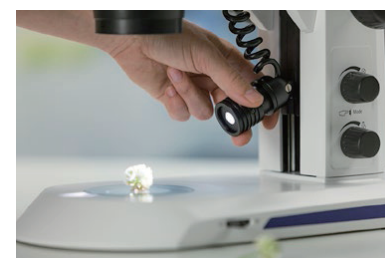

スポット照明
高さ・角度・集光を変えて照明可能。



透過光照明
明視野・暗視野照明の切替が可能。



近同軸照明とスポット照明を同時に使用。側面のダイヤルで光量調整・照明切替が可能。

明るくシャープなレンズ

カールツァイス社の光学技術力を活かしたレンズだからディーテールまでシャープに見えます。 フロントレンズ x0.75 標準装備。



作業距離は128mm

フロントレンズ
x0.75 使用時



豊富なオプション

より操作性を向上させる様々なオプションが揃っています。



ダブルスポット照明 K LED



コントローラー K LED リング照明 K LED

選べる設置方法

設置方法は2タイプから選択可能です。



電源内蔵で外部トランスが不要。コンパクトに使えるスタンド型。



スペースを有効活用できるスイングアーム型。