



LatchShort Polishing System

proxeoTM TWIST

プロキシオ

プロフィーコントラアングル WP-66W

「4mm」を差をつける。



“高さ”の革命 狭い領域や臼歯に届く

従来品

(高さ:約23mm)

※従来品の高さはコントラおよび
カップ/ブラシのメーカー・機種に
よって異なります。

proxeoTM TWIST

(高さ:約19mm)




4mm

臼歯部もラクラク

研磨ペーストがヘッド部に
入りにくい設計



より小さく、よりスマートに 治療エリアの視界が広がるヘッド

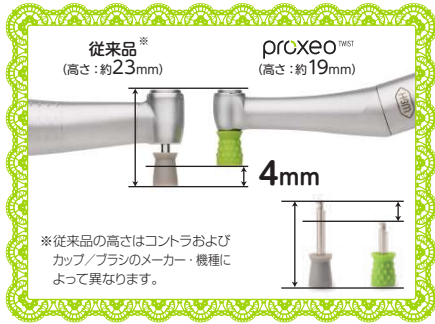

Slimmer. Finer. Innovative. 革新的なスリムさ、細さ

従来に比べてヘッドサイズが4mm 低く設計されているため、狭い領域や臼歯へのアクセスが容易になります。カップが短くネックはスリムなほど、治療エリアがよく見えます。

Perfect sealing 隙間が生じないから衛生的

プロキシオプロフィーカップやブラシはシャフトが短く、ヘッドとカップの間に隙間が生じないため研磨材が入り込むことを抑えることができます。



Hygiene & easy to clean お手入れが簡単

滑らかな表面設計なのでお手入れが簡単。洗浄消毒器での洗浄・消毒および滅菌が可能。

Slim and flexible スリムで疲れにくい

人間工学に基づいたデザインと、スリムネックで手にフィット。

予防歯科のプロフェッショナルによって設計されたカップ構造

プロキシオプロフィーコントラアングルに加えて、W&Hはプロフィーカップとブラシを販売しています。プロフィーユーザーの協力によりプロフィーカップとブラシはデザインされました。最適な適応、簡単なペーストの取り込み、塗布、歯肉溝のクリーニングといった特長が重んじられています。(プロフィーカップとブラシはディスプレイ製品であり、再利用を目的としたものではありません。)

Smooth surface at the end of the Cup
なめらかなカップ表面で歯頸部をやさしく磨けます。

Special internal fins
研磨材の取り込みと術部への塗布が簡単

Special nub shape
こぶ状の表面で研磨材をホールドし、効率よくクリーニング。

Nubs on the outside
外側のこぶで歯間隙を同時に磨きます。

レギュラー ソフト ブラシ

仕様

Type	WP-66 W	CE	RoHS	REACH
回転数 (モーター)	10,000 rpm			
ギア比	4:1			
カップ・ブラシの推奨回転数	1,250 - 2,500 rpm			
使用できるカップ・ブラシ	W&H Proxeo Twist LatchShortプロフィーカップとプロフィーブラシ			

プロフィーカップ・ブラシ (各12個入) Not for reuse **LATEX** Latex-free

医療機器認証番号: 302ALBZX00005000 管理医療機器 特定保守管理医療機器
医療機器届出番号: 27B1X00020301002/27B1X00020301001 一般医療機器



W&H社
(オーストリア)

白水貿易株式会社

〒064-0824 札幌市中央区北4条西20丁目2番1号 Nord 420BLD1F ☎(011)616-5814
 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クロス212F ☎(03)5217-4618
 〒464-0075 名古屋市千種区内山3-10-17 今池セントラルビル2F ☎(052)733-1877
 〒532-0033 大阪市淀川区新高1丁目1番15号 ☎(06)6396-4400
 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-30八重洲博多ビル5F ☎(092)432-4618
<https://www.hakusui-trading.co.jp/>

2020.06.P.2,000 E12 Ver1.1.1