

LMエクスプローラー

医療機器届出番号 27B1X00020220001 一般医療機器

- 歯石、齲蝕の診断や歯周ポケット、修復物、根分岐部の診査に使用します。
- 診査・診断の際、有効的に活用できる種類が揃っています。



LMエクスカベーター


医療機器届出番号 27B1X00020221035 一般医療機器



LMミラーハンドル

ネジ山は国際水準のM2.5に準拠

医療機器届出番号 27B1X00020221036 一般医療機器

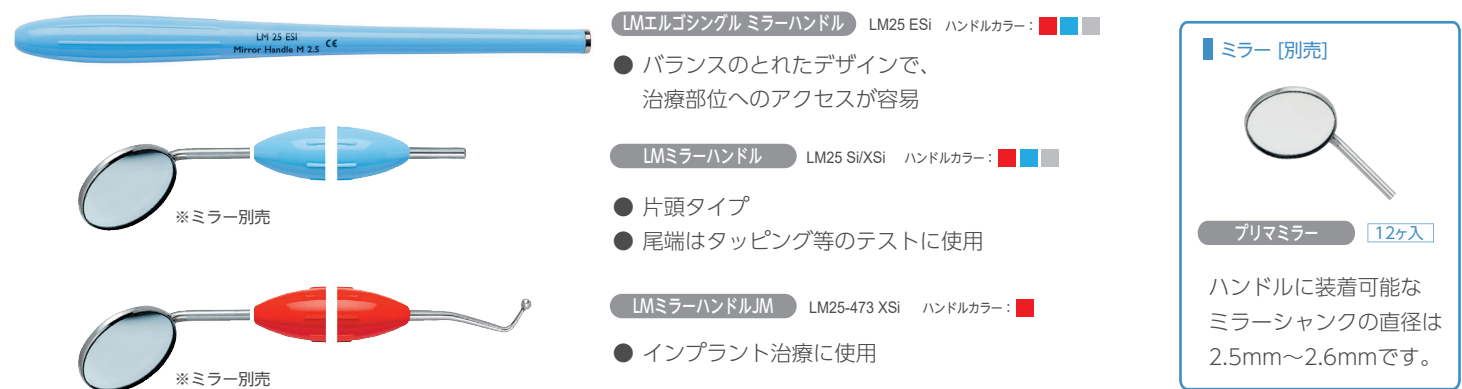


LMロンドプラス シャープナー シルバー

スケーラーもエキスカも！
簡単・時短シャープニング！

インスツルメントの電動シャープナー



- ブレードの原型を維持しながらシャープニングすることができます。
- 使用する方の利き手の違いなど、各個人にあった方法でシャープニングできます。
- スケーラーだけでなく、エキスカ等の形成用インスツルメントも研げます。
- インスツルメントをしっかりと固定できてブレません。
- スケーラー類は78°、エキスカは60°で誰でも正確に研げます。

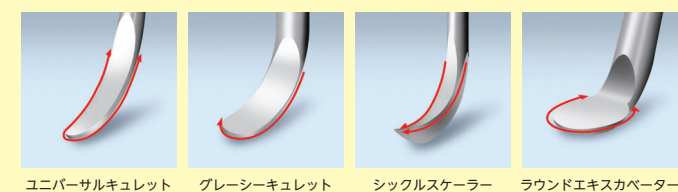

シャープニングのテストスティック
LMフィンゴ (2ヶ入/6ヶ入)

LMフィンゴで切れ味をチェック。
十分にシャープニングできていれば
エッジが引かかります。
LMロンド本体に付けたままでも、
指にはめても使用できます。

詳細・動画はこちら
ご覧いただけます



白水貿易株式会社

〒064-0824 札幌市中央区北4条西20丁目2番1号 Nord 420BLD1F ☎(011)616-5814
〒336-0017 さいたま市南区南浦和3丁目34番2号 ☎(048)884-3951
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クロス12F ☎(03)5217-4618
〒464-0075 名古屋市千種区内山3-10-17 今池セントラルビル2F ☎(052)733-1877
〒532-0033 大阪市淀川区新高1丁目1番15号 ☎(06)6396-4400
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-30 八重洲博多ビル5F ☎(092)432-4618
https://www.hakusui-trading.co.jp/

2020.10.P4,000 B15 Ver.2.3.1

LM
feel the difference

HAKUSUI


PERIODONTICS

LMインスツルメント



LMシックルスケーラー

- 主に歯肉縁上歯石の除去に使用します。
- フェイスが第1シャングに対して直角で両刃タイプです。
- ブレードは細いものから太いものまで揃っています。

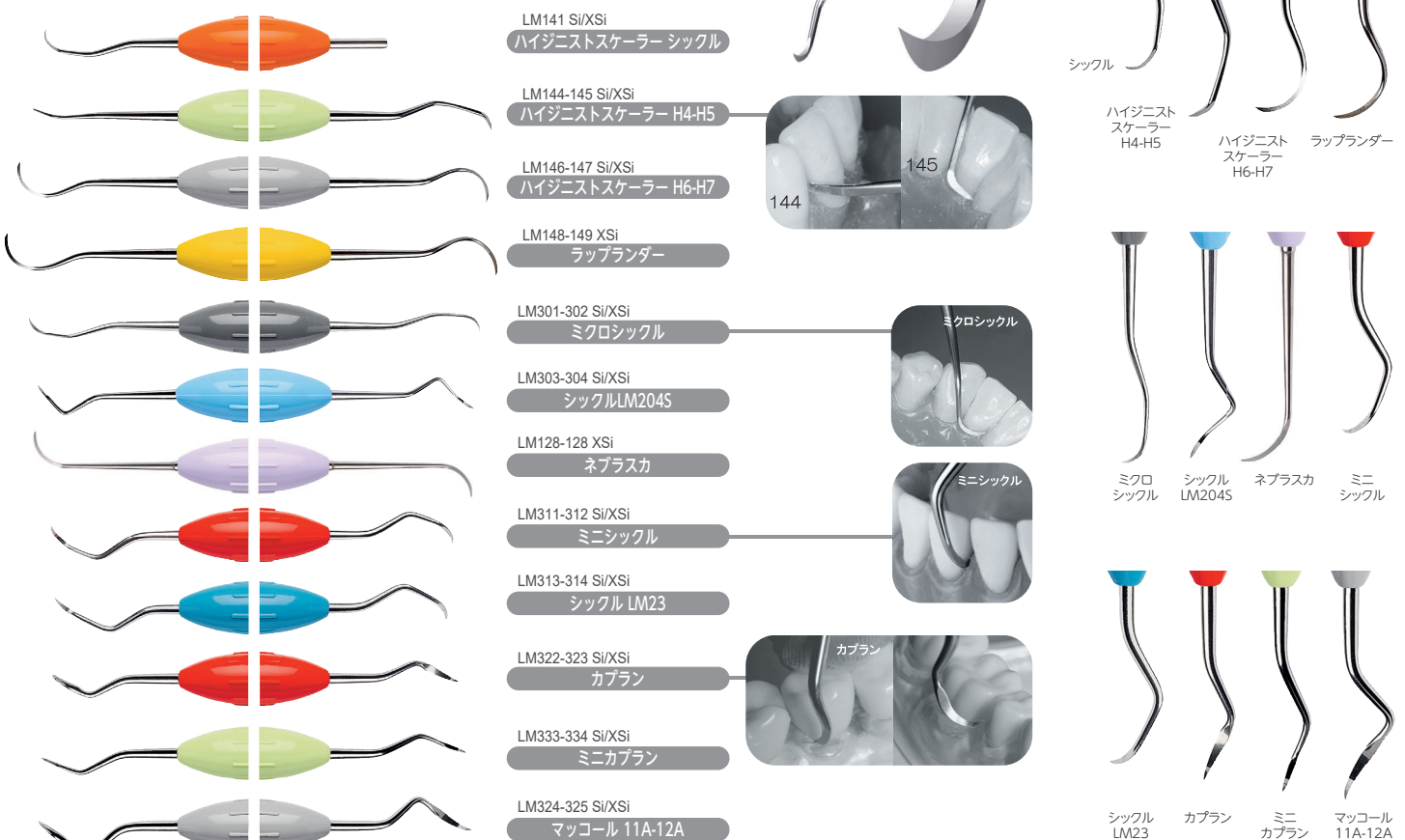


LMグレイシーキュレット

医療機器届出番号 27B1X00020221062 一般医療機器


◇ 歯肉縁下深部の歯石除去 ◇ 歯肉縁下、歯根面の仕上げ

- 刃のフェイスは第1シャンクに対して約20°の傾斜がついています。
- 片刃でカーブがついています。(下がっている方が刃)
- シャンクが種々に屈曲しているためどんな歯根面にも到達できます。
- 刃のデザインとシャンクの角度が適切なため、歯根面の触感が敏感に伝わります。

	グレーシー キュレット	グレーシー リジッドキュレット	グレーシー ミニキュレット	グレーシー マクロキュレット AFスタンダード
LM201-202 Si/XSi 1/2				
LM203-204 Si/XSi 3/4				
LM266-267 Si/XSi P3/P4				
LM205-206 Si/XSi 5/6				
LM207-208 Si/XSi 7/8				
LM209-210 Si/XSi 9/10				
LM211-212 Si/XSi 11/12				
LM213-214 Si/XSi 13/14				
LM245-246 Si/XSi 15/16				
LM247-248 Si/XSi 17/18				

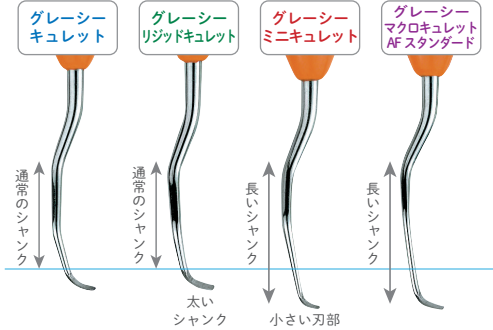

- リジッド** 通常のタイプよりもシャンクが太く、頑強で、刃部は幅広い。
- ミニ** 通常のタイプよりも第1シャンクが3mm長く、刃部が小さい。
- マクロAFスタンダード** 通常のタイプよりも第1シャンクが3mm長く、刃部が少し幅広い。

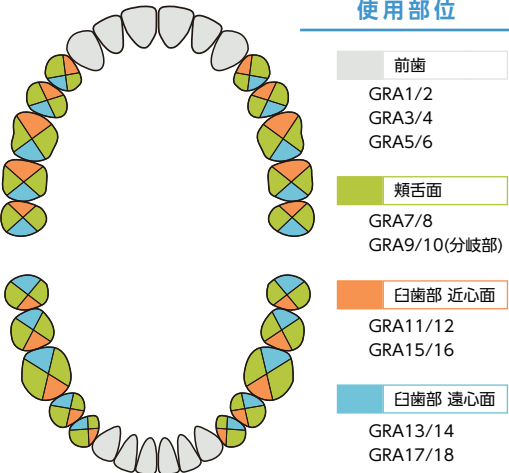

使用部位

- 前歯
GRA1/2
GRA3/4
GRA5/6
- 頬舌面
GRA7/8
GRA9/10(分岐部)
- 臼歯部 近心面
GRA11/12
GRA15/16
- 臼歯部 遠心面
GRA13/14
GRA17/18



15/16, 17/18はシャンクの角度が大きいため、臼歯部でハンドルが対合歯に邪魔されることなく、患者が十分に口を開けない状態でも使用することができます。


LMシンテットキュレット/ファーケーションインスツルメント

医療機器届出番号 27B1X00020221061 一般医療機器

● LMシンテット シンテットは、グレーシーのシャンクより太くなっているため、SRPIに適しています。

★ LM独自のキュレット ★

グレーシーキュレットの11と14、12と13を
両刃で合わせたユニバーサルキュレット。
この形状のインスツルメントは LM だけ！

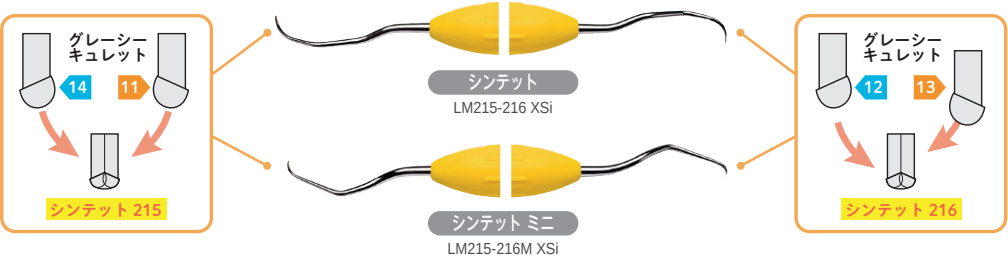

- 近心・遠心に対応しています。
- シンテットミニはスタンダードよりシャンクが長く、ブレードが短くなっているため、深くタイトな歯周ポケットに適しています。
- 垂直方向にも水平方向にも使用できます。

◇ 歯石除去および歯根面の仕上げ
◇ 凹凸のある歯面
◇ 歯間部の遠心面と近心面
◇ 歯肉縁下の処置に最適

● LMファーケーター




◇ 根分岐部の天蓋や内面の清掃、特に窪みや溝の清掃に使用

LMユニバーサルキュレット

医療機器届出番号 27B1X00020221061 一般医療機器

◇ 歯肉縁上歯石および歯肉縁下歯石の除去

- 刃は第1シャンクに対し直角です。
- 刃先は丸く処理してあるので軟組織を傷つけません。
- ブレードは細いものから太いものまで揃っています。

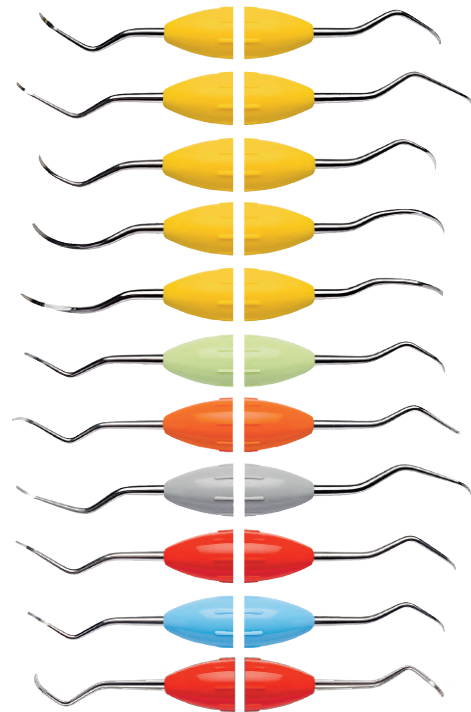


LM222-223 Si/XSi マッコール 13S-14S	マッコール 13S-14S
LM222-223M Si/XSi ミニマッコール 13S-14S	ミニマッコール 13S-14S
LM225-226 Si/XSi 15-16	15-16
LM277-278 Si/XSi マッコール 17-18	
LM279-280 Si/XSi マッコール 17S-18S	
LM233-234 Si/XSi ゴールドマンフォックス 3	
LM235-236 Si/XSi ゴールドマンフォックス 4	ゴールドマンフォックス 4
LM217-218 Si/XSi コロンビア 2L-2R	
LM219-220 Si/XSi コロンビア 4L-4R	
LM237-238 Si/XSi コロンビア 13-14	
LM227-228 XSi バーンハルト 5-6	


LMペリオプローブ 探針/プローブ

医療機器届出番号 27B1X00020221009 一般医療機器


● LMEキスプローラー & LMペリオプローブ

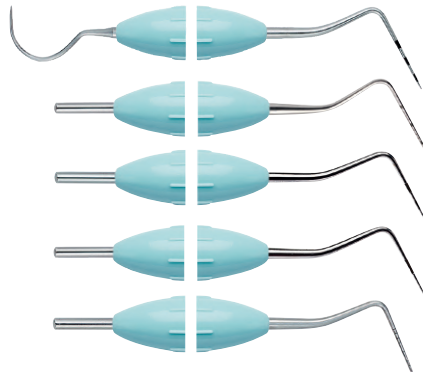


LM23-52B Si/XSi 23 - 52B	2mm scale
LM54B XSi ノースカロライナ 54B	1mm scale
LM52B Si/XSi 52B	2mm scale
LM8-520B XSi マーキス12 53B	3mm scale
LM51 Si/XSi 51	Williams probe

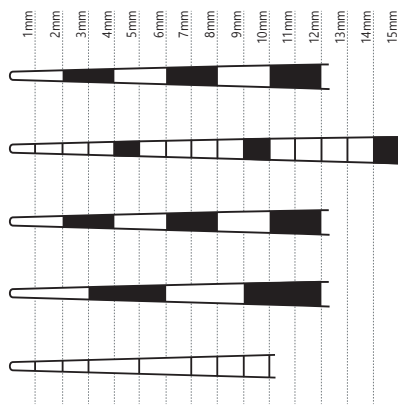

● WHOプローブ

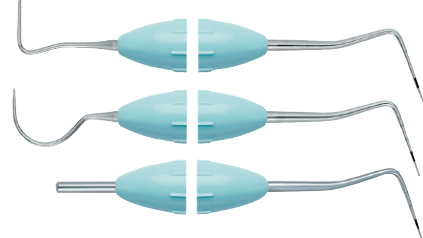

● LMファーケーションプローブ

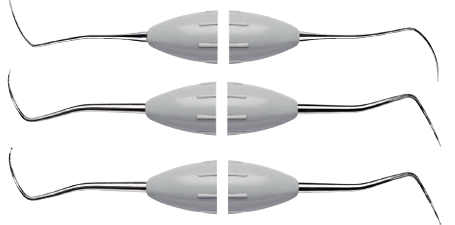

LM20-21 Si/XSi ネイバースプローブ	
LM20-21 Si ファーケーションプローブ ボール無	
LM20B-21B Si/XSi ファーケーションプローブ	

- 根分岐部の幅と深さを測定するために使用します。
- 先端が球状なので擦触時の感度が良好です。



WHOプローブはCPITN法のために開発されました。

CPITN法

診断	0 = 健康 1 = 探査中に出血する 2 = 歯肉縁上窩洞、歯肉縁下窩洞、充填材余剰およびクラウン余剰 3 = 歯周ポケットが5mmまで 4 = 歯周ポケットが6mmより深い
評価	1 = 口腔内衛生指導 2+3 = 口腔内衛生指導、歯石除去および余剰物除去 4 = 上記の処置に加え、さらに進んだ歯周治療が必要