



LatchShort Polishing System

# proxeo<sup>TM</sup> TWIST

## プロキシオ

プロフィーコントラアングル WP-66W

「4mm」も差をつける。



“高さ”の革命 狭い領域や臼歯に届く

従来品  
(高さ:約23mm)

※従来品の高さはコントラおよび  
カップ/ブラシのメーカー・機種に  
よって異なります。

proxeo<sup>TM</sup> TWIST  
(高さ:約19mm)




## 臼歯部もラクラク

研磨ペーストがヘッド部に  
入りにくい設計



# より小さく、よりスマートに 治療エリアの視界が広がるヘッド

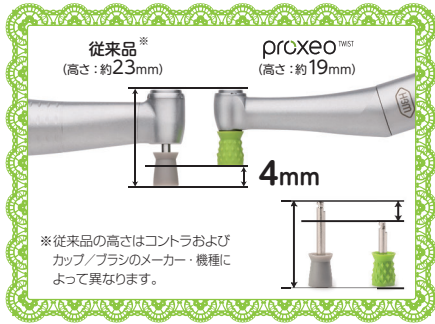

## Slimmer. Finer. Innovative. 革新的なスリムさ、細さ

従来に比べてヘッドサイズが4mm 低く設計されているため、狭い領域や臼歯へのアクセスが容易になります。カップが短くネックはスリムなほど、施術エリアがよく見えます。

## Perfect sealing 隙間が生じないから衛生的

プロキシオプロフィーカップやブラシはシャフトが短く、ヘッドとカップの間に隙間が生じないため研磨ペーストが入り込むことを抑えることができます。



## Hygiene & easy to clean お手入れが簡単

滑らかな表面設計なのでお手入れが簡単。洗浄消毒器での洗浄・消毒および滅菌が可能。

## Slim and flexible スリムで疲れにくい

人間工学に基づいたデザインと、スリムネックで手にフィット。

## 予防歯科のプロフェッショナルによって設計されたカップ構造

プロキシオプロフィーコントラアングルに加えて、W&Hはプロフィーカップとブラシを販売しています。プロフィーユーザーの協力によりプロフィーカップとブラシはデザインされました。最適な適応、簡単なペーストの取り込み、塗布、歯肉縁上・縁下ポケット3mm以内のプラーク除去や歯面清掃などといった特長が重んじられています。

(プロフィーカップとブラシはディスプレイ製品であり、再利用を目的としたものではありません。)

**S** **Smooth surface at the end of the Cup**  
なめらかなカップ表面で歯頸部をやさしく磨けます。

**S** **Special internal fins**  
研磨ペーストの取り込みと、術部への塗布が簡単

**S** **Special nub shape**  
こぶ状の表面で研磨材ペーストをホールドし、効率よくクリーニング。

**N** **Nubs on the outside**  
外側のこぶで歯間隙を同時に磨きます。

レギュラー      ソフト      ブラシ

### ■仕様

Type	WP-66 W	CE	RoHS	REACH
回転数 (モーター)	10,000 rpm			
ギア比	4:1			
カップ・ブラシの推奨回転数	1,250 - 2,500 rpm			
使用できるカップ・ブラシ	W&H Proxeo Twist LatchShortプロフィーカップとプロフィーブラシ			

プロフィーカップ・ブラシ Not for reuse Latex-free (各12個入)

医療機器認証番号: 302ALBZX00005000 管理医療機器 特定保守管理医療機器  
医療機器届出番号: 27B1X00020301002/27B1X00020301001 一般医療機器



W&H社  
(オーストリア)

## 白水貿易株式会社

〒064-0824 札幌市中央区北4条西20丁目2番1号 Nord 420BLD1F ☎(011)616-5814  
〒336-0017 さいたま市南区南浦和3丁目34番2号 ☎(048)884-3951  
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クrost12F ☎(03)5217-4618  
〒464-0075 名古屋市千種区内山3-10-17 今池セントラルビル2F ☎(052)733-1877  
〒532-0033 大阪市淀川区新高1丁目1番15号 ☎(06)6396-4400  
〒812-0013 福岡市博多区博多駅前2-18-30 八重洲博多ビル5F ☎(092)432-4618  
<https://www.hakusui-trading.co.jp/>

2020.10.P.3,000 E12 Ver1.1.2