

LMインスツルメントの特徴




Siハンドルは比較的力量を必要としない処置に適しています。SiとXSiハンドルを使い分けることで手指への負担を軽減できます。インスツルメント名とコード番号はハンドルに印記されています。オーダー時にはハンドルのタイプをご指定ください。
Siハンドル= 8.5mm
XSiハンドル= 11.5mm

- 手にしっくりとなじむシリコンゴム
— 快適で滑りません
- 鮮明な色と見やすい表示
— 容易な判別
- 特殊合金製メタルコア
— 軽い構造
- 滑らかな研磨面
— 顕著な耐腐蝕性
- しっかりとした取り付け部
— 酷使しても安全
- 熟練によるハンド仕上げ
— 鋭いカッティングエッジ
- 最適な硬度
— 素晴らしい感触と効率
- 刃先には高品質なDura Gradeスチールを採用
— 抜群の耐消耗性

定番 LM グレーシーキュレット

定番	コード	グレーシーキュレット	グレーシーリジッドキュレット	グレーシーミニキュレット	グレーシーマクロキュレットAFスタンダード
1/2	LM201-202 Si/XSi	●	●	●	●
3/4	LM203-204 Si/XSi	●	●	●	●
P3/P4	LM266-267 Si/XSi	●	●	●	●
5/6	LM205-206 Si/XSi	●	●	●	●
7/8	LM207-208 Si/XSi	●	●	●	●
9/10	LM209-210 Si/XSi	●	●	●	●
11/12	LM211-212 Si/XSi	●	●	●	●
13/14	LM213-214 Si/XSi	●	●	●	●
15/16	LM245-246 Si/XSi	●	●	●	●
17/18	LM247-248 Si/XSi	●	●	●	●

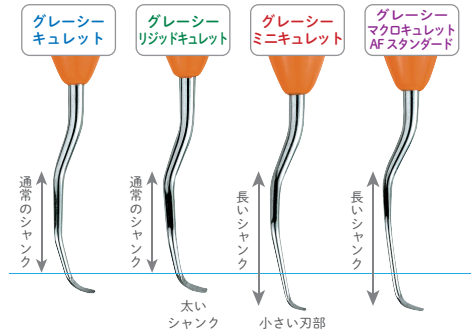

- リジッド**
通常のタイプよりもシャンクが太く頑強で、刃部は少し幅広い。
- ミニ**
通常のタイプよりも第一シャンクが3mm長く、刃部が小さい。
- マクロAFスタンダード**
通常のタイプよりも第一シャンクが3mm長く、刃部が少し幅広い。



15/16, 17/18はシャンクの角度が大きいため臼歯部でハンドルが対合歯に邪魔されることがなく、患者が十分に口を開けない状態でも使用することができます。

LM シックルスクレーパー

●刃部が非常にコンパクトでタイトな歯間空隙に使用

●LMミニシックルよりもブレードが短く、第一シャンクが長い

●全歯面、特に隣接面に使用

●H6-H7よりシャンクの傾斜角度が強く、臼歯部や隣接面にアクセスしやすいシックルスクレーパー

●XSiハンドルのみ

マイクロシックル LM301-302 Si/XSi
ミニシックル LM311-312 Si/XSi
シックルLM23 LM313-314 Si/XSi

スクレーパーH6-H7 LM146-147 Si/XSi
LMラップランダー LM148-149 XSi

LM オリジナル LM シンテット

●グレーシーキュレットの11と14、12と13を両刃で合わせたLMオリジナルのユニバーサルキュレットで、近心・遠心に対応

シンテット 215 LM215-216 XSi
シンテット ミニ LM215-216M XSi

LM ユニバーサルキュレット


- マッコール13S-14S LM222-223 Si/XSi
- ミニマッコール13S-14S LM222-223M Si/XSi
- コロンビア2L-2R LM217-218 Si/XSi
- コロンビア4L-4R LM219-220 Si/XSi
- コロンビア13-14 LM237-238 Si/XSi



- 強いブレードとリンジッドシャンク
●主に前歯と小臼歯に使用
- より細く丸みを帯びた刃先(シッフル型ではない)
●深く狭窄な歯周ポケットに最適

LM エキスカベーター

- スプーン LM522-523 Si/XSi/1.0mm LM522-523 Si/XSi/1.5mm
- ダブルアングル LM61-62 Si/XSi/1.0mm LM65-66 Si/XSi/2.0mm
- トリプルアングル LM611-621 Si/XSi/1.0mm LM631-641 Si/XSi/1.5mm
LM651-661 Si/XSi/2.0mm LM671-681 Si/XSi/3.5mm

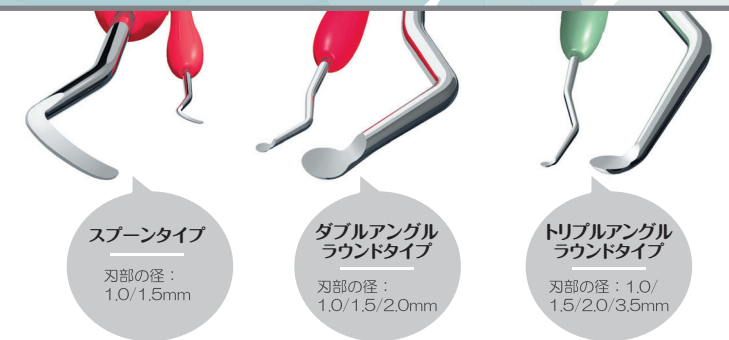

- ダブルアングルはラウンド状の刃先を持ち、ブレードシャンクは2方向に曲がっています。
- トリプルアングルはブレードシャンクが3方向に曲がっており、バックアクションが容易に行えます。

LM ノースカロライナプローブ

LM54B XSi

●1mm刻みの目盛り付き片頭プローブ
●XSiハンドルのみ

15mm
10mm
5mm
目盛: 1mm毎

LM ペリオプローブ

LM23-52B Si/XSi

●齶蝕用の探針と歯周用の探針を組み合わせたプローブ
●ハンドルはSiとXSiの2種類

目盛: 2mm毎

LM フレックスプローラー

●歯石、齶蝕の診断や歯周ポケット、修復物、根分岐部の診査に使用
●XSiハンドルのみ

LM11F-12F XSi

LM ミラーハンドル

●色: レッド、ブルー
●ハンドルはSiとXSiの2種類


●色: レッド、ブルー
●ネジ山は国際水準のM2.5に準拠

●ミラー別売

ミラーハンドル LM25 Si/XSi
エルゴシングルミラーハンドル LM25 ESI

LM ロンドプラスシャープナー シルバー 商品コード: 00234020
標準価格: ¥160,000

動画公開中
見てわかる!
詳細・使用法はQRコードをCheck!

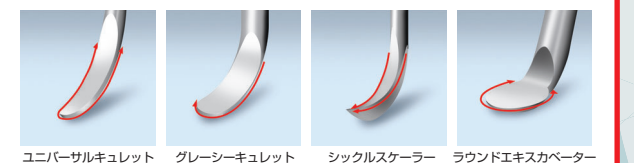

シャープニングのテストスティック
LMフィンゴ (2ヶ入/6ヶ入)

LMフィンゴで切れ味をチェック。十分にシャープニングできていればエッジが引っかかります。LMロンド本体に付けたままでも、指にはめても使用できます。



スクレーパーもエキスカも 簡単・速く・正確 に研げる!
LM Rondo Plus シャープナー シルバー

SPECIAL PRICE キャンペーン

SALE期間 2021.11.22~2022.1.20