


LMインスツルメントの特徴



Siハンドルは比較的力が必要としない処置に適しています。SiとXSiハンドルを使い分けることで手指への負担を軽減できます。インスツルメント名とコード番号はハンドルに印記されています。


オーダー時にはハンドルのタイプをご指定ください。
Si ハンドル= 8.5mm
XSiハンドル=11.5mm

●刃先には高品質なDura Gradeスチールを採用
― 抜群の耐磨耗性

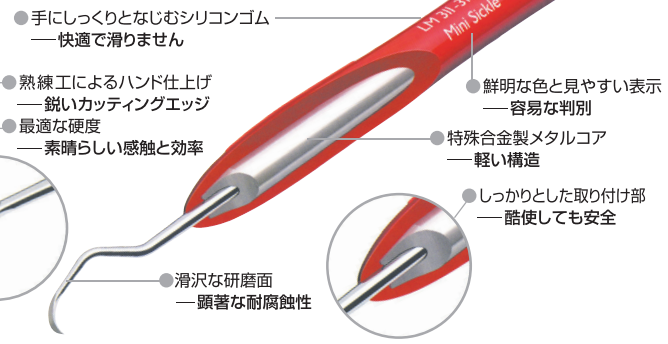

定番 LM グレーシーキュレット

1 / 2	LM201-202 Si/XSi	グレーシー キュレット	グレーシー リジッドキュレット	グレーシー ミニキュレット	グレーシー マクロキュレット AFスタンダード
3 / 4	LM203-204 Si/XSi				
P3/P4	LM266-267 Si/XSi				
5 / 6	LM205-206 Si/XSi				
7 / 8	LM207-208 Si/XSi				
9 / 10	LM209-210 Si/XSi				
11 / 12	LM211-212 Si/XSi				
13 / 14	LM213-214 Si/XSi				
15 / 16	LM245-246 Si/XSi				
17 / 18	LM247-248 Si/XSi				

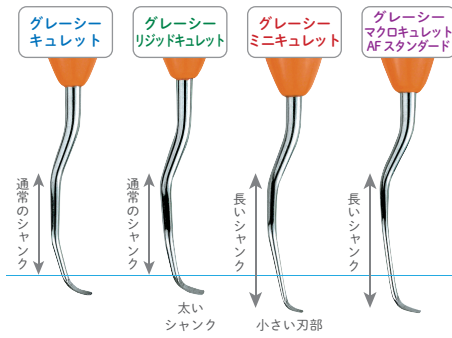

リジッド

通常のタイプよりもシャングが太く頑強で、刃部は少し幅広い。

ミニ

通常のタイプよりも第一シャングが3mm長く、刃部が小さい。


マクロAFスタンダード

通常のタイプよりも第一シャングが3mm長く、刃部が少し幅広い。



15/16、17/18はシャングの角度が大きいため臼歯部でハンドルが対合歯に邪魔されることなく、患者が十分に口を開けない状態でも使用することができます。

LM シックルスクレーパー

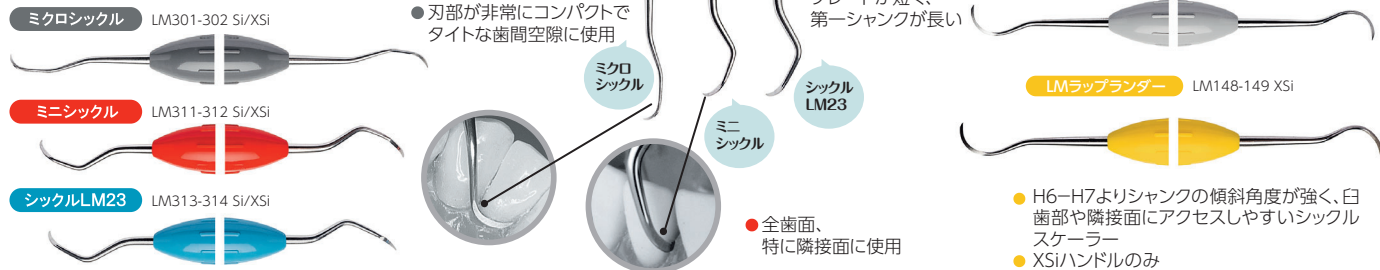

●刃部が非常にコンパクトでタイトな歯間空間に使用

●LMミニシッケルよりもブレードが短く、第一シャングが長い

●全歯面、特に隣接面に使用

●H6-H7よりシャングの傾斜角度が強く、臼歯部や隣接面にアクセスしやすいシッケルスクレーパー
●XSiハンドルのみ


LM オリジナル LM シンテット



グレーシーキュレットの11と14、12と13を両刃で合わせたLMオリジナルのユニバーサルキュレットで、近心・遠心に対応



LM ユニバーサルキュレット

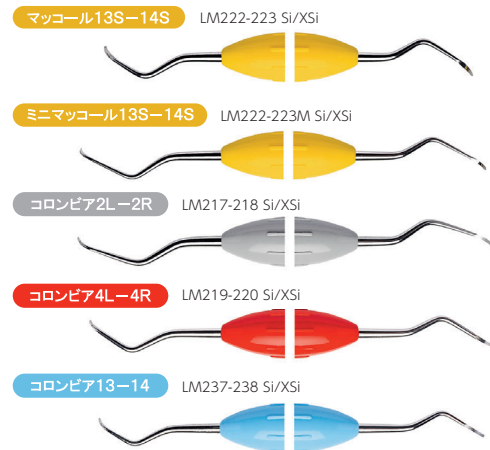

●強いブレードとリンジッドシャング
●主に前歯と小臼歯に使用

●より細く丸みを帯びた刃先(シッケル型ではない)
●深く狭窄な歯周ポケットに最適

LM エキスカベーター



●ダブルアングルはラウンド状の刃先を持ち、ブレードシャングは2方向に曲がっています。
●トリプルアングルはブレードシャングが3方向に曲がっており、バックアクションが容易に行えます。

LM ノースカロライナプローブ




●1mm刻みの目盛付き片頭プローブ
●XSiハンドルのみ

LM ペリオプローブ



●齶蝕用の探針と歯周用の探針を組み合わせたプローブ
●ハンドルはSiとXSiの2種類


LM ファーケーター

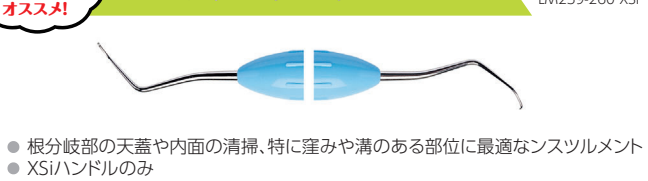

●根分岐部が苦手な方にオススメ!

●根分岐部の天蓋や内面の清掃、特に窪みや溝のある部位に最適なインスツルメント
●XSiハンドルのみ

LM ミラーハンドル

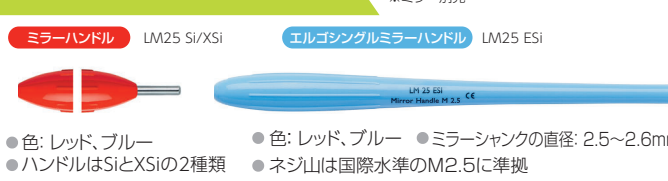

●色: レッド、ブルー
●ハンドルはSiとXSiの2種類
●ミラーシャングの直径: 2.5~2.6mm
●ネジ山は国際水準のM2.5に準拠

LM フレックスプローラー



●歯石、齶蝕の診断や歯周ポケット、修復物、根分岐部の診査に使用
●XSiハンドルのみ

インスツルメント電動シャープナー

スクレーパーもエキスカも 簡単・速く・正確 に研げる!
LM Rondo Plus シャープナー シルバー

おすすめ!



LM RONDOPラスシャープナー シルバー 商品コード: 00234020