

LM

feel the
difference

HAKUSUI

PERIODONTICS

LMインスツルメント

Colorful
Instruments持ちやすく
疲れにくい！症例に応じて Si ハンドルと XSi ハンドルを
使い分けることで、**手指への負担を軽減**
することができます。**カラーコード化**されていて、簡単に識別
できます。

ハンドルの種類

Si ハンドル

(Φ8.5mm)

XSi ハンドル


(Φ11.5mm)

シリコンコーティングで指にフィット

LMシックルスクレーラー

医療機器届出番号 27B1X00020221057 一般医療機器

- 主に歯肉縁上歯石の除去に使用します。
- フェイスが第1シャンクに対して直角で両刃タイプです。
- ブレードは細いものから太いものまで揃っています。

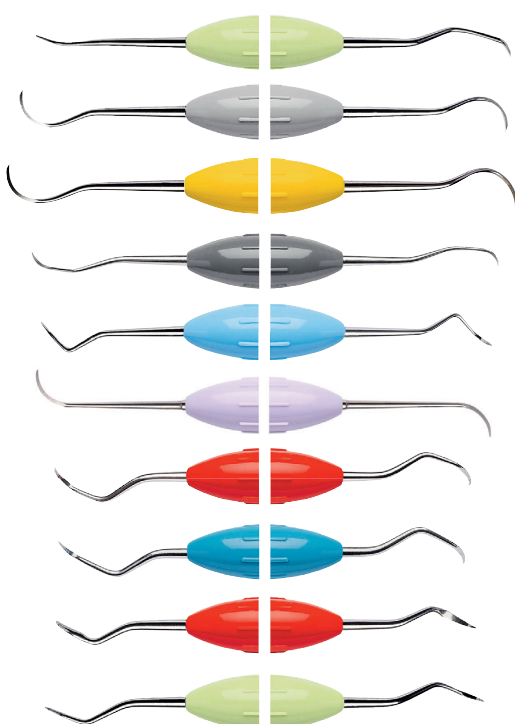

LM144-145 Si/XSi

■ ハイジニストスクレーラー H4-H5

LM146-147 Si/XSi

■ ハイジニストスクレーラー H6-H7

LM148-149 XSi

■ ラップランダー

LM301-302 Si/XSi

■ ミクロシッケル

LM303-304 Si/XSi

■ シッケル LM204S

LM128-128 XSi

■ ネブラスカ

LM311-312 Si/XSi

■ ミニシッケル

LM313-314 Si/XSi


■ シッケル LM23

LM322-323 Si/XSi

■ カプラン

LM333-334 Si/XSi


■ ミニカプラン

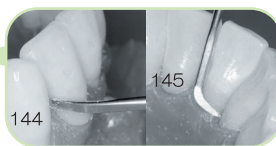

◇ 歯肉縁下深部の歯石除去 ◇ 歯肉縁下、歯根面の仕上げ



- 刃部の内面が第1シャンクに対して 約70° 傾いています。
- 片刃でフェイスが傾いている方に刃がついています。
- シャンクが種々に屈曲しているためどんな歯根面にも到達できます。
- 刃のデザインとシャンクの角度が適切なため、歯根面の触感が敏感に伝わります。

	グレーシー キュレット	グレーシー リジッドキュレット	グレーシー ミニキュレット	グレーシー マクロキュレット AFスタンダード
LM201-202 Si/XSi 1/2				
LM203-204 Si/XSi 3/4				
LM266-267 Si/XSi P3/P4				
LM205-206 Si/XSi 5/6				
LM207-208 Si/XSi 7/8				
LM209-210 Si/XSi 9/10				
LM211-212 Si/XSi 11/12				
LM213-214 Si/XSi 13/14				
LM245-246 Si/XSi 15/16				
LM247-248 Si/XSi 17/18				

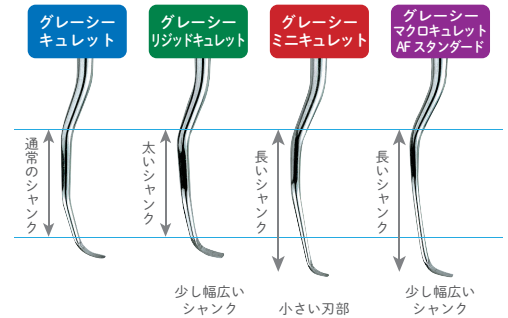

- リジッド** 通常のタイプよりもシャンクが太く、頑強で、刃部は少し幅広い。
- ミニ** 通常のタイプよりも第1シャンクが3mm長く、刃部が小さい。
- マクロAFスタンダード** 通常のタイプよりも第1シャンクが3mm長く、刃部が少し幅広い。

使用部位

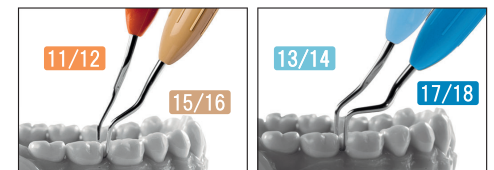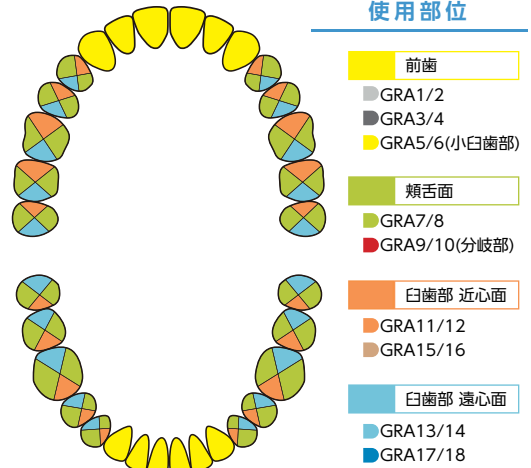

15/16, 17/18はシャンクの角度が大きいため、臼歯部でハンドルが対合歯に邪魔されることがなく、患者が十分に口を開けない状態でも使用することができます。

LMシンテットキュレット/ファークーションインスツルメント

医療機器届出番号 27B1X00020221061 一般医療機器

● LMシンテット




- 近心・遠心に対応しています。
- シンテットミニはスタンダードよりシャンクが長く、ブレードが短くなっているため、深くタイトな歯周ポケットに適しています。

LM独自のキュレット

グレーシーキュレットの11と14、12と13を両刃で合わせたユニバーサルキュレット。


この形状のインスツルメントは **LMだけ!**

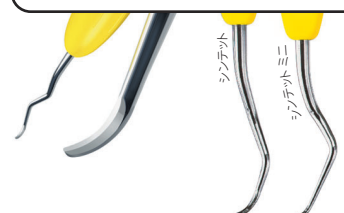

- ◇ 歯石除去および歯根面の仕上げ
- ◇ 凹凸のある歯面
- ◇ 歯間部の遠心面と近心面
- ◇ 歯肉縁下の処置に最適



● LMファークーター

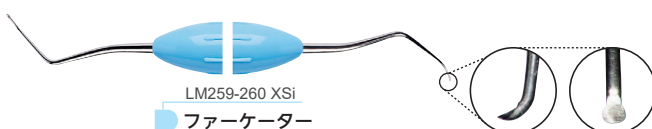


- ◇ 根分岐部の天蓋や内面の清掃、特に窪みや溝の清掃に使用




◇ 歯肉縁上歯石および歯肉縁下歯石の除去

- 刃は第1シャンクに対し直角です。
- 刃先は丸く処理してあるので軟組織を傷つけません。
- ブレードは細いものから太いものまで揃っています。

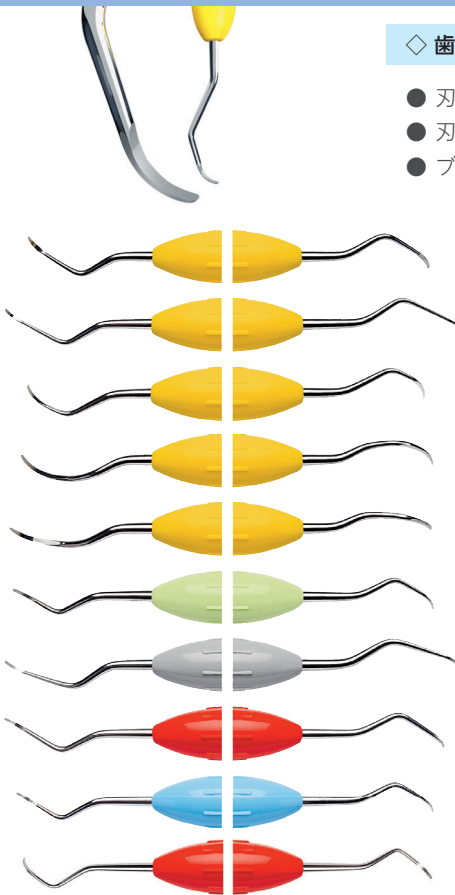

- LM222-223 Si/XSi
マッコール 13S-14S
- LM222-223M Si/XSi
ミニマッコール 13S-14S
- LM225-226 Si/XSi
15-16
- LM277-278 Si/XSi
マッコール 17-18
- LM279-280 Si/XSi
マッコール 17S-18S
- LM233-234 Si/XSi
ゴールドマンフォックス3
- LM217-218 Si/XSi
コロンビア 2L-2R
- LM219-220 Si/XSi
コロンビア 4L-4R
- LM237-238 Si/XSi
コロンビア 13-14
- LM227-228 XSi
バーンハルト 5-6

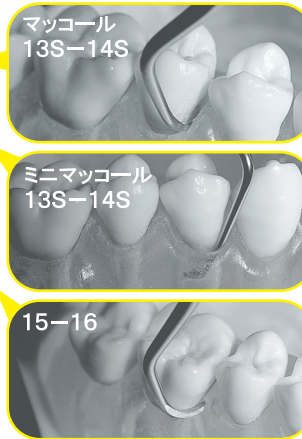

LM ServoMax 関連商品

LM セルボマックス



おすすめ

専用カセットで
衛生的に効率よく管理しよう!



LM インストルメントカセット 5 本用




LM インストルメントカセット 8 本用



製品カタログを
Check!


LMペリオプローブ 探針/プローブ

● LMEキスプローラー & LMペリオプローブ

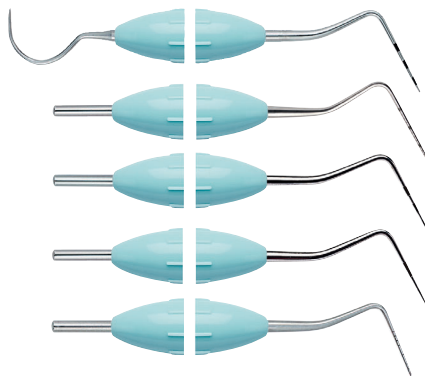


- LM23-52B Si/XSi
23 - 52B 2mm scale
- LM54B XSi
ノースカロライナ 54B 1mm scale
- LM52B Si/XSi
52B 2mm scale
- LM53B XSi
マーキス12 53B 3mm scale
- LM51 Si/XSi
51 Williams probe

● WHOプローブ

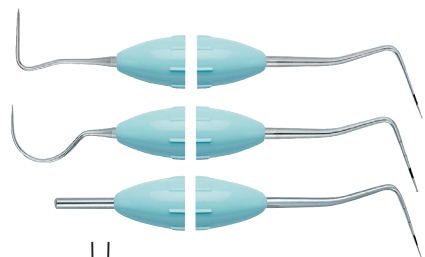

- LM8-550B Si/XSi
8 - 550B
- LM23-550B Si/XSi
23 - 550B
- LM550B Si/XSi
550B

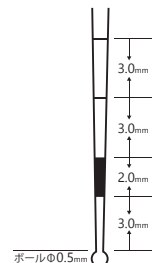


ペリオプローブWHOは
0.5-3-2-3-3です

● LMファークーションプローブ



- LM20-21 Si/XSi
ネイバースプローブ
- LM20B-21B Si/XSi
ファークーションプローブ
※3mm間隔の目盛りあり

- 根分歧部病変の範囲、根分歧根面の形態(水平的骨吸収)を診査します。
- ファークーションプローブは先端が球状なので擦触時の感覚が良好です。

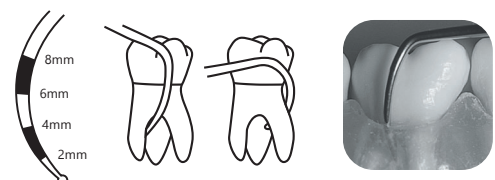

LMエクスプローラー


医療機器届出番号 27B1X00020220001 一般医療機器

- 歯石、齲蝕の診断や歯周ポケット、修復物、根分歧部の診査に使用します。
- 診査・診断の際、有効的に活用できる種類が揃っています。

一般診査器具用



LM3-6 Si/XSi
LMエクスプローラー

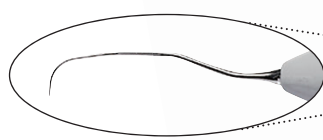

歯石の取り残りチェックや歯石の有無、
根面の形状診査に最適




LM11F-12F XSi

LMフレックスプローラー 11F-12F

LMエクスケーター

医療機器届出番号 27B1X00020221035 一般医療機器

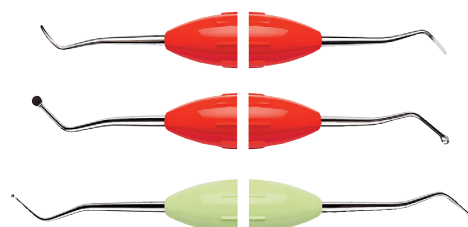

スプーンエキスカ

LM522-523 Si/XSi (1.0mm)
LM533-534 Si/XSi (1.5mm)

エキスカベーターラウンド

LM611-621 Si/XSi (1.0mm)
LM631-641 Si/XSi (1.5mm)
LM651-661 Si/XSi (2.0mm)

バックアクションエキスカ

LM611-621 Si/XSi (1.0mm)
LM631-641 Si/XSi (1.5mm)
LM651-661 Si/XSi (2.0mm)
LM671-681 Si/XSi (3.5mm)



スプーンエキスカ

スプーンタイプ
刃部の径：
1.0/1.5mm

エキスカベーターラウンド

ダブルアングルラウンドタイプ
刃部の径：
1.0/1.5/2.0mm

バックアクションエキスカ

トリプルアングルラウンドタイプ
刃部の径：
1.0/1.5/2.0/3.5mm

- 軟化したカリエスデンチンの除去等。

LMミラーハンドル

ネジ山は国際水準のM2.5に準拠

医療機器届出番号 27B1X00020221036 一般医療機器



LM25 ESI ハンドルカラー：■ ■ ■

LMエルゴシングル ミラーハンドル

- バランスのとれたデザインで、治療部位へのアクセスが容易

LM25 Si/XSi ハンドルカラー：■ ■ ■


LMミラーハンドル

- 片頭タイプ
- 尾端はタッピング等のテストに使用

LM25-473 XSi ハンドルカラー：■

LMミラーハンドルJM

- インプラント治療に使用

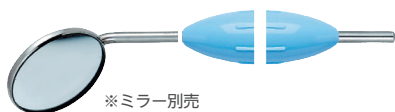

※ミラー別売



※ミラー別売

ミラー [別売]



プリマミラー [2ヶ入]

ハンドルに装着可能な
ミラーシャングの直径は
2.5mm~2.6mmです。

スケーラーもエキスカも/
簡単・時短シャープニング!

インスツルメントの電動シャープナー

LMロンドプラス シャープナー シルバー



動画公開中



詳細・動画はこちらから
ご覧いただけます



- ブレードの原型を維持しながらシャープニングすることができます。
- 使用する方の利き手の違いなど、各個人にあった方法でシャープニングできます。
- スケーラーだけでなく、エキスカ等の形成用インスツルメントも研げます。
- インスツルメントをしっかり固定できてブレません。
- スケーラー類は78°、エキスカは60°で誰でも正確に研げます。

シャープニングのテストスティック

LMフィンゴ (2ヶ入/6ヶ入)

LMフィンゴで切れ味をチェック。
十分にシャープニングできていれば
エッジが引かかります。
LMロンド本体に付けたままでも、
指にはめても使用できます。



Check!

関連商品

マグネットゲージ

刃部のフェイス(内面)に
マグネットを乗せるだけで
エッジの傾きが簡単に分かります。



かんたん!
便利!

LM

feel the
difference

LMインスツルメンツ社
(フィンランド)

HAKUSUI

札幌 札幌市中央区北4条西20-2-1 Nord 4208LD1階 (011)616-5814
関東北 さいたま市南区南浦和3-34-2 (048)884-3951
東京 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クロス12階 (03)5217-4618
名古屋 名古屋市千種区内山3-10-17 今池セントラルビル2階 (052)733-1877
本社 大阪府大阪市淀川区新高1-1-15 (06)6396-4400
広島 広島市南区西蟹屋3-2-1 日通ビル1階 (082)207-2870
福岡 福岡市博多区博多駅東2-18-30 八重洲博多ビル5階 (092)432-4618
白水貿易株式会社 <https://www.hakusui-trading.co.jp/> 2025.08.P2,000 B15 Ver.2.4.6