HAKUSUI

VITA AKZENT® LC

ビタ アクセントLC

── レジン用ステイン材



ビタ エナミック・レジン材で作られた

修復物の特徴付け
ステイン / グレーズシステム







ビタ エナミック
（ハイブリッド セラミックス）



- 自然な色調表現をサポート！
- 色落ち・変色しにくい！
- 安定した粘度で、快適な操作性！
- 3D プリントレジンの審美性を高める！

VITA – perfect match.

ビタ アクセントLC



ビタ アクセント LC はビタ エナミック・レジン材で作られた修復物の特徴付けをするためのステイン / グレーズシステムです。
多彩な色調表現と色調補正を可能にします。

- 色の再現性が容易
- 理想的な粘度で安定した材料
- 接着結合が高く、色落ちしにくい
- 変色しにくい
- 塗布時に出るブラシ線が入りにくい



レジンベース材の特徴付けに



人工歯



3D プリントレジン材



ビタ エナミック
(ハイブリッド セラミック)






デンチャーベース

光重合の波長域

350nm ～ 500nm



レジンブロック

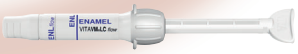

コンポジットレジン

シェードマッチング


作りたい色を簡単に再現！





天然歯に近似したシェード再現

多彩なシェードで広がる自然な色調表現

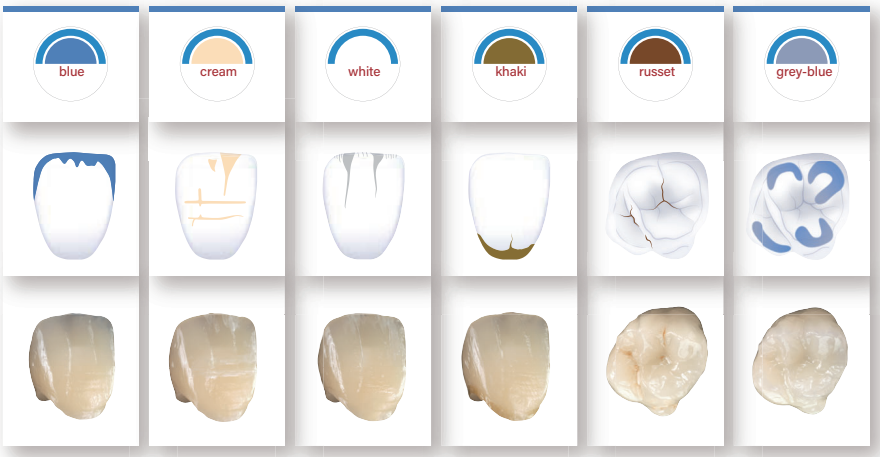

☑ 耐摩耗性のテスト

二酸化ケイ素フィラーで強化されたポリマーマトリックスにより、高い耐摩耗性と高い光沢が維持される。



歯ブラシで摩耗のシミュレートテスト
（20 時間＝毎日 2×3 分で 200 日間）



摩耗テスト後

Source: Internal study, VITA R&D, Report 0083/21, 07/21,
Dr. S. Aechtner ([1] see back of brochure)

☑ 接着テスト

PMMA 材での高い接着性が得られる。

ビタ アクセントLC



ビタパン (人工歯) にビタ アクセント LC を塗布
経時変化のシミュレーションテスト（5,000 サイクル、5℃/55℃）



接着テスト後

Source: Internal study, VITA R&D, Report 0628/19,
03/20,Dr. M. Gmehling ([1] see back of brochure)

優れた長期安定性！

☑ 安定性のテスト

ストレスフリーな操作性！

理想的な安定性と粘度をもった材料で細かな色付けがしやすい。

ビタ アクセントLC（ホワイト）



ガラス板に材料をのせる




ガラス板を斜めに傾けて安定性をテスト

Source: Internal study, VITA PM,Report 0819/20, 09/20,
H. Kimmich ([2]see back of brochure)

☑ 耐変色テスト

水・紅茶・コーヒーに 12 週間浸した後、高い耐変色結果を示した。

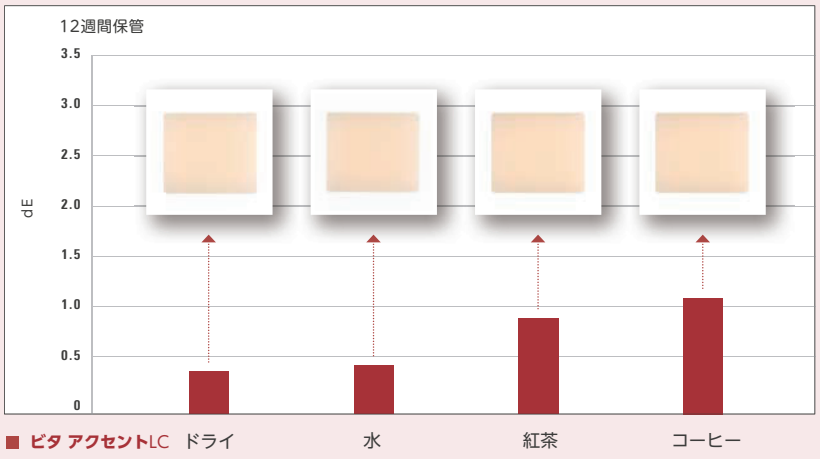

Source: Internal study, VITA R&D, Report 0559/19, 03/20,
Dr. M. Gmehling ([1] see back of brochure)



■ 商品ラインナップ / シェードテーブル

販売名：ビタ アクセント LC　一般名称：高分子系歯冠用着色材料　管理医療機器　認証番号：305AKBZX00030000

VITA AKZENT®ビタアクセントLC

■ エフェクトステイン

EFFECT STAINS



個々の特性 / 効果を正確に再現する

ホワイト　クリーム　レモン　サン　オレンジ　ダークレッド　ラシット
カーキ　ピンク　パープル　ブルー　グレーブルー　グレー　ブラック

■ クロマステイン

CHROMA STAINS



彩度を規則的に高くする

VITA classical A1–D4:

A レッドブラウン　B レッドサン　C グレーブラウン　D グレーレッド

VITA SYSTEM 3D-MASTER:

L コーンイエロー　M2 レッドイエロー　M3 ダークイエロー　R ライトレッド

■ グレーズ

GLAZE



長期に光沢を維持させる

グレーズ

■ その他 構成品

作業の効率を考えた構成品

・クリーナー 

・ミキシングトレー

・ブラシセット 

■ ビタ アクセント LC スタンダードキット

・エフェクトステイン（ホワイト、オレンジ、ラシット、カーキ、ブルー、グレーブルー）
・グレーズ　・LCクリーナー　・ブラシ2本　・マイクロブラシ（25コ）　・ミキシングトレー



■ 関連商品

デジタルシェード自動測定器

ビタ イージーシェード V




歯冠用硬質レジン

ビタ VMLC フロー

販売名：ビタ ＶＭＬＣ　一般名称：歯冠用硬質レジン　管理医療機器　認証番号：223AKBZX00074000



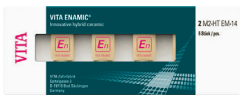

ブロック

ビタ エナミック

販売名：ビタ エナミック　一般名称：歯科切削加工用レジン材
管理医療機器　認証番号：225AKBZX0009900



ブロック

ビタ キャドレジン（キャドテンプ）モノカラー

販売名：ビタ キャドレジン　一般名称：歯科切削加工用レジン材料
管理医療機器　認証番号：222AKBZX00136000



ブロック

ビタ キャドレジン（キャドテンプ）マルチカラー





色調　5色　クラシカル: A1, A2, A3,A3.5
ブリーチ色: OM3

形態　上顎17形態　下顎5形態

硬質レジン歯

ビタパン エクセル 上顎／下顎

販売名：ビタパン エクセル　一般名称：硬質レジン歯
管理医療機器　認証番号：230AKBZX00002000





色調　5色　クラシカル: A1, A2, A3,A3.5
ブリーチ色: OM3

形態　上顎4形態　下顎4形態

硬質レジン歯

ビタ リンゴフォーム 上顎／下顎

販売名：ビタ リンゴフォーム　一般名称：硬質レジン歯
管理医療機器　認証番号：222AKBZX00049000

VITA
ビタ社（ドイツ）

製造販売業者名：

HAKUSUI

札　幌｜札幌市中央区北4条西20-2-1 Nord 420BLD1階　(011)616-5814
関東北｜さいたま市南区南浦和3-34-2　(048)884-3951
東　京｜東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クロスタ12階　(03)5217-4618
名古屋｜名古屋市千種区内山3-10-17 今池セントラルビル2階　(052)733-1877
本　社｜大阪府大阪市淀川区新高1-1-15　(06)6396-4400
広　島｜広島市南区西蟹屋3-2-1 日通ビル1階　(082)207-2870
福　岡｜福岡市博多区博多駅東2-18-30 八重洲博多ビル5階　(092)432-4618
白水貿易株式会社 https://www.hakusui-trading.co.jp/

2026.11.P2,000 D16 Ver.1.2.1