

SPECIAL THANKS SALE!!

2024年
3月21日~
6月20日まで
今がチャンス!

小型高圧蒸気滅菌器

クラスBオートクレーブ リサ22(Eli)にマルチデム C27を
セットにして **特別価格** にてご提供いたします。

脱塩水生成装置



PLUS



小型高圧蒸気滅菌器

クラスBオートクレーブ リサ22(Eli)

標準価格：¥1,300,000

脱塩水生成装置

マルチデム C27

標準価格：¥75,000

Special
Price!!

標準価格1,375,000円のところ

特別価格

にてご提供いたします!



滅菌 はクラスBオートクレーブ リサ22(Eli)で




大容量チャンバー

『クラスBオートクレーブ リサ22(Eli)』のチャンバーは22ℓの大容量。従来機種(17ℓ)と比較し約30%の容量アップに成功しました。

しかも、その滅菌時間は約28分*。大容量と機能性のアップにより、より効率的、効果的な滅菌が可能になりました。

ヨーロッパ規格 **EN1360 適合**

*『Bユニバーサル134』モード、標準量(2kg)の滅菌量の場合

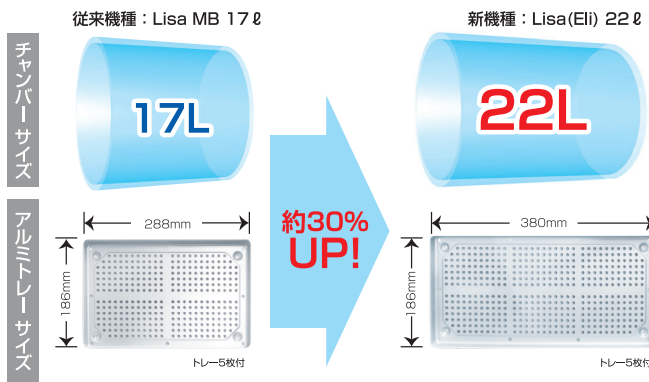

被滅菌物の量に応じた滅菌時間



eco dry+

被滅菌物の量に応じて乾燥時間を自動的に調整する事によって滅菌サイクル全体の時間を自動的に調整します。被滅菌物重量が約2kgの場合の**滅菌時間はわずか28分程度**。乾燥時間を自動的に調整する事によって被滅菌物が熱にさらされる時間が短くなるので、被滅菌物の寿命を延長します。


自動給水(オプション) 又は 手動給水



クラスBオートクレーブ リサ22(Eli)の給水は2通りの方法で行えます。容器を使用してタンクに給水する従来の方法に加えW&Hステライライゼーション純正自動給水システム「マルチデム C27」を使用した自動給水が可能です。「マルチデム C27」を使用すると給水タンクの水の残量が少なくなると自動的に給水されます。(外部電源不要)

お急ぎサイクル

「クラスBオートクレーブ リサ22(Eli)」は緊急時の滅菌に活躍する「お急ぎサイクル」を搭載。未包装のハンドピース等(2.0kgまで)を15分で滅菌することが可能です*。

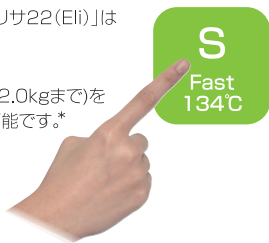

*お急ぎサイクル使用時はEN13060で定めるクラスBには適合しません。(パルス真空サイクルを含むクラスS相当の滅菌サイクルになります。)

Lisa スペックシート

販売名:クラスBオートクレーブ リサ 一般的名称:小型未包装品用高圧蒸気滅菌器 医療機器認証番号:228ALBZX00008000 管理医療機器 特定保守管理医療機器

滅菌サイクル	Bユニバーサル134	Bブリオン134	Bユニバーサル121	ファストサイクル
温度	134℃	134℃	121℃	134℃
滅菌係留時間	4分	18.5分	20.5分	3.5分
標準滅菌時間(滅菌量2kg)	21~45分 標準 28分	36~57分 標準 43分	35~67分	13~21分
最大滅菌量	6kg:圆形 9kg:DIN規格13999に適合した滅菌コンテナ/カセット使用時	2.0kg:多孔体		2.0kg(未包装)

※標準滅菌時間は、被滅菌物重量が約2kgの場合

定格電圧: AC200-240V/10A

(電源は単相200V、15A以上で準備してください。)

消費電力: 2000W

電源周波数: 50/60Hz

大きさ: W465 × H452 × D634mm

重さ: 47.5kg

水タンク容量: 4.8ℓ(給水タンク)、4.8ℓ(排水タンク)

チャンバー容量: 22ℓ

チャンバー内有効スペース: W195×H195×D400mm

洗浄・消毒 はミーレ ジェットウォッシャーで

Miele



余熱乾燥
エコドライ

ホットエア
乾燥
ドライプラス

器具除染用洗浄器

ミーレ ジェットウォッシャー

ISO15883/1、ISO15883/2 に適合

パワフル

大容量

高性能

ミーレ ジェットウォッシャーによる自動洗浄は優れた洗浄効果を得る事ができるだけでなく、洗浄効果を標準化する事ができます。さらに、洗浄する人が手指を傷つけるといったリスクを大きく軽減します。

製造販売届出番号 13B2X10362000017/13B2X10362000016 一般医療機器



W&Hステライライゼーション社(イタリア)

白水貿易株式会社

【札幌営業所】〒064-0824 札幌市中央区北4条西20-2-1 Nord 420BLD1階 TEL(011)616-5814
 【関東北営業所】〒336-0017 さいたま市南区南浦和3-3-4-2 TEL(048)884-3951
 【東京支店】〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クロス2階 TEL(03)5217-4618
 【名古屋営業所】〒464-0075 名古屋市中千種区内山3-10-17 今池セントラルビル2階 TEL(052)733-1877
 【大阪本社】〒532-0033 大阪府大阪市淀川区新高1-1-15 TEL(06)6396-4400
 【広島営業所】〒732-0804 広島市南区西館屋3-2-1 白通ビル1階 TEL(082)207-2870
 【福岡営業所】〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-30 八重洲博多ビル5階 TEL(092)432-4618
<https://www.hakusui-trading.co.jp/>
 2024.03.P10,000 K05