

サージカル
コントラアングル
&
ストレート
ハンドピース




	WS-56	WS-56LG	WS-56L	WS-75	WS-75LG	WS-75L	WS-91	WS-91LG	WS-91L
商品コード	00668200	00668201	00668222	00668202	00668203	00668223	00668204	00668205	00668224
ギア比	1 : 1	1 : 1	1 : 1	20 : 1	20 : 1	20 : 1	1 : 2.7	1 : 2.7	1 : 2.7
カラーコード	青	青	青	緑	緑	緑	オレンジ	オレンジ	オレンジ
モーターカプリング	ISO3964	ISO3964	ISO3964	ISO3964	ISO3964	ISO3964	ISO3964	ISO3964	ISO3964
バーの種類/直径	※	※	※	※	※	※	※2	※	※
ライト	—	ジェネレーターミニLED+	ミニLED+	—	ジェネレーターミニLED+	ミニLED+	—	ジェネレーターミニLED+	ミニLED+
使用可能なバーの最長の長さ	34mm	34mm	34mm	45mm	45mm	45mm	25mm	25mm	25mm
モーターの最大回転数	40,000rpm	40,000rpm	40,000rpm	40,000rpm	40,000rpm	50,000rpm	50,000rpm	40,000rpm	50,000rpm
スプレー穴数	1	1	1	1	1	1	3	3	3

バーの種類/直径 ※ : サージカルバー・カッター/2.35mm / ※2 : FGバー/1.6mm



	WS-92	WS-92LG	WS-92L	S-11	S-11LG	S-11L	S-15
商品コード	00668206	00668207	00668225	00668208	00668209	00668226	00668210
ギア比	1 : 2.7	1 : 2.7	1 : 2.7	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1
カラーコード	オレンジ	オレンジ	オレンジ	青	青	青	青
モーターカプリング	ISO3964	ISO3964	ISO3964	ISO3964	ISO3964	ISO3964	ISO3964
バーの種類/直径	※2	※2	※2	※	※	※	※
ライト	—	ジェネレーターミニLED+	ミニLED+	—	ジェネレーターミニLED+	ミニLED+	—
使用可能なバーの最長の長さ	25mm	25mm	25mm	45mm	45mm	45mm	45mm
モーターの最大回転数	50,000rpm	40,000rpm	50,000rpm	50,000rpm	40,000rpm	50,000rpm	30,000rpm
スプレー穴数	3	3	3	1	1	1	1

バーの種類/直径 ※ : サージカルバー・カッター/2.35mm / ※2 : FGバー/1.6mm

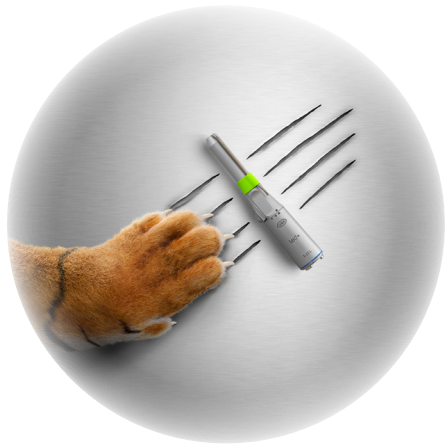

implantmed

インプラントモーター

インプラントメッド SI-1010



ワイヤレス フットコントローラー
(コード無し)

フットコントローラーは
コード有りがコード無しの
選択が可能です



フットコントローラー
(コード有り)



※ハンドピースは別売

管理医療機器 特定保守管理医療機器 医療機器認証番号 サージカルハンドピース AD 226ALBZX00018000
管理医療機器 特定保守管理医療機器 医療機器認証番号 インプラントメッド S I 1 0 1 0 230ALBZX00004000



_From Austria.



札幌 | 札幌市中央区北4条西20-2-1 Nord 420BLD1階 (011)616-5814
関東北 | さいたま市南区南浦和3-34-2 (048)884-3951
東京 | 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クロス12階 (03)5217-4618
名古屋 | 名古屋市千種区内山3-10-17 今池セントラルビル2階 (052)733-1877
本社 | 大阪府大阪市淀川区新高1-1-15 (06)6396-4400
広島 | 広島市南区西蟹屋3-2-1 日通ビル1階 (082)207-2870
福岡 | 福岡市博多区博多駅東2-18-30 八重洲博多ビル5階 (092)432-4618
白水貿易株式会社 <https://www.hakusui-trading.co.jp/> 2022.08.P1,000 E19 Ver3.2.1




Surgical contra-angle and straight handpiese

サージカルコントラアングル
&ストレートハンドピース



右利き、左利きの両方に対応

右利き、左利きの両方に対応した
スプレークリップがあります。ユーザーの利き
手に応じて選ぶ事ができます。

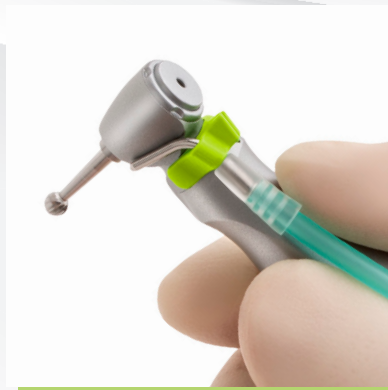

ミニLEDライト

LEDの大きさが従来のLEDの半分になりま
した。LEDがコントラアングルのヘッド近くに
取り付けられているので、術野をより明るく
照らす事ができます。



45°アングルヘッド

45°ヘッドのコントラアングルは
コントラアングルとストレートハンドピース
の利点を併せ持っています。術野の視認性
に優れ、知歯の抜歯・歯根分割および歯根
端切除などに適しています。



ヘキサゴン(6角形)チャックシステム

高トルク下でもバーの変形や咬み込みを防ぐ事が
できるヘキサゴンチャックシステム。
W&Hが開発し、特許を保有しています。



implantmed

インプラントモーター

インプラントメッド SI-1010

安定したインプラント埋入を実現する

インプラント用モーター



すぐれた清掃性


—工具が無くても分解清掃が可能—

コントラアングルは工具が無くても分解お
よび再組立を素早く簡単に行う事ができ
ます。コントラアングルのパーツを個別に
洗浄する事ができます。



衛生的で長寿命

本体表面はコーティングにより、
傷から守ります。これにより、洗浄
が簡単で衛生的に保つことができ
長く綺麗にご愛用いただけます。

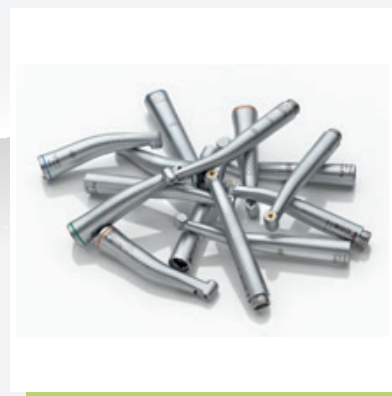

インプラントメッドにオススメ!

WS75-L

販売名:	インプラントメッド SI-1010
電源電圧:	AC100V
周波数:	50/60Hz
ヒューズ定格:	250V-T1.6AH
最大出力:	80W
モーターの最大トルク:	6.2Ncm
公称電圧範囲内のモーター回転数:	200-40,000rpm
最大注水量:	90mL/分以上
本体サイズ:	幅262 x 奥行291 x 高さ100mm
本体重量:	3.5kg