



HAKUSUI

LatchShort Polishing System

proxeo^{TWIST}

プロキシオ

プロフィーコントラアングル WP-66W

「4mm」の差をつける。



“高さ”の革命 狭い領域や臼歯に届く

従来品
(高さ: 約23mm)

※従来品の高さはコントラおよび
カップ/ブラシのメーカー・機種に
よって異なります。

proxeo^{TWIST}
(高さ: 約19mm)




臼歯部もラクラク

研磨ペーストがヘッド部に
入りにくい設計



より小さく、よりスマートに 治療エリアの視界が広がるヘッド

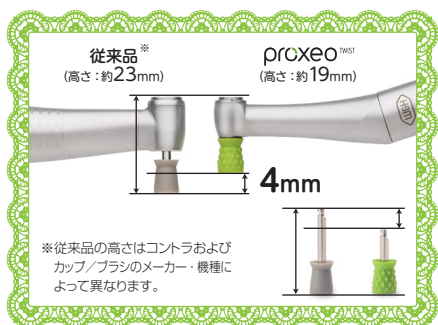

Slimmer. Finer. Innovative. 革新的なスリムさ、細さ

従来に比べてヘッドサイズが4mm 低く設計されているため、狭い領域や臼歯へのアクセスが容易になります。カップが短くネックはスリムなほど、施術エリアがよく見えます。

Perfect sealing 隙間が生じないから衛生的

プロキシオプロフィーカップやブラシはシャフトが短く、ヘッドとカップの間に隙間が生じないため研磨ペーストが入り込むことを抑えることができます。



Hygiene & easy to clean お手入れが簡単

滑らかな表面設計なのでお手入れが簡単。洗浄消毒器での洗浄・消毒および滅菌が可能。



Slim and flexible スリムで疲れにくい

人間工学に基づいたデザインと、スリムネックで手にフィット。

予防歯科のプロフェッショナルによって設計されたカップ構造

プロキシオプロフィーコントラアングルに加えて、W&Hはプロフィーカップとブラシを販売しています。プロフィーユーザーの協力によりプロフィーカップとブラシはデザインされました。最適な適応、簡単なペーストの取り込み、塗布、歯肉縁上・縁下ポケット3mm 以内のプラーク除去や歯面清掃などといった特長が重んじられています。

(プロフィーカップとブラシはディスポーザブル製品であり、再利用を目的としたものではありません。)

S *Smooth surface at the end of the Cup*
なめらかなカップ表面で歯頸部をやさしく磨けます。

S *Special internal fins*
研磨ペーストの取り込みと、術部への塗布が簡単

S *Special nub shape*
こぶ状の表面で研磨材ペーストをホールドし、効率よくクリーニング。

N *Nubs on the outside*
外側のこぶで歯間隙を同時に磨きます。

レギュラー ソフト ブラシ

■仕様

Type	WP-66 W	CE	RoHS	REACH
回転数 (モーター)	10,000 rpm			
ギア比	4:1			
カップ・ブラシの推奨回転数	1,250 - 2,500 rpm			
使用できるカップ・ブラシ	W&H Proxeo Twist LatchShortプロフィーカップとプロフィーブラシ			

プロフィーカップ・ブラシ ⓧ Not for reuse **LATEx** Latex-free

医療機器認証番号: 302ALBZX00005000 管理医療機器 特定保守管理医療機器
医療機器届出番号: 27B1X00020301002/27B1X00020301001 一般医療機器



W&H社
(オーストリア)



札幌 | 札幌市中央区北4条西20-2-1 Nord 420BLD1階 (011)616-5814
関東北 | さいたま市南区南浦和3-34-2 (048)884-3951
東京 | 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クロス12階 (03)5217-4618
名古屋 | 名古屋市千種区内山3-10-17 今池セントラルビル2階 (052)733-1877
本社 | 大阪府大阪市淀川区新高1-1-15 (06)6396-4400
広島 | 広島市南区西蟹屋3-2-1 日通ビル1階 (082)207-2870
福岡 | 福岡市博多区博多駅東2-18-30 八重洲博多ビル5階 (092)432-4618
白水貿易株式会社 <https://www.hakusui-trading.co.jp/> 2025.10.P.1,000 E12 Ver1.1.2