

PROPHYLAXIS GOODS

白水予防関連総合カタログ



歯周処置









プロフェッショナルケア

インプラントケア

口腔ケア関連

感染予防関連

その他

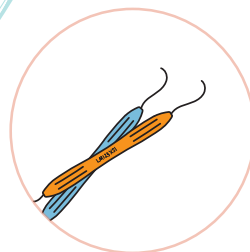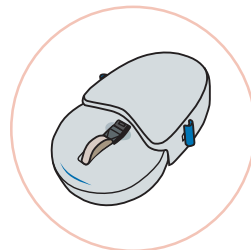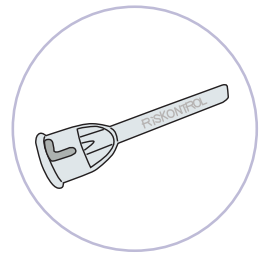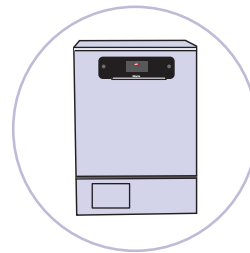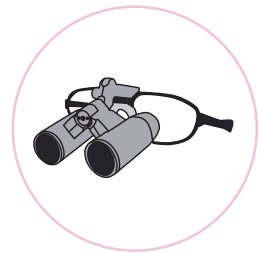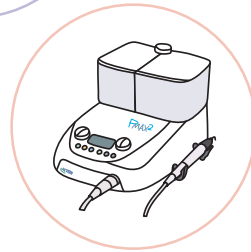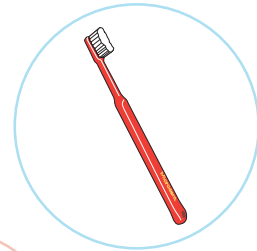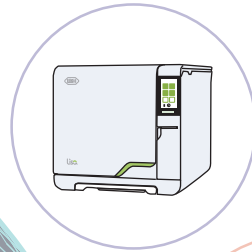

目次

歯周処置

A) 超音波スケーラー関連

スプラソンP-MAX2	04
ニュートロンP5	05
スプラソン専用チップ	06

B) ハンドインスツルメント関連

〈LMインスツルメント〉

グレーシーキュレット	08
診査器具	09

ミラーハンドル、ペリオプローブ、
エキスカベーター、シックルスケーラー、
ユニバーサルキュレット

PICKUP!	10
---------	----

フレックスプローラー

ペリオプローブファークーション、ファークーター、
グレーシーキュレット、シンテット

シャープダイヤモンド	11
------------	----

グレーシーキュレット、ミニグレーシーキュレット、
シックルスケーラー、ミニシックルスケーラー、
マイクロシックルスケーラー、
ユニバーサルキュレット、ミニシンテット

〈プレミアインスツルメント〉

ウルトラライト インスツルメント	12
------------------	----

- キュレットスケーラー各種
グレーシーキュレット (スタンダード)、
ポケットスケーラー、ミニポケットスケーラー

- シックルスケーラー各種
204、マッコール、シックル
- ユニバーサルキュレット各種
コロンビア、マッコール

診査器具	12
------	----

エキスパローラー、プローブ

C) シャープニング関連

シャープペンライト	13
-----------	----

D.I.S.C

LMロンドプラス シャープナー シルバー

マグネットゲージ

エッジスターシャープニングシステム

エッジスターテストスティック

プロフェッショナルケア

プロキシオ プロフィーコントラアングル	14
---------------------	----

ブリッター

エアNゴーイージー	15
-----------	----

デントガード

エンブレイスシーラント

インプラントケア

ペリオワイズ	16
--------	----

インプラントスケーラー

LMエルゴミックス

エアNゴーイージー	17
-----------	----

スプラソン専用チップ

目的に合わせた

インプラントメンテナンス器具の選択	17
-------------------	----

口腔ケア関連

マイクロデント/マイクロデント キッズ	18
---------------------	----

感染予防関連

クラスBオートクレーブ リサ22	19
------------------	----

ミーレ ジェットウォッシャー

ヒートシーラー Seal2

アシスティーナ TWIN

LMセルボマックス トレーシステム	20
-------------------	----

リスコントロールNV

シトリザイム

その他

アイマグスマート/アイマグプロ	21
-----------------	----

アイマグライトⅡ

ジンジカインゲル20%

モトランサー	22
--------	----

M1ブライト/M2レインボウ/M3ブリーズ

M6ルミ/M7エバ

ユーロング

バキュームチップ/サリバエジェクター

フレックスアスピレーターチップ

TowelUP防水加工紙エプロン

PG30aprons防水加工紙エプロン



歯科用多目的超音波治療器

スプラソン P-MAX2

1993年に“スプラソンP-MAX”が発売されて以来、
歯周治療の変遷とともに進化し超音波スケーラーの
歴史を先導してきたパイオニア

P-MAX²

NEWTRON POWERED



初期付属チップ(5本)

● = acteon 社製品



● スケーリングチップ #1, #1S, #10

URM ペリオハードチップ H3, HY1

詳しくは標準装備品をご覧ください ▼



標準装備品

用途で選択
3システム

滅菌可能な
ハンドピース



ベーシックシステム

(外科的処置を伴わないスケーリング)
ユニットからの
内部注水を利用

【00822200】スプラソンP-MAX2
ベーシックシステム(LEDなし)



タンクシステム

(外科的処置を伴わない処置)
本体の移動が容易

【00822240】タンク式注水システム



ステリシステム

(超音波外科治療)
外科処置を行う際の
滅菌対応が可能

【00822242】ステリ式
注水システム(LEDなし)



ニュートロンLED スリムハンドピース

(LED付)

内部/コネクターなど液体の接触部分でチタン採用、耐腐食性が向上。

【00822320】
ニュートロンLEDスリムハンドピース
(ホワイト)



ニュートロン チタンハンドピース

(LED無)

【00822230】ニュートロンチタン
ハンドピース

【00822311】スプラソンP-MAX2
ベーシックシステム(LED付)

タンクシステム、ステリシステムは
ベーシックシステムにオプション
として追加可能です。

【00822334】P-MAX2ステリ式
注水システム スリムLED

症例に合わせて最適なパワーモード設定が可能(チップ毎の推奨パワーは、別冊アクセサリガイドをご参照ください)

ペリオ(弱)、エンド(中)、スケーリング(強)モードの3種類あります。
また、目的に合わせて細部まで水量調整が可能です。

豊富なチップの種類

100種類以上という豊富なチップラインアップ
により、ペリオ、エンド、形成、インプラントなど
多岐にわたる症例に対応できます。



詳しい説明



F.L.A.G. (フラグ) システム / コードイージー



ブルーLEDライトでプラークを
確認しながらディプラーキング

【00822321】ニュートロンLEDスリムハンドピース(ブルー)

【00822332】F.L.A.G. (フラグ) 液 1セット

【00822333】F.L.A.G. (フラグ) システムスターターキット



超音波スケーラーのハンドピースコードの
取り回しを改善し、手指の負担を軽減

【17100010】コードイージー リストバンド/アダプター 1セット



F.L.A.G. (フラグ) 液 1セット

ブルーLEDライト(B-LED)

見えなかった
プラーク確認

ブルーLEDライト
(B-LED) 付属



詳しい説明



Made in U.S.A.
滅菌可能



詳しい説明



歯科用多目的超音波治療器

ニュートロンP5 ライト付き / ニュートロンP5 ライト無し

コンパクトな歯科用多目的超音波治療器。


チップのラインアップも豊富

初期付属チップ(2本)



ニュートロン P5

[ライト付き]

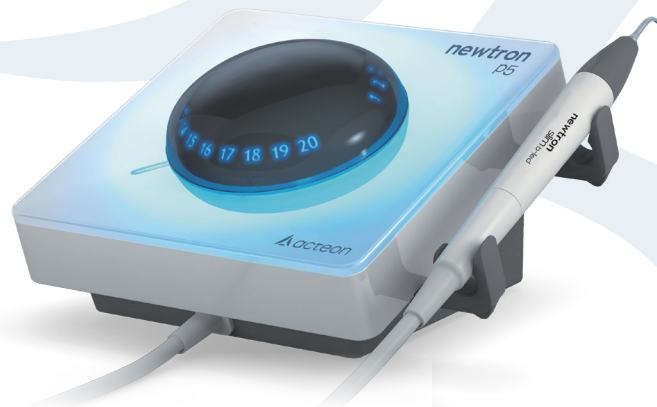

ニュートロン P5

[ライト無し]



ニュートロンP5

LED無しも
ございます

コンパクトで
使い易い設計



フットスイッチ

SP NEWTRONTM POWER

ニュートロンテクノロジーにより、どのような状況下でも常に安定した最適なパワーを供給します。詳しくはページ下部をご覧ください ▼

カラーコードシステム(各チップに最適なパワー設定をカラーコード化)

LED 付



GREEN(ペリオモード)

歯肉縁下の SRP や
デブリドメントに使用します。

LED 無



LED 付



BLUE(スケールモード)

歯肉縁上のスケールリングに
使用します。

LED 無




LED 付



YELLOW(エンドモード)

歯内療法に使用します。

LED 無

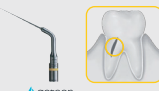

LED 付



ORANGE(ブーストモード)

ポストや補綴物の除去に
使用します。

LED 無



その他特徴

- 各チップに最適なパワー設定をカラーコード化。シンプルで正確なパワー設定が行えます。
- トランスフォーマー内蔵型、コンパクトでセキュリティも向上しました。(ライト付きのみ)




- ライト付きは長寿命ハイパワーLEDを採用。白歯部を明るく照らします。
- LEDは組織を認識しやすい冷光照明(6,000~7,000°K)。ルーペ使用にも最適です。ハンドピースはオートクレーブ滅菌可能です。

【00444311】ニュートロンP5 ライト付き

【00444321】ニュートロンP5 ライト無し

ニュートロンテクノロジー

フットスイッチを踏んで
即刻発振するのでストレスがありません

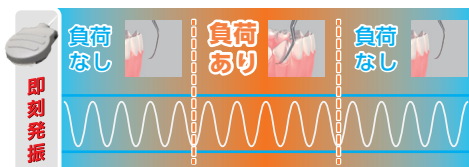

無負荷でも、負荷を掛けても

パワーと振幅を一定にキープ

痛みの少ない治療のために

- ➡ 無負荷(歯にチップを接触させていない状態)でも、負荷(歯にチップを接触させた状態)を掛けても[※]、指定した一定の振幅を保ちます。[※] 歯に10~20g圧をおすすめ
- ➡ フットスイッチのON/OFFを繰り返しても、常に安定したパワーと振幅です。
- ➡ チップはリニア(前後方向の往復)振動をするのでチップの側面を使って、フェザータッチで歯石・プラークを除去します。

ニュートロン
テクノロジー SP NEWTRONTM POWER

フェザータッチでチップを動かすことでSRPが可能なシステム



詳しい説明

超音波関連

スプラソン専用チップ


100種類以上のチップで
様々な治療に対応します。

スプラソン

アクセサリーガイド



スプラソン アクセサリーガイドで全チップをご覧いただけます

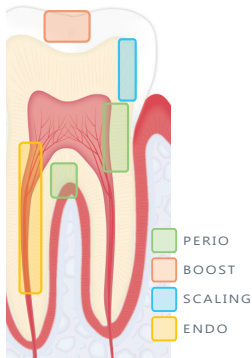

BOOST

●スプラソンチップ

クラウン・
ポスト撤去用



PERIO

● URM ペリオハードチップ (キュレット)

通常のルートブレイニングから根分岐部、歯間部等の狭い部分、彎曲や複雑な根面などの到達、適応し難い部位のスケーリング・ルートブレイニングに使用できるチップが揃っています。



● URM ペリオハードチップ (ロングミニ)

狭いポケットや複雑な部位、マージン部の根面のブレイニングに活用できます。



● URM ペリオハードチップ (ダイヤモンド)


通常のルートブレイニングから根分岐部、歯間部等の狭い部分、彎曲や複雑な根面などの到達、適応し難い部位のスケーリング・ルートブレイニングに使用できるチップが揃っています。



SCALING

●スプラソンチップ

確実・効率的に歯石の除去が可能です。

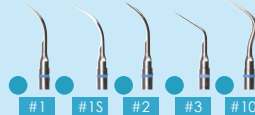


● URM ペリオハードチップ (メタルソフト)

バイオフィルムの破壊、イリゲーション、サルカスのクリーニングに安全に使用できます。




● URM ペリオソフトチップ

メインテナンス・ポリッシング用。補綴物に傷を付けず、インプラントに付着したプラークや歯石の除去にも安心して使用することが可能です。

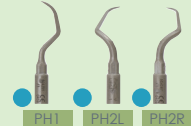

●超音波グレイシーチップ

従来の手用スケーラーの操作感覚と超音波振動によって歯面上に付着するバイオフィルム、堆積物を低侵襲・高効率に除去することを目的とした超音波チップです。

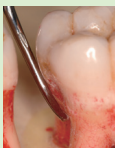

● B.D.R. チップ

非常に細く作られており、手用キュレットでは届かない部位にも到達できます。チップに刃は付いていません。



● HKPチップ (らせんチップ)

らせん状のネガティブブレード採用。歯面に傷をつけにくい形状、先端が丸い形状で安心安全なSPTを(長軸方向に動かす限り線状痕がつきません)



●デブライドメントmicroチップ TN-2

歯科衛生士が歯科衛生士のために新しい超音波チップを考案。デブライドメントと柔らかい歯石のスケーリングを効率よく行うことのできるチップです。



ACTEON SATELEC が日本の先生方と超音波スケーラーの歴史を変えてきました。

エンド領域への新たな挑戦
AMファイル

AMファイルを使用することで従来より早く確実にフレアーの無い根管拡大・洗浄が可能になりました。

開発者 歯科医師 故 宮原 肇 先生

超音波チップのスタンダード
URMチップシリーズ

微細な超音波パワーとの組み合わせによって歯肉線下のスケーリングが可能になりました。このことにより超音波スケーラーが多目的超音波治療器として世界的に認知されることとなりました。

開発者 歯科医師 姫野 宏 先生

新たな可能性の追求
B.D.R.チップ

「プローブが挿入できる部位であればどこでも挿入できる」をコンセプトに開発されたバイオフィルムの破壊と歯石除去に用いるチップです。

開発者 歯科医師 熊谷 崇 先生

1980

1984

1985

1986

1992

1993

1998

超音波スケーラー
日本初上陸
スプラソン P2

スプラソンP2を開発したサテック社は、歯科医療分野において初めてピエゾを用いた特許を取得した会社です。販売期間中にアップグレードが行われ、エンドモードが使用可能になりました。

超音波スケーラーに
エンドモード搭載

スプラソンP2を開発したサテック社は、歯科医療分野において初めてピエゾを用いた特許を取得した会社です。販売期間中にアップグレードが行われ、エンドモードが使用可能になりました。

多目的超音波治療器への
発展
スプラソン P3

ピエゾ方式の超音波スケーラー。超音波を使用した歯内療法も行われるようになり、AMファイルなどのチップが誕生しました。

エンドとペリオ
が可能に
スプラソン P-MAX

ペリオ・エンド+スケーラーの機能が搭載され、まさしく多目的治療器となりました。

ニュートロンテクノロジー搭載
スプラソン P-MAX+ (プラス)

ニュートロンテクノロジーの搭載により、最弱ペリオモードでも発振が止まらず、あらゆる状況でより安定したパワーを発揮することが可能になりました。

スプラソンの挑戦により、ペリオ・エンド・形成、そしてインプラントメンテナンスと広がってきました。

スプラソン P-MAX2及びスプラソンシリーズには、サテック社及び白水貿易株式会社が販売する純正チップのご使用を強くご推奨いたします。
他社チップ、及び類似品のご使用に起因する故障およびトラブルへの対応については、保証期間内であっても有償となります。

■チップ一覧の見方



■スプラソンP-MAX2で使用する動作モード

- スケーリングモード
- ペリオモード
- エンドモード
- プースト

ENDO

● エンドサクセスチップ

根管内で破折したエンドインストルメントや残存ポスト等をより安全・確実除去することが可能です。



● イリセーフ ファイル

根管洗浄用ファイル。切削効果がないため根管内を安全に効率よく洗浄することが可能です。



● AMファイル

髓室開口を効果的、効率的に行うことが出来ます。隠れた石灰化根管の位置を特定し、根管口を拡大・形成します。



● エンドサクセス ● キャナルアクセスチップ

● エンドサクセス

● アピカルサージェリーチップ

● エンドサクセス

● アピカルサージェリーチップ

低侵襲性の逆根管治療を可能にします。
(作業長：3mm,6mm,9mm)




● ETチップ

根管拡大・根管形成の際に象牙質内の異物や軟化象牙質を削除します。また、破折ファイルの除去にも使用可能です。



● マイクロレトロチップ、レトロフィリングチップ

根尖部の窩洞や岐部の形成に使用します。

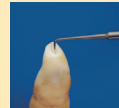

● コンデンサー


ガッタパーチャ充填。
直径 0.4mm



IMPLANT-PURE TITANIUM

● 純チタンチップ (インプラントプロテクト)


インプラント体と同じ純チタン(グレード4)で出来ており、異種金属汚染を心配することなく、インプラント体のメンテナンスやインプラント周囲炎症例のオープンサージェリーに使用することができます。

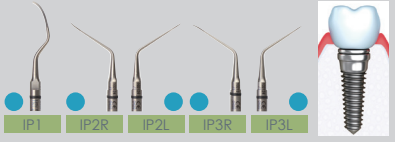

PROSTHESIS


● マージンファイル

ショルダー部の凹凸面の仕上げなどに使用します。

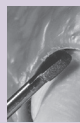

● パーフェクトマージンチップウルトラ

オールセラミッククラウンのマージン形成用チップ。

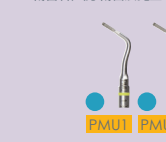

● FLTチップ

支台形成後のフィニッシングラインの最終仕上げに使用します。



● = ▲acteon 社製品 印なし = 白水貿易社製品

多機能超音波治療器の歴史は、スプラソンの歴史と言っても過言ではありません。

acteon

マージン形成も超音波で
パーフェクトマージンチップ ウルトラ

オールセラミックの補綴物など精密なマージンが必要とされる場合に使用するマージンの最終仕上用チップです。

開発者 歯科医師 南昌宏 先生

acteon

インプラントへの新提案
純チタンチップ (インプラントプロテクト)

インプラント体と同じ素材である純チタン(グレード4)を用いたチップ。インプラントのスレッドの大きさに合わせた3種類のチップをご提供します。

開発者 歯科医師 依田 泰 先生

デブライドメントmicro チップ
TN-2チップ

主にデブライドメントに使用するチップでペリオモードで使用します。シャングが長い形状のため、CEJ付近、コンタクトポイント直下にある歯のくぼんだ部分、及び歯列不正のプラーク除去

開発者 歯科衛生士 田島 菜穂子 先生

2007

2013

2014

2015

2018

2023

2024

すべてが向上した最新型
スプラソン P-MAX2

LED照明の採用、液晶パネルの採用による視認性・操作性の向上、より細くより軽くなったハンドピース、タンクの切り替え、水の補充が簡単なタンクシステムなどの3種類の注水システム。
すべてが向上した器械、それがスプラソン P-MAX2です。

ハイブリッド超音波チップ
超音波グレースーチップ

グレースーキュレット#11~#14と同じ形状の超音波チップ。非外科的治療、歯周メンテナンス、スケーリング、ルートプレーニング等に効果的です。

開発者 歯科医師 藤本 浩平 先生

らせん状のネガティブブレード採用
歯肉縁下デブライドメント
HKPチップ

らせん状のネガティブブレード採用。歯面に傷をつけない形状、先端が丸い形状で安心安全なSPTを(長軸方向に動かす限り線状痕がつかません)

開発者 歯科医師 帆足 公人 先生

我々が超音波の歴史を変えました。




ハンドインスツルメント LMインスツルメント

- 鮮明な色と見やすい表示
— 容易な判別
- 手にしっくりとなじむシリコンゴム
— 快適で滑りません
- 特殊合金製メタルコア
— 軽い構造
- 滑沢な研磨面
— 顕著な耐腐蝕性



優れた独自の
ハンドル形状

人間工学に基づいて開発されたハンドル形態。
高い耐摩耗性を誇る最新の金属工学

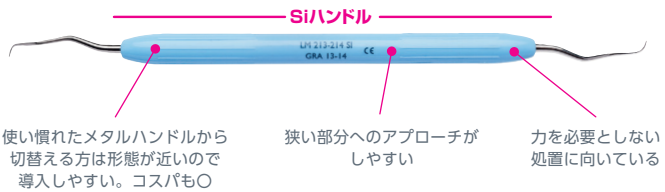

LM グレーシーキュレットのご紹介

	グレーシー キュレット	グレーシー リジッドキュレット	グレーシー ミニキュレット	グレーシー マクロキュレット AFスタンダード
1/2 LM201-202 Si/XSi				
3/4 LM203-204 Si/XSi				
P3/P4 LM266-267 Si/XSi				
5/6 LM205-206 Si/XSi				
7/8 LM207-208 Si/XSi				
9/10 LM209-210 Si/XSi				
11/12 LM211-212 Si/XSi				
13/14 LM213-214 Si/XSi				
15/16 LM245-246 Si/XSi				
17/18 LM247-248 Si/XSi				



詳しい説明

- 前歯
 - GRA1/2
 - GRA3/4
 - GRA5/6(小臼歯部)
- 頬舌面
 - GRA7/8
 - GRA9/10(分岐部)
- 臼歯部 近心面
 - GRA11/12
 - GRA15/16
- 臼歯部 遠心面
 - GRA13/14
 - GRA17/18

LM グレーシーキュレット使用部位 タイプ別比較表




- リジッド**
通常のタイプよりもシャンクが太く、頑強で刃部は少し幅広い。
- ミニ**
通常のタイプよりも第一シャンクが3mm長く、刃部が小さい。
- マクロAFスタンダード**
通常のタイプよりも第一シャンクが3mm長く、刃部少し幅広い。

	ミニ	マクロ AF	スタンダード	リジッド
使用目的	5mm以上の深いポケット・RP	SC/SRP	SC/SRP	強固な歯石除去
ブレード長さ	標準の2/3	標準	標準規格	標準
ブレード幅	標準の2/3	標準より広い	標準規格	標準より広い
第一シャンクの長さ	標準より3mm長い	標準より3mm長い	*G17/18はリジッドと同じような形状	標準
シャンクの太さ	標準より細い	標準より太い		太い



詳しい説明

LMミラーハンドル

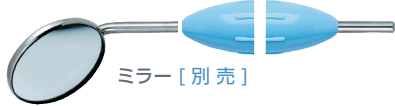

ミラー【別売】

ネジ山は国際水準(M2.5) 準拠
選べるハンドルカラー(●●●●)



プリマミラー
【別売】

12ヶ入。ハンドル装着
可のミラーシャングは
直径2.5~2.6mm
【00233121】

ESi LMエルゴシングル ミラーハンドル バランスのとれたデザイン、治療部位へアクセス容易。
【グレー/00233108 レッド/00233109 ブルー/00233110】25 ESi

Si XSi LMミラーハンドル 片頭タイプ。尾端は打診に使用。
【グレー/00233101 レッド/00233103 ブルー/00233105】25 Si
【グレー/00233102 レッド/00233104 ブルー/00233106】25 XSi

探針/プローブ LMペリオプローブ



XSi LMノースカロライナ プローブ 54B
【00231068】LM54B XSi



Si XSi LMプローブ 52B
【00231071】52B Si
【00231070】52B XSi



XSi LMマーキス12 プローブ 53B
【00231075】53B XSi

探針/プローブ LMエキスカベーター



Si XSi LMスプーンエキスカ 1.0mm
【00230652】522-523 Si
【00230752】522-523 XSi



Si XSi LMスプーンエキスカ 1.5mm
【00230653】533-534 Si
【00230753】533-534 XSi



Si XSi LMエキスカベーターラウンド1.0mm
【00230661】61-62 Si
【00230610】61-62 XSi



Si XSi LMエキスカベーターラウンド1.5mm
【00230663】63-64 Si
【00230615】63-64 XSi



Si XSi LMエキスカベーターラウンド2.0mm
【00230665】65-66 Si
【00230620】65-66 XSi

その他製品

LMバックアクション
エキスカなど、その他
インストルメントも
取り扱いがございます。



詳しい説明

LMシックルスケーラー



Si XSi LMハイジニストスケーラー #H6-H7
【00231011】146-147 Si
【00231012】146-147 XSi



XSi LMラップランダー
【00231010】148-149 XSi



Si XSi LMシックルスケーラーミクロ
【00231601】301-302 Si
【00231602】301-302 XSi



Si XSi LMシックルスケーラーLM23
【00231605】313-314 Si
【00231606】313-314 XSi

LMユニバーサルキュレット



Si XSi LMマッコール #135-145
【00230812】222-223 Si
【00230811】222-223 XSi



Si XSi LMランガーキュレット #5-6
【00230905】285-286 Si
【00230915】285-286 XSi



Si XSi LMコロンビア #4R-4L
【00230518】219-220 Si
【00230519】219-220 XSi



Si XSi LMコロンビア キュレット #13-14
【00230513】237-238 Si
【00230514】237-238 XSi

歯内療法、修復、外科、
メンテナンス、トレーシステムも
取り扱いがございます。



詳しい説明

歯石探知が苦手、取り残しが気になる方にオススメ

LM フレックスプローラー 11F-12F



XSi LM フレックスプローラー 11F-12F
【 00231043 】11F-12F XSi

グレーシーキュレット11-12と同様のシャンクの屈曲をもつエクスプローラー。先端が細くしなやかな形態で、歯石を正確に触知することが可能。



詳しい説明

根分歧部・天蓋部の処置にオススメ

LM ペリオプローブファーケーション LM ファークーター



Si **XSi** LM ペリオプローブファーケーション
【 00231063 】20B-21B Si
【 00231064 】20B-21B XSi

根分歧部を様々な角度から形態と深さを測定するために使用。
上顎、下顎両方に使用可能。(目盛:2mm毎、球あり)




詳しい説明



XSi LM ファークーター
【 00231310 】259-260 XSi

ファーケーションプローブ+極小エクスカの形状でキュレット類では挿入できない根分歧部、天蓋部の歯石除去に最適。力を入れずにゆっくりかき出すように操作するのがポイント。

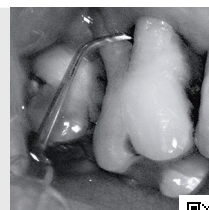

詳しい説明

歯石・最後臼歯遠心が苦手な方にオススメ

LM グレーシーキュレット #15-16 #17-18



Si **XSi** LM グレーシーキュレット #15-16
【 00230115 】245-246 Si
【 00231115 】245-246 XSi

11/12よりシャンクの屈曲が大きいので、ハンドル位置をより平行に保ちながら操作が可能。術者が座位、患者が水平位の診療体位に合わせて開発された。



Si **XSi** LM グレーシーキュレット #17-18
【 00230117 】247-248 Si
【 00231117 】247-248 XSi

13/14よりシャンクの屈曲が大きいので、ハンドル位置をより平行に保ちながら操作が可能。術者が座位、患者が水平位の診療体位に合わせて開発された。



開口量の小さい症例にも最適。





詳しい説明

時短・効率を求める方にオススメ

LM シンテット

Si **XSi** LM シンテット
【 00230315 】215-216 Si
【 00231315 】215-216 XSi

グレーシーキュレットの11と14、12と13を両刃で組み合わせたLM独自のユニバーサルキュレット。インストゥルメントを持ち替えることなく1本で近遠心面を操作することが可能。通常のグレーシーキュレットよりもややシャンクが太く強固な歯石除去にも最適。

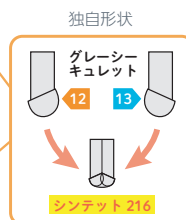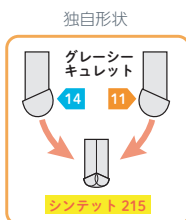

詳しい説明

歯科用 シャープニングフリー インstrument LMシャープダイヤモンド

シャープニングせずに切れ味持続
シャープニングフリー

人間工学に基づいた
エルゴセンスハンドル

持ちやすく
疲れない

耐摩耗性の比較



シャープダイヤモンドは
1.8倍以上の耐摩耗性を
示しました。(従来品比)

耐久性の高い特殊金属
PVD^{*}コーティング

^{*}PVD : Physical Vapor Deposition
物理蒸着法のこと、非常に硬く耐摩耗性がある

^{*}LM シャープダイヤモンドは、
シャープニングを行うことができます
^{*}ハンドルは LM エルゴセンスのみ



詳しい説明

シックルスケーラー

ES エルゴセンス

【00232745】シャープジャック 315-316 SD ES
全ての部位。ブレードが細く傾斜があるため、臼歯隣接面や歯間部にも最適



【00232746】ネブラスカ 128 128-128 SD ES
前歯用。ブレードが細く歯間部にも最適



【00232748】シックル LM23 313-314 SD ES
全ての部位。ミニシックルよりブレードが短く第一シャンクが長い



【00232749】シックル LM23スリム 343-344 SD ES
全ての部位。シックルLM23よりもブレードが細く歯間部に最適



【00232749】スケーラー H6-H7 146-147 SD ES
全ての部位



ミニ シックルスケーラー

ES エルゴセンス

【00232751】ミニ シックル 311-312 SD ES
全ての部位。特に隣接面に使用



マイクロ シックルスケーラー

ES エルゴセンス

【00232750】マイクロ シックル 301-302 SD ES
刃部が非常にコンパクト。タイトな歯間空隙に使用



ユニバーサルキュレット

ES エルゴセンス

【00232775】コロムビア 4L-4R 219-220 SD ES
全ての部位。特に臼歯用



【00232776】バーンハルト 5-6 227-228 SD ES
全ての部位。第一シャンクが短い



【00232777】ミニ マッコール 13S-14S 222-223 MSD ES
全ての部位。深く狭いポケット用



ミニ シンテット

ES エルゴセンス

【00232752】ミニ シンテット 215-216 MSD ES
ユニバーサルキュレットとグレーシーキュレットを組み合わせた
両刃のデザイン。根分岐部や隣接面に最適



【00232779】ミニ シンテット アンテリア 275-276 MSD ES
ユニバーサルキュレットとグレーシーキュレット(1-2と7-8)を組み合わせた
両刃のデザイン。両刃のデザイン。
前歯部や小臼歯部の歯面に対応



グレーシーキュレット

ES エルゴセンス

【00232765】1-2 201-202 SD ES
前歯用



【00232766】7-8 207-208 SD ES
臼歯の頬側・舌側用



【00232769】9-10 209-210 SD ES
小臼歯、大臼歯の頬舌面、分岐部用



【00232767】11-12 211-212 SD ES
臼歯の近心用



【00232768】13-14 213-214 SD ES
臼歯の遠心用



【00232770】15-16 245-246 SD ES
臼歯の近心用 (#11-12よりシャンクが鋭角)



【00232771】17-18 247-248 SD ES
臼歯の遠心用 (#13-14よりシャンクが鋭角)



ミニ グレーシーキュレット

ES エルゴセンス

【00232753】1-2 201-202 MSD ES
前歯用



【00232754】7-8 207-208 MSD ES
臼歯の頬側・舌側用



【00232755】11-12 211-212 MSD ES
臼歯の近心用



【00232756】13-14 213-214 MSD ES
臼歯の遠心用



【00232757】15-16 245-246 MSD ES
臼歯の近心用 (#11-12よりシャンクが鋭角)



【00232758】17-18 247-248 MSD ES
臼歯の遠心用 (#13-14よりシャンクが鋭角)



premier

from U.S.A.

インスツルメント

ウルトラライト インスツルメント

切れ味のよさ、確かな品質

グレーシーキュレット

(9種類、各1本)

グレーシーキュレット


特徴

- ・歯肉縁下深部の歯石除去
- ・歯根面の仕上げ


		グレーシー キュレット (スタンダード)	ポケット スケーラー	ミニポケット スケーラー
1/2				
3/4				
5/6				
7/8				
9/10				
11/12				
13/14				
15/16				
17/18				

■ タイプ別グレーシーキュレットの比較

	グレーシーキュレット (スタンダード)	ポケット スケーラー	ミニポケット スケーラー
用途	一般的な歯肉縁下スケーリングに使用します。	5mm以上の深いポケットに使用します。	5mm以上の深いポケットや狭窄された部位に有効です。
シャンクの長さ	標準	第1シャンクが3mm 長い	第1シャンクが3mm 長い
刃の長さ	標準	標準	約1/2

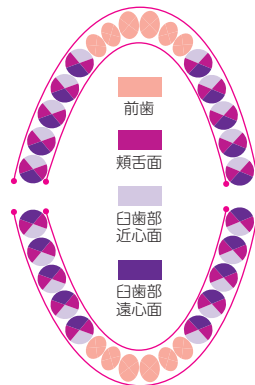

適応部位

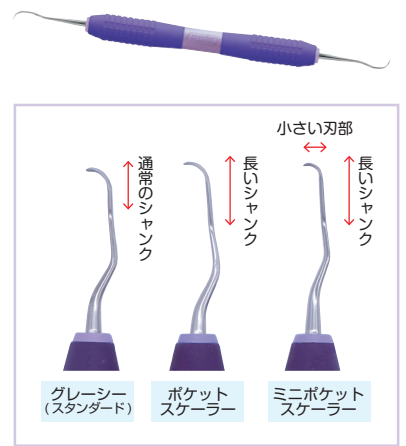

ユニバーサルキュレット

特徴

- ・歯肉縁上・縁下の中等度から強固な歯石除去

コロンビア



マッコール



シックススケーラー


特徴

- ・歯肉縁上の歯石除去

204



マッコール

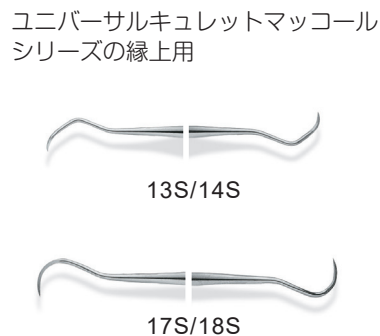

シックス



関連商品

エクスプローラー CF DE OD 11/12


歯石探知・根面粗造感の触診用



おすすめ!

プローブ ネイバース 2N CC


根分岐部診査用 3mm 間隔の目盛あり

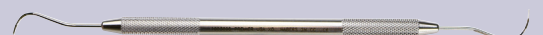

誰が研いでも正確な角度に研げるシャープニングシステム

from U.S.A.

シャープニングシステム シャープペンライト

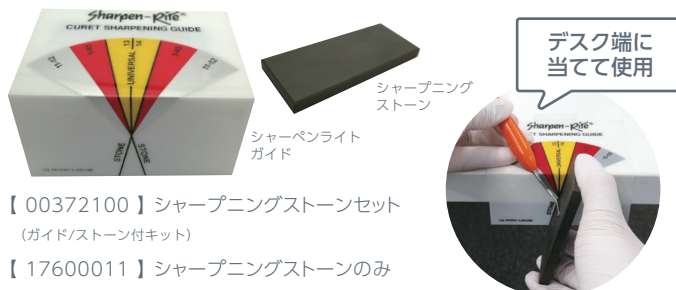

手用シャープニングでも正しい角度を維持

手用シャープニングの基礎を学べる。ハンドルをカラーコードに合わせるだけで、手用シャープニングでも正しい角度を維持できる、オイル不要の滅菌可能なシャープニングストーン。

正しい角度で手用シャープニングができるガイド。
天然のストーンと比べて、きめが均一で安価。



詳しい説明

premier

from U.S.A.

シャープニングシステム D.I.S.C



ハンドルを黒い線と合わせながらスライドするだけ

ハンドルを黒い線と合わせながらスライドするだけで正確な角度にシャープニングが可能。コンパクトで収納しやすくチェアサイドで使いやすい。器具全体を全て滅菌できるため衛生的。

簡単で衛生的なシャープニングシステム。
水、オイル不要のセラミックストーン。



詳しい説明

LM

from FINLAND

シャープニングシステム LM ロンドプラス シャープナー シルバー



簡単に・速く・正確にシャープニングできる

スケラーの原型を崩さずに誰でも簡単にシャープニングできる。スケラー類に加え、エクスカーベーターもシャープニング可能。

LMインスツルメントと相性抜群。
水、オイル不要のセラミックストーン。



詳しい説明

from JAPAN

シャープニングシステム エッジスターシャープニングシステム



刃の状態に合わせて4種類の砥石をカスタマイズ

お好みのシャープニング角度に変更可能(78度・72度)。レールに沿わせてスライドさせるだけで、簡単にシャープニングが可能。

粗さの異なる4種類の砥石が初期導入セットに付属。
オイル不要の滅菌可能なセラミックストーン。




詳しい説明

< 関連商品 >

マグネットゲージ

【00481565】マグネットゲージ

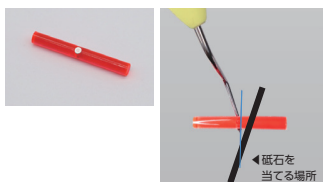

< 関連商品 >

エッジスターテストスティック

【00413523】エッジスターテストスティック(2本入)



患者さんの輝く笑顔のために プロフェッショナル用のアイテムを揃えています

USH 狭い領域や臼歯に

LatchShort Polishing System

プロキシオ プロフィーコントラアングル WP-66W

【00661750】プロキシオ プロフィーコントラアングル WP-66W

より小さく、よりスマートに。治療エリアの視界が
広がるヘッド。予防歯科のプロフェッショナルによって設計。

研磨ペーストがヘッド
部に入りにくい設計



【00661766】プロキシオ プロフィーカップ (レギュラー) 10個入

【00661767】プロキシオ プロフィーカップ (ソフト) 10個入

【00661768】プロキシオ プロフィーブラシ 10個入

※カップブラシ共にプロキシオ専用(100個入りも販売)

臼歯部もラクラク

proxeo^{TWIST}

プロキシオプロフィーコントラアングルに加えて、プロフィーカップとブラシを販売。
(プロフィーカップとブラシはディスプレイ最前線) 最適な適応、簡単なペーストの取り込み、
塗布、歯肉縁上・縁下ポケット3mm以内のプラーク除去や歯面清掃などに。

従来品 (高さ: 約23mm) proxeo^{TWIST} (高さ: 約19mm)



※従来品の高さはコントラおよびカップ/ブラシの
メーカー・機種によって異なります



詳しい説明

歯面研磨用ペースト
グリッター

1ペーストでクリーニングから仕上げまで可能。



すっきりとした
ミント味

グリッターのふたの銀紙を取り除き、
付属のプラスチック製ホルダーに
はめ込み指の間に保持して使用。

スケーリング後、ご使用ください。1回の分量がカップ入りで
使いやすく、患者さんごとの使い切りタイプで衛生的。

歯面を滑沢にし、プラーク、
歯石をつきにくくします



詳しい説明

【00206502】2g×1箱200個入

LatchShort Polishing System エアNゴーイージー

アンド

一本のハンドピースで歯肉縁下にも歯肉縁上にも柔軟に対応
簡単な操作で歯面やインプラントを清掃するエアポリッシャー

air N GO
easy

エアNゴーイージーセット

<セット内容>

- ・エアNゴーイージー本体
- ・タービンアダプター（カボマルチフレックス、ピアンエアー、W&H、シロナ、ミッドウエスト4ホルのいずれか1本）
- ・歯肉縁上用ノズル
- ・クラシックパウダー
- ・メンテナンスキット
- ・清掃用シリンジセット
- ・クリーニングワイヤー（長1、短1）

効果的で手軽なエア
ポリッシングを実現

ノズルとパウダーの組み合わせで症例に適した処置が可能



4種の
ノズル



5種の
パウダー



歯肉縁上／歯肉縁下の両方で使用可能

一本のハンドピースで広範囲をカバーし、パウダーとノズルの種類が豊富。

歯肉縁上／縁下を4種類のノズルで処置

最先端の流体力学に基づき設計された4種類のノズルは、常に安定したスプレー噴射を可能にし、歯肉縁上／歯肉縁下のバイオフィルムを効率良く除去。

歯肉縁上ノズル 標準

- 歯肉縁上の予防ケアに適したノズルで患者への負担を少なくし、迅速で効果的な施術可能。




臨床写真提供: Dr.P.Rouas (フランス)

【00825110】

ペリオメンテナンスノズル オプション

- 歯周メンテナンスに
- 粘膜炎をケアし、健康な状態に
- 歯周病の進行を防ぐ

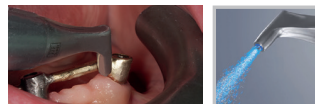

臨床写真提供: Dr.C.Lim (イギリス)

【00825113】

ペリオイージーノズル オプション

- 靴べらのような斬新なデザインで歯肉縁下に挿入し易い
- 非外科的な歯肉縁下の歯面やインプラントの処置に使用（深さ3～8mmの歯周ポケット）



臨床写真提供: Dr.C.Lim (イギリス)

【00825111】

ペリオノズル オプション

- 外科的、非外科的な歯肉縁下の処置に使用（トンネリング、フラップ手術）
- 側方からの強力スプレー
- 深いポケット（深さ8～10mm）の清掃



臨床写真提供: Dr.A.Patel (イギリス)

【00825112】

クラシック パウダー 歯肉縁上専用



主成分: 重炭酸ナトリウム 粒子サイズ: 約76μm

クラシックパウダーボトル(各フレーバー)

- 痛覚や出血を軽減するために研究開発された粒子サイズと形状。
- 種類は無香料タイプが1種類と100%天然のアロマやエッセンシャルオイルをベースにしたフレーバー付きタイプが4種類（コーラ、ラズベリー、ミント、レモン）。




詳しい説明

PULPDENT®

歯科小窩裂溝封鎖材

エンブレイスシーラント

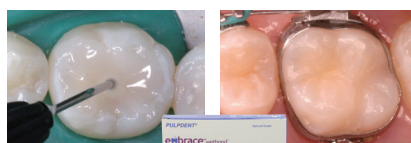

選べる2色調の
シーラント材

【00302511】キット(2シリンジ オフホワイトシェード/ナチュラルシェード)

シーラント充填後の新たなう蝕の発生率が低く

湿潤環境下でも充填が可能。



詳しい説明

フッ素塗布器

デントガード



舌側側にもしっかり
密着塗布

2才～成人まで

【00410501】(#1) 【00410502】(#2)
【00410503】(#3)
【00410504】(#4) 【00410505】(#5)

大きく口を開けられない子にも、全顎のフッ素塗布を

一度に。
*溶液のめやす・挿入時間のめやすはフッ化物製品により異なります。
詳細は各フッ化物製品取扱メーカーにお問い合わせください




詳しい説明

premier インプラント・補綴物・天然歯の歯周ポケットを優しくスピーディーに測定

歯周ポケット診査用プローブ ペリオワイズ

特殊プラスチック製の歯周ポケット用プローブは、先端が丸い形状で柔軟性が高く歯肉に優しい仕様です。患者さんへの快適さとスピーディーで精度の高い診査のために。

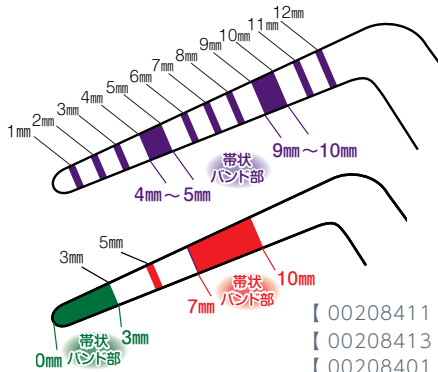

UNC12

精査可能な目盛り
1mm間隔×最長12mm

赤緑

識別しやすい赤緑目盛り
3-5-7-10mm

- 【00208411】 UNC12 (1本入)
- 【00208413】 UNC12 (3本入)
- 【00208401】 赤緑 (1本入)
- 【00208400】 赤緑 (6本入)

オートクレーブ
滅菌可能

Original



UNC 12

インプラント周囲部の
アセスメントにも最適



詳しい説明


premier 超軽量の特殊プラスチック製インスツルメントで生体・チタン・補綴物を優しくケア

インプラント用インスツルメント インプラントスケーラー

- ・インプラント体に優しく傷付けません。
- ・とても軽量でメンテナンス時の術者の疲労を軽減します。
- ・到達しやすく効率良くスケリングが行えます。
- ・直径が太いので把持しやすく、操作性に優れており快適です。



各2本入

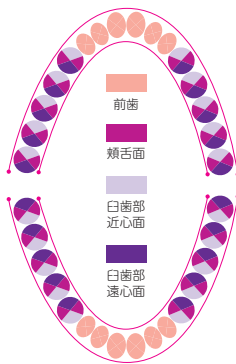

- 【00208461】 137 Anterior アンテリア137 前歯用
- 【00208462】 204 Posterior ポステリア204 臼歯用
- 【00208463】 Facial [Goldman-fox] フェイシャル [ゴールドマンフックス] 前歯・臼歯用
- 【00208464】 Universal [4L/4R] ユニバーサル [4L/4R] 全顎用

オートクレーブ滅菌可能
(135℃以下)



詳しい説明

LM

チップ、ロックグリップ、ハンドルを自由に組み合わせてカスタマイズ

取り外し式インスツルメント LMエルゴミックス

エッジが消耗してもチップを交換するだけで新品のインスツルメントに早変わり。無駄がなく経済的で、種類が豊富。チップはシャープニング可能。

オートクレーブ
滅菌可能



【00231945】 ユニバーサルキュレット ミニ



【00231947】 グレーシー ミニ 11/12



【00231946】 グレーシー ミニ 1/2



【00231948】 グレーシー ミニ 13/14

- 【00231986】 LMエルゴミックスハンドル(1本)
- ロックグリップ(2ヶ1組)
- チタン製チップ(1本)

インプラントに適した
チタン製チップ



詳しい説明

インプラントケア

LatchShort Polishing System エアNゴーイージー

選べるペリオノズルと専用のペリオパウダーでインプラントのメインテナンスを効率よく快適に。



air N GO
easy

効果的で手軽なエア
ポリッシングを実現

選べるペリオノズル



詳しい説明

超音波関連 スプラソン専用チップ

豊富なチップラインアップ。上部構造やアバットメントにはプラスチックチップ、フィクスチャー部分には純チタンチップが最適。

PERIO

URMペリオソフトチップ

補綴物に傷を付けず、インプラントに付着したプラークや歯石の除去にも安心して使用することが可能です。

acteon



IMPLANT-PURE TITANIUM

純チタンチップ (インプラントプロテクト)

インプラント体と同じ純チタン (グレード4) で出来ており、異種金属汚染を心配することなく、インプラント体のメインテナンスやインプラント周囲炎例のオープンサージャリーに使用することができます。

acteon



スプラソン アクセサリガイド



約100種類のチップで
様々な治療に対応します。

EQUIPMENT SELECTION

目的に合わせた インプラントメインテナンス器具の選択

デブリドメント

歯石除去

エアポリッシング

エアNゴー
イージー



主なご紹介ページ
P.15



超音波チップ

プラスチック
チップ
acteon

※1



主なご紹介ページ
P.6



超音波チップ

純チタン
チップ
acteon

※2



主なご紹介ページ
P.7



ハンスケーラー

プラスチック
スケラー




主なご紹介ページ
P.16



ハンスケーラー

チタン
スケラー

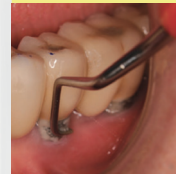


主なご紹介ページ
P.16



超音波チップ

純チタン
チップ
acteon

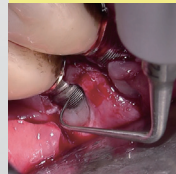

主なご紹介ページ
P.7



デンタルブラシ<歯科医院専売品>

マイクロデント/マイクロデント キッズ

扱いやすく、優れた
コストパフォーマンス



専用キャップ付き



親指のレストがあり、きっちり
歯ブラシを保持できます。

柄の厚みが一定で直接的なため、
磨こうとする部位にストレートに
到達できます


ネックが長いので、臼歯遠心部にも
容易に到達して清掃できます。

末端にもふくらみを持たせ、
濡れていてもすべりません。



● ● ● ● ○

4 Colors

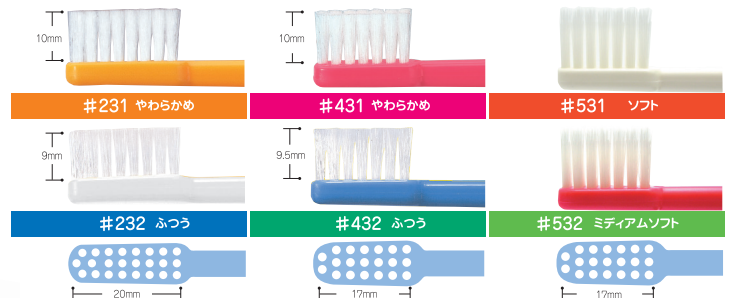

あらゆるブラッシングに対応できる
オーソドックスなタイプです。

植毛長17mmのコンパクトヘッド、
口腔内で自在に動き、効果的にプラ
ークを除去します。

テーパー毛が歯間部や歯周ポケット
の細部まですっきりと清掃します。
(使用上の注意) 軽い圧力で磨いてください

● ● ● ●

3 Colors



マイクロデント キッズ
#032 ふつう

ミニマムヘッドと短めのハンドルに
より口腔内で扱いやすく、お母さん
の寝かせ磨きにも最適です。

マイクロデントは歯間部や歯頸部、最後臼歯も容易にブラッシングでき、
扱いやすく、コストパフォーマンスに優れたデンタルブラシです。
ブラシ素材にはセラニーズ社(旧デュポン社)の「タイネックス」を使用し弾
力性にも優れ、スクラビング法等のブラッシングに最適です。*#531、#532は除く



マイクロデントは 歯科医院での専売品 です。

(ドラッグストア・スーパー等では販売されていません。)



#032, #231, #232, #431, #432 各1箱200本入
#531, #532 各1箱200本入

アソートタイプ* 1箱200本入
*#032, #231, #232, #431, #432

包装:1箱(1袋20本×10袋入)

包装:1箱(5種類/各2袋40本入)


柄の部分のネーム入れが可能、
便利で使いやすい専用キャップ付き



詳しい説明


#231 やわらかめ

- ヘッドの大きさ: 20mm
- 毛先の長さ: 10mm

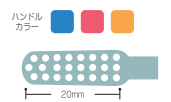


#232 ふつう

- ヘッドの大きさ: 20mm
- 毛先の長さ: 9mm

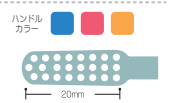


#431 やわらかめ

- ヘッドの大きさ: 17mm
- 毛先の長さ: 10mm

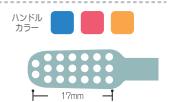


#531 ソフト

- ヘッドの大きさ: 17mm
- テーパー毛

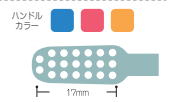

#532 ミディアムソフト


- ヘッドの大きさ: 17mm
- テーパー毛

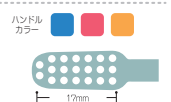

Microdent KIDS

#032 ふつう

- ヘッドの大きさ: 14mm
- 毛先の長さ: 7mm

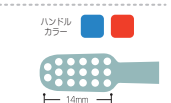

HAKUSUI NEWS
白水からのお知らせ

手軽に/
セミナー情報をゲットしよう!

● Instagram ●



@hakusui_trading

● LINE ●



友だち登録をして
最新の情報をゲットしよう!

● Facebook ●



@hakusuit



ストップ! 院内感染 ミーレジェットウォッシャーで洗浄・消毒して、クラスBで滅菌

Miele

小型未包装品用高圧蒸気滅菌器

クラスBオートクレーブ リサ22



リサ滅菌で
感染予防



【07801300】リサ22(Eli)

大容量と時短を両立したモデル

クラスBオートクレーブ リサのチャンバーは22リットルの大容量！
そして滅菌時間は約28分* 機能性のアップによって、より効率的
・効果的な滅菌が可能になりました。

*[Bユニバーサル134]モード、
標準量(2kg)の滅菌量の場合

エコドライブプラス機能／22ℓの大容量チャンバー
ファストサイクル機能／EN規格適合などが特徴。



詳しい説明

歯科用器具 洗浄／消毒システム

ミーレ ジェットウォッシャー



タービン・コントラ内部の
洗浄／乾燥 (PWD8692)

熱風乾燥
機能付

PWD8692のみ

パワフル・
大容量・高効率



【46801210(50Hz)/46801211(60Hz)】PWD8692

【46801200(50Hz)/46801201(60Hz)】PWD8682

500ℓ/分の循環水量による強力な洗浄力！

歯科用器具をまとめて洗えて、本来の業務に専念できます。『洗浄
力×大容量』を保証する最適設計、効率的で強力な乾燥機能により、
洗浄後の拭上げ作業などを行わず、滅菌工程を行うことが可能に。

洗浄力／ハンドピース内部の洗浄・乾燥機能
充実の標準装備／ISO規格適合などが特徴。



詳しい説明



ヒートシーラー

ヒートシーラー Seal2



壁掛け



ISO基準適合。幅広
しっかり12mmシール

【07801100】ヒートシーラー Seal2

クラスBオートクレーブの使用に適しており、
分かりやすく、かんたん設計。*滅菌パックは含まれておりません




詳しい説明



タービンコントラの自動洗浄／注油システム

アシスティーナ TWIN

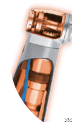

注油
わずか
10秒

※1本10秒



注油が自動で
かんたん


【00660831】アシスティーナTWIN (RMクイックアダプター)
(ISOクイックアダプター付)

オイル噴霧システムで、ハンドピースの注油と
メンテナンス時間を10秒に短縮、経済的にもお得。



詳しい説明

< 関連商品 > W&H滅菌ロール

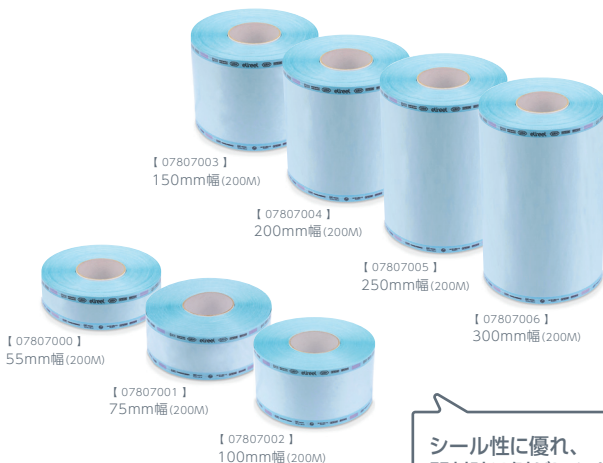

シール性に優れ、
開封時は剥がしやすい

洗浄・消毒から滅菌へ

理想的な感染予防サイクル



ワークフローを効率化し、衛生的にハンドリング

収納・滅菌用トレーシステム

LMセルボマックス トレーシステム

手用インスツルメント用

専用クリップでLMセルボマックストレーに取付可能。
インスツルメントをしっかりとロック、
隅々まできれいに清掃可能。



8本用セット例

【00233205】5本用

LM インスツルメント カセット 5本用／8本用

【00233208】8本用

アクセサリー用

スタンダードケース

【00233193】

ウルトラソニック チップケース

【00233197】



6ヶ収容可能



レストレーション/
エンドファイルケース
【00233194】



パー8ヶ、ファイル
14ヶ収納可能

パー/
エンドファイルケース
【00233196】



パーツを組み合わせて
トレーをカスタマイズ

歯周治療、予防歯科
治療のセット例

歯周治療


抜 歯

歯内療法

予防歯科

修復治療

トレースセット ユニバーサル トラッパー1セット

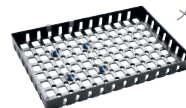

メタルクリップ2ヶ付
【00233190】

メタルクリップ2ヶ入



【00233191】

ユニバーサル
トラッパー2ヶ入
【00233192】



LM セルボ コードボタン
20個入り

シリコン製、20ヶ入。
カセットの識別が容易に

LMセルボマックス トレーシステムは、診療・メンテナンス時に
インスツルメントやアクセサリー類を衛生的に効率良く管理します。

様々な用途に応じた、柔軟で
フレキシブルな組み合わせを



詳しい説明

ディスポーザブルシリンジチップ

リスコントロールNV



白色、長さ55mm

エア
水

指先で簡単に
曲げられる

【09400301】滅菌済 96本入
【09400300】未滅菌 250本入

※アダプター各種、お取り扱いございます。
詳しくはお問い合わせください。

ユニットのエアや水回路内の細菌による感染を予防するために
生まれた、患者さん毎の使い捨てシリンジチップです。

エアと水が混じらない

エアに湿気が混じることがなく、完全に乾燥した表面が必要な接着処理や、
その他の臨床にも便利です。滅菌/未滅菌の2種類があります。従来の金属製
シリンジチップに要求された清掃や消毒などの面倒な手間から解放されます。


各種アダプターを介して
かんたんに装着できます



詳しい説明



バキューム、インスツルメント洗浄剤 シトリザイム

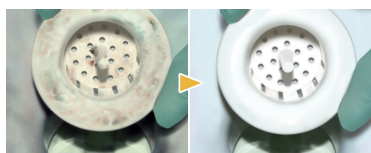

環境に優しい
泡立たず毒性なし

2種類の酵素と界面活性剤で汚れをシャットアウト!

“pH7.7”と ほぼ中性で環境に優しい洗浄剤
さわやかなオレンジの香りで泡立たず、毒性がないので安心

2種の酵素でタンパク質やでんぷん質を分解。
強力な界面活性剤により残渣が素速く、簡単に
洗い流されます。

2種の酵素で汚れを徹底分解!
素早く洗浄、簡単キレイ。



詳しい説明

【00242301】シトリザイム(50小袋)



カールツァイスの光学技術と品質を兼ね備えた双眼ルーペ

双眼ルーペ

EyeMag Smart - アイマグスマート - / EyeMag PRO - アイマグプロ -

EyeMag Smartは、カールツァイスの光学技術と品質を兼ね備えたフリップアップルーペです。

高い品質の視野および解像力をご体感ください。

EyeMag PROは、より高倍率な視野が必要な方向けで、心臓部である光学システムは

一切の妥協を許さないカールツァイス双眼ルーペのトップエンドモデルです。



眼鏡タイプ



Fタイプ



Sタイプ

軽量でコンパクト
ガリレオ式

- 倍 率 2.5
- 目からの作業距離 300mm~550mm

フリップ
アップ式

像質を低下させず拡大率UP
ケプラー式

- 倍 率 3.2~5.0
- 目からの作業距離 300mm~550mm

コンパクトで
使い易い設計

LED照明システム<EyeMagシリーズ 対応オプション>

EyeMag Light II - アイマグライト II -

EyeMag Smart 2.5x 各種
EyeMag PRO Fタイプ各種
EyeMag PRO Sタイプ各種
EyeMag Light II

明るく均一な輝度と
パワフルなバッテリー



倍率と作業距離

Measure
your
working
distance

倍率、視野、疲労度などからあなたの目から対象物までの作業距離を決定してください。

目から対象物までの距離は人により異なり、倍率が高くなれば視野が狭くなるため、

お好みの組み合わせを選択してください。



2.5x



3.2x



4x



4.5x



5x

photo : Klaus Ernst, Stuttgart, Germany



詳しい説明

歯科用表面麻酔剤

ジンジカインゲル20%



比較的、苦みが少なく
甘いバナナの香り

アミノ安息香酸エチル製剤で、すみやかに適度な持続時間のある

麻酔作用を現します。

- ☺ 注射針刺入点の麻酔に
- ☺ スケーリング、盲嚢搔爬時の麻酔に
- ☺ 交換期乳歯のような高度の動揺歯抜歯時の麻酔に
- ☺ 口内法X線撮影、口腔印象採得時に
- ☺ その他創傷部などの除痛、etc...

針刺入時の疼痛軽減に



詳しい説明

【00240500】 1瓶(30g入)



エアースプレーでミラー曇りのストレスを軽減！

※それぞれのミラーには専用キャップが附属しております（M6 ルミには付属していません）

M3 ブリーズ - エアフローミラー -

モトランサーミラーM3 5色セット
【17401100】

モトランサーミラー M3ブリーズ

- 【17401115】 ● 【17401130】
- 【17401120】 ● 【17401135】
- 【17401125】



M1 ブライト - LEDデンタルミラー -

モトランサーミラー M1 プライットセット
(ミラー3本+ライトモジュール1本)

モトランサーミラー M1 プライット
(ライトモジュール無し)

モトランサーミラー M1ライトソースモジュール
【17400130】



M7 エバ - サクションミラー -




モトランサーミラーM7エバ 5色
+サクショントラップセット

【17404000】

モトランサーミラー M7エバ

- 【17404010】 ● 【17404025】
- 【17404015】 ● 【17404030】
- 【17404020】

M2 レインボウ - エンドゲージ付き -

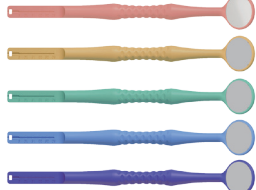


モトランサーミラー
M2レインボウ φ20mm

- 【17400250】 ● 【17400265】
- 【17400255】 ● 【17400270】
- 【17400260】

● (3倍率のみ)

モトランサーミラー
M2レインボウ 3倍率φ23mm
【17400515】

モトランサーミラー
M2レインボウ 3倍率 10本入
【17400516】

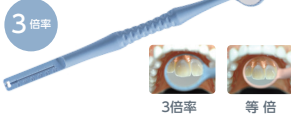

Euronda
Monoart
ユーロンダ モノアート

100%Eurondaのイタリア工場に製造

バキュームチップ

吸引流量が多くエアロゾルの拡散防止に

2種類の長さで5色から選べます。

- EM19 ● 【17500101】 ● 【17500103】 ● 【17500105】
- 【17500102】 ● 【17500104】
- EM21 ● 【17500201】 ● 【17500203】 ● 【17500205】
- 【17500202】 ● 【17500204】

フレックスアスピレーターチップ



形状を変えて
狭い領域にアクセス

M45タイプ 長さ18cm (先端部を含む)

◆ 【17500301】 EM45 ブルー20本+2アダプター

サリバエジェクター



自由に曲げることができる透明PVC素材の
ディスプレイタイプ

長さ15cm 接続部径6.5mm 同色100本

- ◆ 【17500001】 ◆ 【17500003】 ◆ 【17500005】
- ◆ 【17500002】 ◆ 【17500004】

Towel Up! 防水加工紙エプロン



片面に防水フィルムが
接着なしでコーティング

45cm x 33cm 同色50枚

- ◆ 【17500601】 ◆ 【17500604】
- ◆ 【17500602】 ◆ 【17500605】
- ◆ 【17500603】

カラフルに、快適に。選べる楽しさ
ユーロンダ モノアート



詳しい説明

PG30aprons 防水加工紙エプロン



肩まで覆われる全上半身を
カバーする大型タイプです

形状 81cm x 53cm 同色60シート (ロール形状)

- ◆ 【17500701】 ◆ 【17500704】
- ◆ 【17500702】 ◆ 【17500705】
- ◆ 【17500703】

白水貿易主催セミナー開催中!

歯科医師・歯科衛生士・歯科技工士向けのセミナー、ウェビナーを
白水貿易株式会社のホームページにて公開中です!



素敵な発見があるかも!

白水貿易株式会社 キャンペーン

● メールマガジン ●



白水メールマガジン
登録フォームはこちらから



動画コンテンツも配信中!

新製品の情報は
メルマガで!



白水貿易株式会社の
ホームページはこちら

一般医療機器 医療機器届出番号 ウルトラライトキュレット 27B1X00020220025 / ウルトラライトポケットスケーラー27B1X00020220073 / ウルトラライトスケーラー27B1X00020220026 / エキスプローラー27B1X00020220006 / プレミア ブロー27B1X00020221008

管理医療機器 医療機器認証番号 ニュートロンP5 ライト無し 305ALBZX00021000 / ニュートロンP5 ライト付き 305ALBZX00022000

管理医療機器 医療機器認証番号 スプラゾンP-MAX2 224ALBZX00039000 / 管理医療機器 医療機器認証番号 16300BZZ02398000

管理医療機器 医療機器認証番号 スプラゾン P5 ニュートロン 222AGBZX00128000 / スプラゾン P5 ニュートロン LED 222AGBZX00129000

一般医療機器 医療機器届出番号 LM グレーシーキュレット 27B1X00020221062 / LM ミラー 27B1X00020221036 / LM エキスプローラー 27B1X00020220001

一般医療機器 医療機器届出番号 LM ペリオプローブ 27B1X00020221009 / LM スケーラー27B1X00020221057 / LM ユニバーサルキュレット 27B1X00020221061

一般医療機器 医療機器届出番号 LM エキスカベータ 27B1X00020221035 / LM ファークーター 27B1X00020221054 /

一般医療機器 医療機器届出番号 LM シャープダイヤモンド グレーシーキュレット 27B1X00020228039 / LM シャープダイヤモンド シックルスケーラー 27B1X00020228040

一般医療機器 医療機器届出番号 LM シャープダイヤモンド ユニバーサルキュレット 27B1X00020228041 /

管理医療機器 医療機器認証番号 プロキシオ プロフィーコントラ WP-66W 302ALBZX00005000

一般医療機器 医療機器届出番号 プロキシオ プロフィーブラシ (ショートラッチ) 27B1X00020301002 / プロキシオ プロフィーラバーカップ (ショートラッチ) 27B1X00020301001

管理医療機器 製造販売届出番号 グリッター 27B1X00020220081 / 管理医療機器 医療機器認証番号 エア N ゴー 224ALBZX00036000 /

一般医療機器 医療機器届出番号 エア N ゴー パウダー クラシック 27B1X00020224008

管理医療機器 医療機器認証番号 エンブレイス シーラント 222AGBZX00253000 / 医薬部外品承認番号 スタンガード 20700DZY00068000 / 医薬部外品承認番号 ニュートラガード 21300DZY00095000

管理医療機器 医療機器認証番号 クラスBオートクレープ リサ 228ALBZX00008000

一般医療機器 製造販売届出番号 ミーレジェットウォッシャーPWD8692 13B2X10362000022 / ミーレジェットウォッシャーPWD8682 13B2X10362000020

一般医療機器 製造販売届出番号 双眼ルーペ EyeMagSmart 13B1X00119005080 / 双眼ルーペ EyeMagPRO 13B1X00119005090 / LED 照明システム EyeMag Light II 13B1X00119004080

高度医療機器 医療機器承認番号 ジンジカインゲル 21200AMY00254000

一般医療機器 医療機器届出番号 モトランサー ミラー 27B1X00020306008

一般医療機器 医療機器届出番号 フレックスアスピレーターチップ Monoar 27B1X00020306010 / ユーロンダバキュームチップ Monoar 27B1X00020306009

※記載内容は 2025 年 12 月現在のものです。尚、記載価格はすべて税別です



札 幌 | 札幌市中央区北4条西20-2-1 Nord 420BLD1階 (011)616-5814
関東北 | さ い た ま 市 南 区 南 浦 和 3 - 3 4 - 2 (048)884-3951
東 京 | 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クロス12階 (03)5217-4618
名古屋 | 名古屋市千種区内山3-10-17 今池セントラルビル2階 (052)733-1877
本 社 | 大阪府大阪市淀川区新高1-1-15 (06)6396-4400
広 島 | 広島市南区西蟹屋3-2-1 日通ビル1階 (082)207-2870
福 岡 | 福岡市博多区博多駅東2-18-30 八重洲博多ビル5階 (092)432-4618
白水貿易株式会社 <https://www.hakusui-trading.co.jp/> 2025.12.P1,000 A11 Ver.4.6.1