

LM

feel the
difference

 HAKUSUI

LMインスツルメント総合カタログ



New!

P37

新発売！LMマイクロサージカルインスツルメント



QRコードを読み取ると
動画をご覧いただけます！

目次

3 LM-Instruments Oy

LM インストルメンツ社について、金属工学、ハンドルの種類



11 診査 DIAGNOSTICS

ミラーハンドル、エキスポローラー、ペリオプローブ、ファークーションプローブ



17 歯周治療 PERIODONTICS

シックルスケラー、ユニバーサルキュレット、
スペシャルインストルメント (シンテット)、ファークーションインストルメント、
ホースケラー、グレーシーキュレット、シャープダイヤモンド、
エルゴミックス (インプラント用)



37 歯周外科 SURGERY

マイクロサージカルインストルメント、外科用メスハンドル



41 修復 RESTORATION

エキスカベーター、ジンジバルマージン トリマー、スパチュラ、コードパッカー、
ベースキャリア、プラガー (CR 用)、バーニッシャー、アルテ、
ダークダイヤモンド、コンポジット用、カーバー、エクセススケラー、
フィリングリムーバー、クラウンオフ、マルチホルダー



55 歯内療法 ENDODONTICS

エキスポローラー、エキスカベーター、エンドスプレッダー、プラガー



57 外科 EXTRACTION

ツイストアウト、リフトアウト、専用カセット、スリムリフト、
残根除去用インストルメント




61 メンテナンス MAINTENANCE

トレーシステム、コードボタン、コードリング、シャープナー、メンテナンス



66 索引

from FINLAND

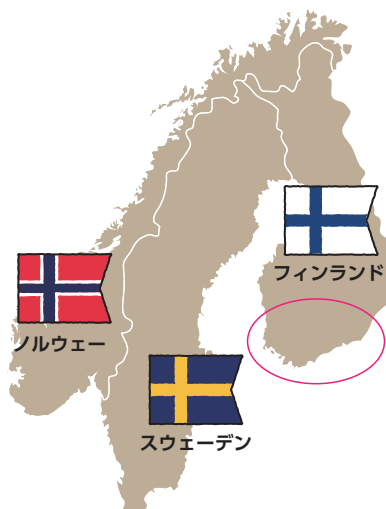

北欧生まれの インスツルメント

フィンランドはスウェーデン、ノルウェー、ロシアと国境を接する北欧の国です。首都ヘルシンキは、バルト海の半島と周辺の島々からなっています。同市にはまた、18世紀の要塞スオメンリンナ、ファッショナブルなデザイン地区、数多くの博物館や美術館があります。北極圏のラップランドは広大な国立公園やスキーリゾートを擁する大自然で知られ、オーロラを見ることが出来ます。LM インスツルメンツ社はフィンランド第2の都市、トゥルク近郊の町で製品の開発・生産を行っています。



YACHT

ヨット



SANTA CLAUS

サンタクロース



HELSINKI CATHEDRAL

ヘルシンキ大聖堂




AURORA

オーロラ



SAUNA

サウナ

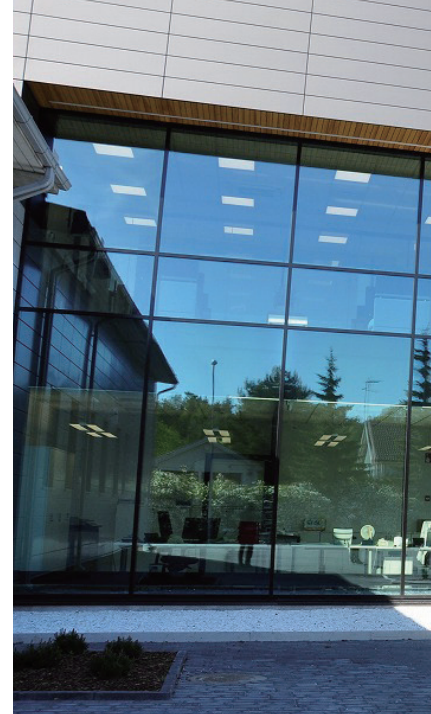

Your skills are wo



Managing Director
Mr. Timo Helenius

LM インストルメンツ社は歯科用インストルメント製造のプロとして常に完成度の高い製品を世に送り出すことを目指し、ユーザーの皆さんに最良のツールをお届けするために製品の開発・生産を行っています。満足できる治療結果へと繋がる品質の高いインストルメントを供給するのが我々の使命だと考えています。

LM インストルメンツ社は最先端技術と熟練工による仕上げ技術を融合し、ユーザーのニーズに合った製品を生み出しています。





LM

feel the
difference

Birth LM



LM インスツルメンツ社は歯科医療に従事する専門家のニーズに呼応するインスツルメントを開発し生産しています。エンドユーザーとのコミュニケーションを大切にしその声を最新のインスツルメント開発に反映させるよう努めています。LM インスツルメンツ社は 1988 年にシリコン製ハンドルのインスツルメントを他社に先駆けて売り出しました。

我々は会社設立当初から“人間工学”を常に念頭に置いて商品開発を行ってきました。

1980 年代に市場に導入した人間工学に基づいた太いハンドル、弾力性のあるハンドル表面、軽量化、カラーコード化等の技術革新はユーザーに広く浸透し、21 世紀の今日では業界の標準的なモデルとなっています。

手に馴染み、滑りにくいインスツルメントのグリップはその使い勝手の良さと効率性が全世界に認められています。インスツルメントの使用者のみならず治療を受けた患者さんもその違いに気付くことでしょう。

LM インスツルメンツ社の製品は全て北欧で生産されています。最先端技術を結集したハイテクインスツルメントの最終仕上げは熟練工の手によって施され、高品質で高機能なインスツルメントを完成させます。




LM-DuraGradeMAX – supersteel

耐摩耗性を追及した金属工学

ブレード金属の耐摩耗性の高さは歯科用インスツルメントに必要な重要な要素の一つです。ブレードが摩耗していないシャープなインスツルメントは効率が良く、安心して使うことができます。

最新の金属工学に基づいた材料研究の結果生み出された LM-DuraGradeMAX スチールは LM インスツルメンツ社の全インスツルメントに使用されています。

2つのスチールは耐摩耗性が高く、少ないシャープニングストロークで十分なエッジが得られます。再生率が高く、シャープニング後は購入した時と同じ表面性状が得られます。

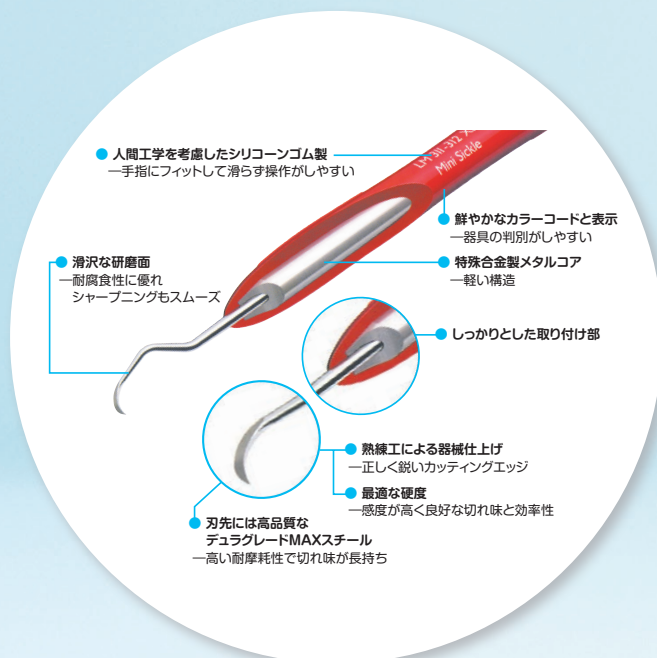

The pioneer in ergonomics

人間工学を考えたハンドル

人間工学的な形態のハンドインスツルメントに必要な条件とは何でしょうか？

まず第 1 に、滑りにくく自然に把持できる形でなければなりません。

第 2 に、軽量で職業病を効果的に予防する形状でなければなりません。

第 3 に、触覚感度や操作性の良さがが必要です。術者にとっても患者さんにとっても信頼性、耐摩耗性、快適性が重要な要素であるといえます。LM インスツルメンツ社の創立者の一人である Pekka Kangasniemi 医学博士は 1980 年代にいち早くこの重要な要素を充たす人間工学的な形状に着目しインスツルメントを開発しました。



ハンドルの選択

人間工学的なインスツルメントを選択することによって歯科医療に従事する際の快適性に大きな違いが生じます。

一年間に約 2000 時間もの間使用するハンドインスツルメントに最も重要なのはインスツルメントのデザイン、重さ、感触です。

LM インスツルメンツ社のハンドインスツルメントはハンドルの種類を選択することができます。各ハンドルの形態は人間工学に基づいて開発され、弾性シリコンでコーティングされています。術者の手にフィットし、症例に応じて適切なハンドルを選択することで手指への負担を軽減できます。

新しいカラー

ハンドルの色が明るくなり、インスツルメントの種類やコードの印字が見やすくなり、診療やメンテナンス中のインスツルメントの識別がより容易になりました。

ハンドルの種類



エルゴノーム

細いハンドルで、比較的に力が必要としない処置に適しています。



エルゴマックス

永年にわたり、多くの方に親しまれている人間工学的なハンドルデザインです。握りやすく操作性に優れています。



エルゴセンス

太いハンドルの LM エルゴセンスは人間工学に基づいた設計で効率良く処置を行うことができます。

ハンドルコードと直径

LMエルゴノーム

Si = ErgoNorm handle
(Ø 8.5 mm)

LMエルゴマックス

XSi = ErgoMax handle
(Ø 11.5 mm)

LMエルゴセンス

ES = ErgoSense handle
(Ø 13.7 mm)

特殊ハンドル



エルゴミックス

チップの付け替えが可能なので無駄が無く経済的です。利用可能なインスツルメントの種類は 36 ページを参照してください。

LMエルゴミックス

EM = ErgoMix handle
(Ø 12.5 mm)



エルゴシングル

患部にアクセスしやすい均整の取れたフォルムのミラーハンドルです。

LMエルゴシングル


ESi = ErgoSingle handle
(Ø 11.5 mm)

人間工学を 50 年間追求し続けた LM シリコンハンドルの把持力の推移

腱鞘炎や手根管症候群、ドケルバン病など、
歯科衛生士や歯科医療従事者には、手を痛めるリスクが常に付いて回ります。

LM 社のインスツルメントは、滑りにくく自然に把持しやすいだけでなく、
触覚感度や操作性の良さを追求し、職業病を効果的に予防する形状をしております。

軽い把持力で最大限のパフォーマンスを発揮できる
LM インスツルメントを、私たちは自信を持ってお勧めいたします。

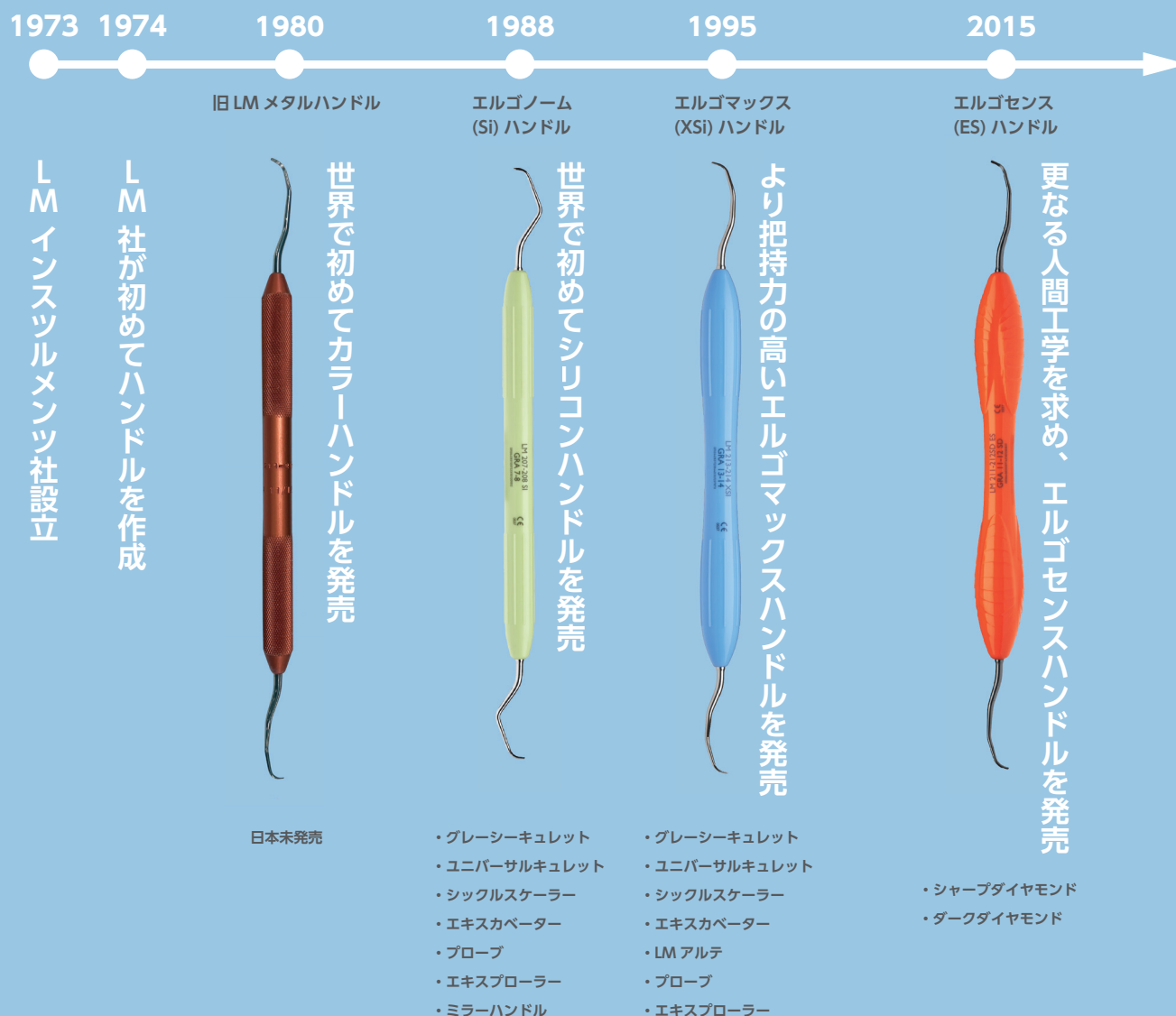

LM インスツルメント

手の健康を守り、診療の質を高めるパートナー

日々の診療で、先生方はどれほどの負担を手や手首に感じているのでしょうか？
長時間の処置で繰り返される動作は、知らず知らずのうちに手指に蓄積され、
やがては疲労や健康リスクにつながります。

LM インスツルメントは、その課題を解決するために生まれました。

単なる「安価な道具」ではなく、
先生方の健康と生産性を守るための長期的な投資として、
その価値を実感していただけます。

人間工学に基づいた独自のハンドル

LM インスツルメントのハンドルは、食品・薬品業界の厳しい要求をクリアした
HTV 特殊シリコンゴムで金属の芯をコーティングしています。

この独自の設計が、先生方の握る力を最小限に抑え、手の負担を大幅に軽減します。

滑りにくいグリップ・・・最小限の力で正確な操作を可能にし、長時間の処置でも
手のブレを抑え、診療の安定性を向上させます。

負 荷 の 軽 減・・・弾力のある滑らかな表面は、指の損傷やタコを防ぎ、関節部への負担を軽減します。

長期的な健康維持・・・累積ストレスを避け、腱鞘炎などの職業病リスクを低減することで、
5年後、10年後も安定した診療を続けるための先生方の手を守ります。

確かな品質を支えるブレード技術

ハンドルだけでなく、ブレードの性能もまた、治療の質を左右する重要な要素です。

LM インスツルメントは、厳格なテストをクリアした硬化処理済ステンレス鋼材のみを使用しています。

高 い 耐 摩 耗 性・・・クロムやタングステン、バナジウムといった合金成分が形成する
硬いカーバイド粒子により、鋭い切れ味が長持ちします。

優 れ た 耐 食 性・・・LM 社独自の熱処理とロスのない研磨工程によって、
洗浄・滅菌プロセスでも腐食しにくい優れた耐食性を実現しています。


安心のアレルギーフリー・・・医療従事者と患者様の金属アレルギーを考慮し、
ニッケルを一切含まない鋼材を採用しています。

LM インスツルメントは、「優れた使い心地」と「確かな品質」によって、
先生方のプロフェッショナルな治療を、根底から支えます。
この違いは、実際に手に取った瞬間に感じていただけます。

DIAGNOSTICS

- ミラーハンドル
- エクスプローラー
- ペリオプローブ
- ファークেশヨンプローブ

診
査

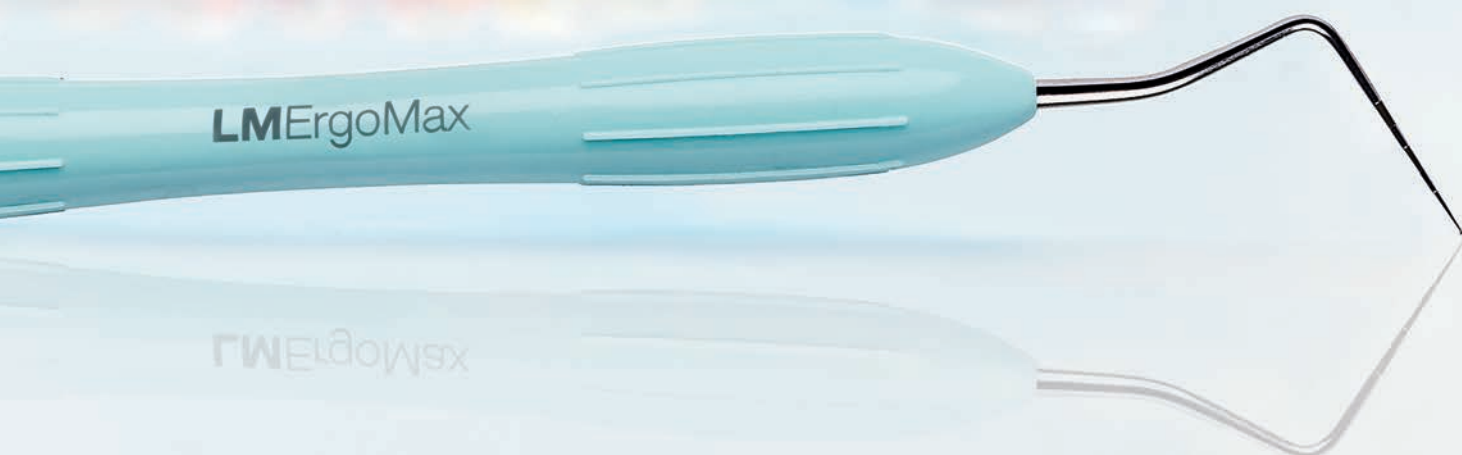

ミラーハンドル、エクスプローラー

医療機器届出番号 27B1X00020221036 一般医療機器
医療機器届出番号 27B1X00020220001 一般医療機器

ミラーハンドル

LM25ミラーハンドルのネジ山は国際水準のM2.5に準拠しています。
装着可能なミラーシャフトの直径は2.5mmです。ミラーは別売です。



LMエルゴシングル ミラーハンドル

ESi エルゴシングル

- バランスのとれたデザインで治療部位へのアクセスが容易
- 色:グレー、レッド、ブルー

種類	カラー / 商品コード	標準価格 (1 本)
25 ESi	グレー / 00233108 レッド / 00233109 ブルー / 00233110	¥3,000



※ミラー別売

LMミラーハンドル

Si エルゴノーム

XSi エルゴマックス

- 片頭タイプ
- 色:グレー、レッド、ブルー

種類	カラー / 商品コード	標準価格 (1 本)
25 Si	グレー / 00233101 レッド / 00233103 ブルー / 00233105	¥1,600
25 XSi	グレー / 00233102 レッド / 00233104 ブルー / 00233106	¥1,800



※ミラー別売

LMミラーハンドルJM

XSi エルゴマックス

- インプラント治療に使用
- 色:レッド

種類	カラー / 商品コード	標準価格 (1 本)
25-473 XSi	レッド / 00233107	¥3,800



※写真はイメージです

プリマミラー サイズ4

- 12ヶ入

種類	商品コード	標準価格 (1 箱)
プリマミラーサイズ4 12個入り	00233121	¥4,000

エクスプローラー

歯石、齲蝕の診断や歯周ポケット、修復物、根分岐部の診査に使用します。

LMエクスプローラーやLMペリオプローブには片頭タイプもあります。



LMエクスプローラー 5-8

Si エルゴノーム

XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
5-8 Si	00231021	¥2,600
5-8 XSi	00231022	¥3,000



LMエクスプローラー 5-9

Si エルゴノーム

XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
5-9 Si	00231023	¥2,600
5-9 XSi	00231024	¥3,000

エキスポローラー

医療機器届出番号 27B1X00020220001 一般医療機器




LMエキスポローラー センタード 9-17C

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- 長い第一シャンクとバックアクションブレード
- 臼歯遠心面のプロービングに使用
- 刃先が中心軸にある (17C)

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
9-17C Si	00231017	¥2,600
9-17C XSi	00231018	¥3,000

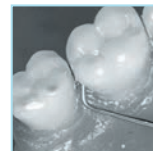

LMエキスポローラー 17-23

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- 遠心面に使用(17)
- う蝕探知に用いる(23)

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
17-23 Si	00231033	¥2,600
17-23 XSi	00231034	¥3,000



LMエキスポローラー センタード 17C-23

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- 刃先が中心軸にある(17C)

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
17C-23 Si	00231035	¥2,600
17C-23 XSi	00231036	¥3,000



遠心面用のプローブ



LMエキスポローラー 3-6

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- 一般的な探知に用いる

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
3-6 Si	00231019	¥2,600
3-6 XSi	00231020	¥3,000



LMエキスポローラー 11-12

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- シャンクの角度は LM グレーシーキュレット 11-12 と同じ

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
11-12 Si	00231029	¥2,600
11-12 XSi	00231030	¥3,000



歯肉縁下で根面の審査に使用



LMフレックスプローラー 11F-12F

XSi エルゴマックス

- LM エキスポローラー 11-12 よりシャンクが長く、より繊細なエキスポローラー
- 歯肉縁下歯石や深い歯周ポケットの診査に最適

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
11F-12F XSi	00231043	¥3,200



QR コードを読み取って動画を check!

臨床例

エキスプローラー、ペリオプローブ

医療機器届出番号 27B1X00020220001 一般医療機器
医療機器届出番号 27B1X00020221009 一般医療機器



LMエキスプローラー プロセテック 18-19

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- 補綴クラウン、ブリッジ、インレー / オンレー補綴物用
- マージン部の感知力に優れています



種類	商品コード	標準価格 (1 本)
18-19 Si	00231037	¥2,600
18-19 XSi	00231038	¥3,000



LMエキスプローラー ホルスト 29

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- 片頭

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
29 Si	00231039	¥2,400
29 XSi	00231040	¥2,800



LMエキスプローラー 9

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス



- 片頭

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
9 Si	00231027	¥2,400
9 XSi	00231028	¥2,800

ペリオプローブ

う蝕用探針と歯周プローブを組み合わせたインスツルメントです。

ほとんどのLMエキスプローラーやLMペリオプローブには片頭タイプもあります。

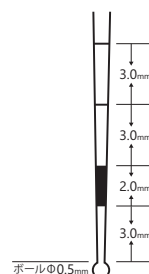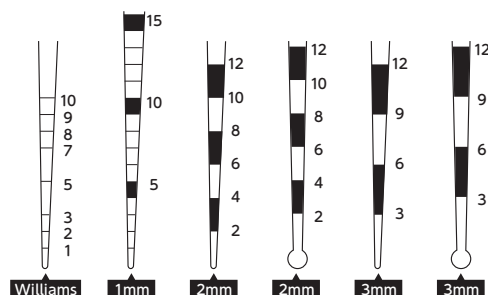

ペリオプローブWHOは
0.5-3-2-3-3です

ペリオプローブ WHO [CPI プローブ]

用途

1. CPI (指数地域歯周疾患指数) による歯周疾患指数検査に用いる
2. 「初期根面う蝕の診断」に用いる (視診・触診)

(参考資料: 2024.3: 日本歯科医学会 初期根面う蝕の管理に関する基本的な考え方)




目盛: 2mm 毎

LMペリオプローブ 23-52B

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
23-52B Si	00231031	¥5,800
23-52B XSi	00231032	¥6,200

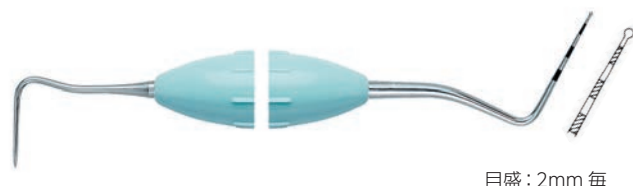

目盛：2mm 毎

LMペリオプローブ 8-520B

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- ボール ø 0.5 mm

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
8-520B Si	00231055	¥5,800
8-520B XSi	00231056	¥6,200



目盛：2mm 毎

LMペリオプローブ 23-520B

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- ボール ø 0.5 mm

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
23-520B Si	00231051	¥5,800
23-520B XSi	00231052	¥6,200



目盛：3mm 毎

LMペリオプローブ 23-530B

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- ボール ø 0.5 mm

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
23-530B Si	00231053	¥5,800
23-530B XSi	00231054	¥6,200



目盛：1-2-3-5-7-8-9-10

LMペリオプローブ ウィリアム 51

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- 片頭

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
51 Si	00231065	¥4,800
51 XSi	00231066	¥5,200



目盛：3-2-3-3

LMペリオプローブ WHO 8-550B

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- ボール ø 0.5 mm

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
8-550B Si	00231061	¥5,800
8-550B XSi	00231062	¥6,200




目盛：3-2-3-3

LMペリオプローブ WHO 23-550B

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- ボール ø 0.5 mm

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
23-550B Si	00231059	¥5,800
23-550B XSi	00231060	¥6,200

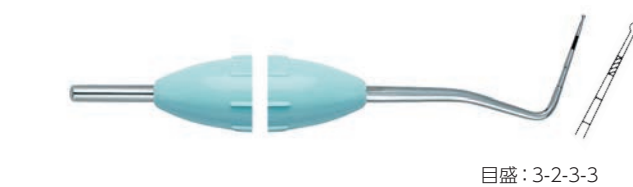

目盛：3-2-3-3

LMペリオプローブ WHO 550B

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- 片頭、ボール ø 0.5 mm

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
550B Si	00231057	¥5,400
550B XSi	00231058	¥5,800

ペリオプローブ・ファークーションプローブ

医療機器届出番号 27B1X00020223045 一般医療機器
医療機器届出番号 27B1X00020221009 一般医療機器



LMノースカロライナ プローブ 54B

XSi エルゴマックス

- 片頭

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
54B XSi	00231068	¥5,200



LMプローブ 52B

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- 片頭

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
52B Si	00231071	¥4,800
52B XSi	00231070	¥5,200



LMマーキス12 プローブ 53B


XSi エルゴマックス

- 片頭

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
53B XSi	00231075	¥5,200

ファークーションプローブ

根分岐部病変の確認に使用します。

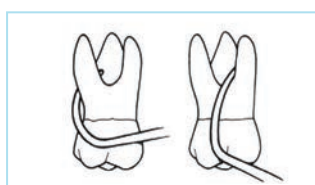


根分岐部の水平的な歯周組織の破壊状況を診査します。
上顎、下顎両方に使用できます。



LMネイバースプローブ 20-21

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス


種類	商品コード	標準価格 (1 本)
20-21 Si	00231041	¥5,800
20-21 XSi	00231042	¥6,200

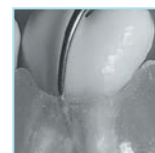

LMペリオプローブ ファークーション

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
20B-21B Si	00231063	¥5,800
20B-21B XSi	00231064	¥6,200

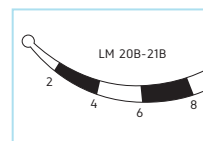

PERIODONTICS

- シックルスケーラー
- ユニバーサルキュレット
- スペシャルインスツルメント
(シンテット)
- ファーケーションインスツルメント
- ホースケーラー
- グレーシーキュレット
- シャープダイヤモンド
- エルゴミックス(インプラント用)



シックルスケーラー

医療機器届出番号 27B1X00020221057 一般医療機器

シックルスケーラー

歯肉縁上歯石の除去に使用します。

インストルメンテーション：

カッティングエッジの先端三分の一を歯にあてて歯石を除去します。インストルメントを歯の方に傾けて歯に対してブレードを 70°から 80°の角度であてます。側圧を加えながらスケーラーを垂直、水平、斜め方向に引くように動かします。2 ～ 3mm の短いストロークで使用します。

形態：


- ・断面が三角形
- ・フェイスが第一シャンクに対して直角
- ・両サイドにカッティングエッジ(赤線部分)
- ・尖った刃先



QRコードを読み取って動画を check!



シアーブニング

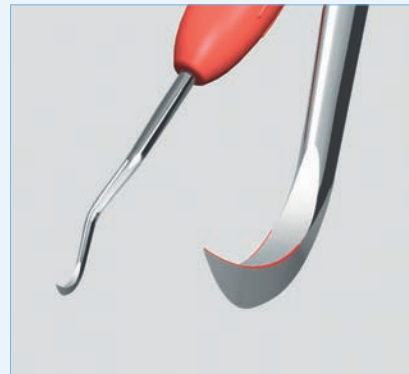

LMシックルスケーラー ミクロ

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- 刃部が非常に細くコンパクトでタイトな歯間空隙にも最適
- 前歯叢生部にも有効



種類	商品コード	標準価格(1本)
301-302 Si	00231601	¥6,600
301-302 XSi	00231602	¥7,000



QRコードを読み取って動画を check!



臨床例



LMシックルスケーラー LM204S

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- 鋭角なシャンク、非常に細い刃部
- 臼歯部にも有効

種類	商品コード	標準価格(1本)
303-304 Si	00231593	¥6,600
303-304 XSi	00231594	¥7,000



LMシックルスケーラー ミニ

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- 全歯面、特に隣接面に使用

種類	商品コード	標準価格(1本)
311-312 Si	00231603	¥6,600
311-312 XSi	00231604	¥7,000



QRコードを読み取って動画を check!



シアーブニング



臨床例



LMシックルスケーラー LM23

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- LMシックルスケーラー ミニよりもブレードが短く、第一シャンクが長い
- 前・臼歯部に有効

種類	商品コード	標準価格(1本)
313-314 Si	00231605	¥6,600
313-314 XSi	00231606	¥7,000

シッフルスケーラー

医療機器届出番号 27B1X00020221057 一般医療機器


LMシッフルスケーラー
カプラン

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- 強く硬く、鋭い角度が付いたブレード
- 強固な歯肉縁上歯石を除去する際に使用

種類	商品コード	標準価格 (1本)
322-323 Si	00231607	¥6,600
322-323 XSi	00231608	¥7,000


LMシッフルスケーラー
ミニカプラン

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- ブレードの角度はカプランと同じだが、
- カプランより細い

種類	商品コード	標準価格 (1本)
333-334 Si	00231609	¥6,600
333-334 XSi	00231610	¥7,000


LMハイジニストスケーラー
#H4-H5

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- 90° のフェイス
- チゼルタイプの刃部は押す動作で使用
- シッフルタイプの刃部は引く動作で使用

種類	商品コード	標準価格 (1本)
144-145 Si	00231613	¥6,600
144-145 XSi	00231614	¥7,000


LMハイジニストスケーラー
#H6-H7

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- 前歯から小臼歯用
- 隣接歯間部に最適

種類	商品コード	標準価格 (1本)
146-147 Si	00231011	¥6,600
146-147 XSi	00231012	¥7,000



QRコードを読み取って動画を check!



臨床例



LMラップランダー

XSi エルゴマックス

- LM スケーラー H6-H7 に似ているが側方に彎曲
- 臼歯部や隣接面にアクセスしやすい

種類	商品コード	標準価格 (1本)
148-149 XSi	00231010	¥7,000



LMネブラスカ

XSi エルゴマックス

- 前歯用
- ブレードが細く歯間部にも最適

種類	商品コード	標準価格 (1本)
128-128 XSi	00231625	¥7,000

ユニバーサルキュレット

医療機器届出番号 27B1X00020221061 一般医療機器

ユニバーサルキュレット

全ての歯肉縁下と歯肉縁上の中程度の歯石から強固な歯石まで除去。

インスツルメンテーション：

ユニバーサルキュレットのカットティングエッジの片方を歯面にあてて歯石を除去します。
インスツルメントを歯の方に傾けて歯に対してブレードを 70°から 80°の角度であてます。
側圧を加えながらキュレットを垂直、水平、斜め方向に引くように動かします。
インスツルメントを少し傾けるだけで両サイドのカットティングエッジを使用できます。

形態：


- ・刃部が第一シャンクに対して直角
- ・両サイドにカットティングエッジ(赤線部分)
- ・丸い刃先
- ・シャンクが太い



QRコードを読み取って動画を *check!*



シャープニング

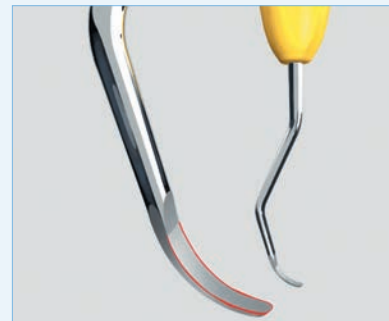

LMマッコール #13S-14S

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- 頑強なブレードと太いシャンク
- 主に前歯と小臼歯に使用

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
222-223 Si	00230812	¥6,600
222-223 XSi	00230811	¥7,000




LMミニマッコール #13S-14S

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- より細く少し丸みを帯びた刃先
(シックル型ではない)
- 深く狭窄な歯周ポケットに最適

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
222-223M Si	00230814	¥6,600
222-223M XSi	00230813	¥7,000

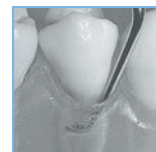

QRコードを読み取って動画を *check!*



臨床例



LMユニバーサルキュレット #15-16

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
225-226 Si	00230816	¥6,600
225-226 XSi	00230815	¥7,000



LMマッコール #17-18

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- 17-18
- 頑強で幅が均一な刃部
 - 全歯面に使用
 - 臼歯の広い歯面に最適

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
277-278 Si	00230818	¥6,600
277-278 XSi	00230817	¥7,000



LMマッコール #17S-18S

- 17S-18S
- 17-18 よりも細めのブレードと刃部
 - タイムな歯間空隙に最適

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
279-280 Si	00230820	¥6,600
279-280 XSi	00230819	¥7,000

ユニバーサルキュレット

医療機器届出番号 27B1X00020221061 一般医療機器

ランガーキュレット

ユニバーサルキュレットの刃部とグレーシーキュレットのシャンクを組み合わせたキュレットです。到達困難な部位にもアクセスでき、同じインスツルメントエンドで近心面と遠心面を処置できます。


LMランガーキュレット
#1-2

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス



- 下顎の臼歯用

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
281-282 Si	00230901	¥6,600
281-282 XSi	00230911	¥7,000

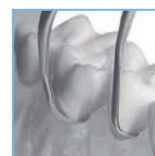
LMランガーキュレット
#3-4

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス



- 上顎の臼歯用

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
283-284 Si	00230903	¥6,600
283-284 XSi	00230913	¥7,000


LMランガーキュレット
#5-6

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス



- 上下顎の前歯用

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
285-286 Si	00230905	¥6,600
285-286 XSi	00230915	¥7,000



ミニランガーキュレット

スタンダードモデルよりもシャンクが長く刃部が短くなっており、タイトな歯間空隙に適しています。深い歯周ポケットや根分岐部へのアクセスが容易です。


LMランガーキュレットミニ #1-2

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス



- 下顎の小白歯、大臼歯用

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
281-282M Si	00230821	¥6,600
281-282M XSi	00230822	¥7,000

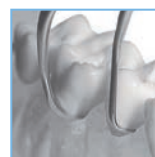
LMランガーキュレットミニ
#3-4

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス



- 上顎の小白歯、大臼歯用

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
283-284M Si	00230823	¥6,600
283-284M XSi	00230824	¥7,000


LMランガーキュレットミニ
#5-6

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス



- 上下顎の前歯用

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
285-286M Si	00230825	¥6,600
285-286M XSi	00230826	¥7,000



ユニバーサルキュレット

医療機器届出番号 27B1X00020221061 一般医療機器



LMゴールドマンフォックス #3

Si エルゴノーム

XSi エルゴマックス

- 臼歯の隣接面歯間部に用いる

種類	商品コード	標準価格(1本)
233-234 Si	00230532	¥6,600
233-234 XSi	00230533	¥7,000



LMコロンビア #2L-2R

Si エルゴノーム

XSi エルゴマックス

- 前歯、小臼歯用

種類	商品コード	標準価格(1本)
217-218 Si	00230516	¥6,600
217-218 XSi	00230517	¥7,000



QRコードを読み取って動画を *check!*



臨床例



LMコロンビア #4L-4R

Si エルゴノーム

XSi エルゴマックス

- 前歯、臼歯用

種類	商品コード	標準価格(1本)
219-220 Si	00230518	¥6,600
219-220 XSi	00230519	¥7,000



QRコードを読み取って動画を *check!*



シャープニング



臨床例



LMコロンビア キュレット #13-14

Si エルゴノーム

XSi エルゴマックス

- 大臼歯用

種類	商品コード	標準価格(1本)
237-238 Si	00230513	¥6,600
237-238 XSi	00230514	¥7,000



LMバーンハルト #5-6

XSi エルゴマックス

- 前歯、臼歯用
- 第一シャンクが短い

種類	商品コード	標準価格(1本)
227-228 XSi	00230528	¥7,000

スペシャルインスツルメント、ファーケーションインスツルメント

医療機器届出番号 27B1X00020221061 一般医療機器
医療機器届出番号 27B1X00020221055 一般医療機器
医療機器届出番号 27B1X00020221054 一般医療機器

スペシャルインスツルメント シンテット

グレーシーキュレット(11-12, 13-14) 2本を組み合わせたユニバーサルキュレット(両刃)。
歯肉縁上や歯肉縁下の歯石除去に使用します。

- ・凹面にも凸面にも使用できます。
- ・一つのインスツルメントヘッドで同一歯間部の近心面と遠心面を処理することができます。
- ・ミニモデルはタイトで深い歯周ポケットに適しています。

形態:

- ・緩くカーブしたカッティングエッジが両サイドに付いています。
- ・丸い刃先



QRコードを読み取って動画を check!

臨床例



LMシンテット

Si エルゴノム

XSi エルゴマックス



種類	商品コード	標準価格(1本)
215-216 Si	00230315	¥7,200
215-216 XSi	00231315	¥7,600

LMシンテットミニ

Si エルゴノム

XSi エルゴマックス



種類	商品コード	標準価格(1本)
215-216M Si	00230415	¥7,200
215-216M XSi	00231415	¥7,600

ファーケーションインスツルメント

LMファーケーター

XSi エルゴマックス

- 根分岐部の天蓋や内面の清掃、特に窪みや溝の清掃に使用。



種類	商品コード	標準価格(1本)
259-260 XSi	00231310	¥6,000




QRコードを読み取って動画を check!



シャープニング



臨床例

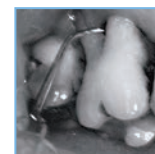

LMダイヤモンドファイル SV 5-6

Si エルゴノム

XSi エルゴマックス



- ダイヤモンドでコーティングされたカーブの付いた丸い刃先
- 深く窪んだ歯根面の清掃に使用
- 根分岐部用

種類	商品コード	標準価格(1本)
255-256D Si	00230305	¥14,800
255-256D XSi	00231306	¥16,000



LMダイヤモンドファイル SV 7-8

Si エルゴノム

XSi エルゴマックス



- ダイヤモンドでコーティングされた卵形の刃先
- 深い根分岐部の清掃に使用

種類	商品コード	標準価格(1本)
257-258D Si	00230307	¥14,800
257-258D XSi	00231308	¥16,000



QRコードを読み取って動画を check!



臨床例

ホースケーラー

医療機器届出番号 27B1X00020221050 一般医療機器

ホースケーラー

歯肉縁上、歯肉縁下の歯石除去に使用します。深く狭い歯周ポケットや窪んだ歯根面に適しています。

形態:

- ・角が丸く細い鋏型のブレード
- ・楕円形のカットングエッジ



シャープニング



QRコードを読み取って動画を check!



LMホースケーラー アンテリア

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス



種類	商品コード	標準価格(1本)
112-113 Si	00231701	¥6,600
112-113 XSi	00231702	¥7,000



QRコードを読み取って動画を check!



臨床例



LMホースケーラー ラテラル

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス



種類	商品コード	標準価格(1本)
134-135 Si	00231703	¥6,600
134-135 XSi	00231704	¥7,000



QRコードを読み取って動画を check!



臨床例



LMホースケーラー ポステリア

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス



種類	商品コード	標準価格(1本)
156-157 Si	00231705	¥6,600
156-157 XSi	00231706	¥7,000



QRコードを読み取って動画を check!



臨床例

グレーシーキュレット

医療機器届出番号 27B1X00020221062 一般医療機器

グレーシーキュレット


- 歯肉縁下深部の歯石除去
- 歯肉縁下、歯根面の仕上げ



QRコードを読み取って動画を *check!*




シャープニング

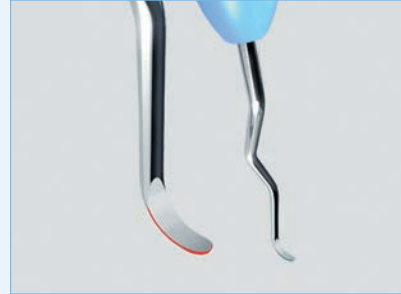

形態

- ・刃部の内面が第1シャンクに対して 約70°傾いています。
- ・カーブが付いたカッティングエッジが片側に付いています（赤線部分）
- ・丸い刃先

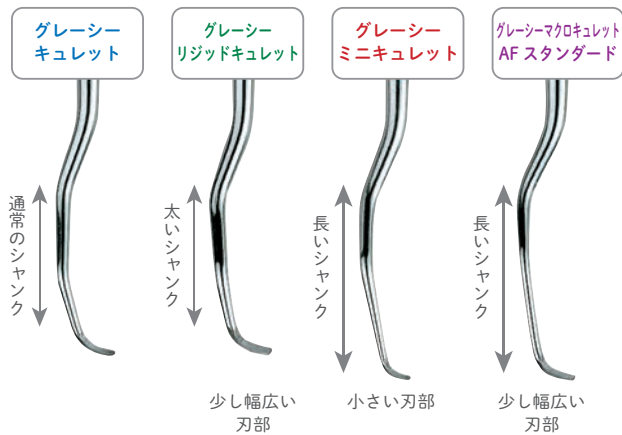


■ LM グレーシーキュレットタイプ別比較表

	スタンダード	リジッド	ミニ	マクロ AFスタンダード
第1シャンクの長さ	通常	通常	3mm長い	3mm長い
シャンクの太さ	通常	太い	通常	通常
刃部（ブレード）の長さ	通常	通常	短い	通常
刃部（ブレード）の幅	通常	少し広い	細い	少し広い

■ LM グレーシーキュレット種類別お取り扱い早見表

	グレーシー キュレット	グレーシー リジッドキュレット	グレーシー ミニキュレット	グレーシー マクロキュレット AFスタンダード
LM201-202 Si/XSi 1/2	●	●	●	
LM203-204 Si/XSi 3/4	●			
LM266-267 Si/XSi P3/P4	●			
LM205-206 Si/XSi 5/6	●			●
LM207-208 Si/XSi 7/8	●	●	●	●
LM209-210 Si/XSi 9/10	●			
LM211-212 Si/XSi 11/12	●	●	●	●
LM213-214 Si/XSi 13/14	●	●	●	●
LM245-246 Si/XSi 15/16	●	●	●	
LM247-248 Si/XSi 17/18	●		●	

■ LMグレーシーキュレット使用部位

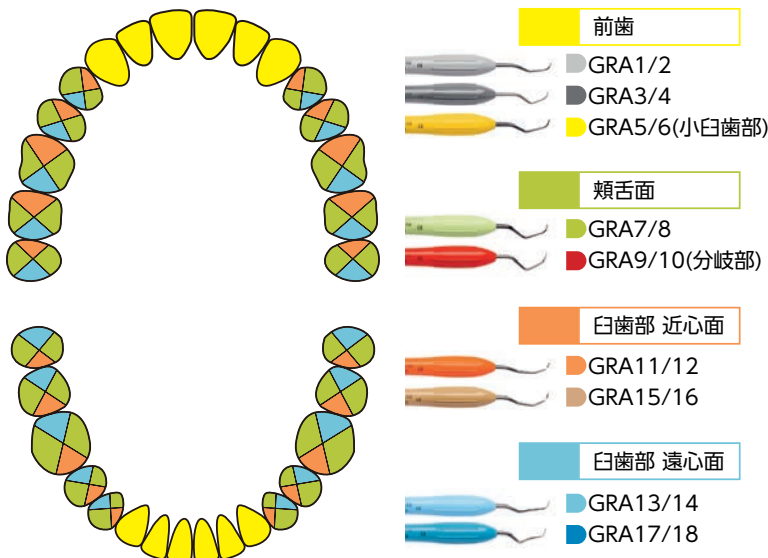

関連商品

エッジスター テストスティック (2本入)

商品コード	標準価格
00413523	¥500



カッティングエッジの切れ味を確認することができます。

グレーシーキュレット

医療機器届出番号 27B1X00020221062 一般医療機器

スタンダード グレーシーキュレット

LMグレーシーキュレット #1-2

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- 前歯



種類	商品コード	標準価格 (1本)
201-202 Si	00230101	¥6,600
201-202 XSi	00231101	¥7,000



LMグレーシーキュレット #3-4

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- 前歯



種類	商品コード	標準価格 (1本)
203-204 Si	00230103	¥6,600
203-204 XSi	00231103	¥7,000



LMグレーシーキュレット #P3-P4

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- シャンクが短く頑強



種類	商品コード	標準価格 (1本)
266-267 Si	00230134	¥6,600
266-267 XSi	00231134	¥7,000

LMグレーシーキュレット #5-6

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- 前歯、小臼歯用



種類	商品コード	標準価格 (1本)
205-206 Si	00230105	¥6,600
205-206 XSi	00231105	¥7,000



QRコードを読み取って動画を check!



シャープニング

LMグレーシーキュレット #7-8

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- 小臼歯、大臼歯の頬舌面用



種類	商品コード	標準価格 (1本)
207-208 Si	00230107	¥6,600
207-208 XSi	00231107	¥7,000



QRコードを読み取って動画を check!



臨床例

LMグレーシーキュレット #9-10

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- 小臼歯、大臼歯の頬舌面、分岐部用



種類	商品コード	標準価格 (1本)
209-210 Si	00230109	¥6,600
209-210 XSi	00231109	¥7,000



グレイシーキュレット

医療機器届出番号 27B1X00020221062 一般医療機器



LMグレイシーキュレット #11-12

- 小臼歯、大臼歯の近心面

種類	商品コード	標準価格(1本)
211-212 Si	00230111	¥6,600
211-212 XSi	00231111	¥7,000

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス



QRコードを読み取って動画を

check!



シャープニング



臨床例



LMグレイシーキュレット #13-14

- 小臼歯、大臼歯の遠心面

種類	商品コード	標準価格(1本)
213-214 Si	00230113	¥6,600
213-214 XSi	00231113	¥7,000

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス



QRコードを読み取って動画を

check!



臨床例



LMグレイシーキュレット #15-16

- 大臼歯の近心面
- #11-12よりシャンクの屈曲が強いので、治療中のハンドル位置をより平行に保つことができます。従って、口の開きが小さい患者さんの処置に便利です。

種類	商品コード	標準価格(1本)
245-246 Si	00230115	¥6,600
245-246 XSi	00231115	¥7,000

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス



QRコードを読み取って動画を

check!



臨床例



LMグレイシーキュレット #17-18

- 大臼歯の遠心面
- #13-14よりシャンクの屈曲が強いので、治療中のハンドル位置をより平行に保つことができます。従って、口の開きが小さい患者さんの処置に便利です。

種類	商品コード	標準価格(1本)
247-248 Si	00230117	¥6,600
247-248 XSi	00231117	¥7,000

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス



QRコードを読み取って動画を

check!



臨床例

グレイシーキュレット

医療機器届出番号 27B1X00020221062 一般医療機器

グレイシー リジッドキュレット

標準モデルよりシャンクが太く頑強で、刃部が少し幅広。



LMグレイシーキュレット リジッド #1-2

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
201-202R Si	00231225	¥6,600
201-202R XSi	00231240	¥7,000



LMグレイシーキュレット リジッド #7-8

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
207-208R Si	00231227	¥6,600
207-208R XSi	00231242	¥7,000



LMグレイシーキュレット リジッド #11-12

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
211-212R Si	00231229	¥6,600
211-212R XSi	00231244	¥7,000



LMグレイシーキュレット リジッド #13-14

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
213-214R Si	00231231	¥6,600
213-214R XSi	00231246	¥7,000



LMグレイシーキュレット リジッド #15-16

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
245-246R Si	00231233	¥6,600
245-246R XSi	00231248	¥7,000

グレイシーキュレット

医療機器届出番号 27B1X00020221062 一般医療機器

グレイシー ミニキュレット



LMグレイシーキュレット ミニ
#1-2

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
201-202M Si	00230201	¥6,600
201-202M XSi	00231201	¥7,000



LMグレイシーキュレット ミニ
#7-8

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
207-208M Si	00230207	¥6,600
207-208M XSi	00231207	¥7,000



LMグレイシーキュレット ミニ
#11-12

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
211-212M Si	00230211	¥6,600
211-212M XSi	00231211	¥7,000



LMグレイシーキュレット ミニ
#13-14

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
213-214M Si	00230213	¥6,600
213-214M XSi	00231213	¥7,000



LMグレイシーキュレット ミニ
#15-16

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
245-246M Si	00230215	¥6,600
245-246M XSi	00231215	¥7,000



LMグレイシーキュレット ミニ
#17-18

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
247-248M Si	00230217	¥6,600
247-248M XSi	00231217	¥7,000

グレイシーキュレット

医療機器届出番号 27B1X00020221062 一般医療機器

グレイシー マクロキュレットAF スタンダード



LMグレイシーキュレット マクロAF #5-6 スタンダード

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
205-206AF Si	00233550	¥6,600
205-206AF XSi	00233560	¥7,000



LMグレイシーキュレット マクロAF #7-8 スタンダード

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
207-208AF Si	00233552	¥6,600
207-208AF XSi	00233562	¥7,000



LMグレイシーキュレット マクロAF #11-12 スタンダード

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
211-212AF Si	00233554	¥6,600
211-212AF XSi	00233564	¥7,000



LMグレイシーキュレット マクロAF #13-14 スタンダード

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
213-214AF Si	00233556	¥6,600
213-214AF XSi	00233566	¥7,000

シャープダイヤモンド(グレーシーキュレット)

医療機器届出番号 27B1X00020228039 一般医療機器

シャープニング不要

シャープダイヤモンド

LM シャープダイヤモンドは、非常に耐久性の高い特殊金属でコーティングされており、シャープニングが必要ありません。コーティングは最先端の PVD (Physical Vapor Deposition : 物理蒸着法) を使用し、硬度が高く、シャープニングをしなくても鋭さを長く継続させます。
ハンドグリップは人間工学を更に追求したエルゴセンシスハンドルを採用しており、効率の良い作業が可能です。
シャープニングにあまり時間を費やしたくない、手に負担の少ないインスツルメントを使用したい術者に最適なアイテムです。



HAARDNESS OVER
63
HRC

手に負担の少ない太いエルゴセンシスハンドルで快適作業

硬度 : ロックウェルスケール 63HRC 以上

シャープニング不要

PVD コーティングにより長く持続する鋭さ

LM シャープダイヤモンドに関するよくある質問をまとめました！

白水ホームページで公開中！

QR コードを読み取って動画を check !



LM 社 HP



Q&A


FAQ
公開中！

シャープダイヤモンド グレーシーキュレット

LMシャープダイヤモンド グレーシーキュレット 1-2

ES エルゴセンシス

- 前歯用

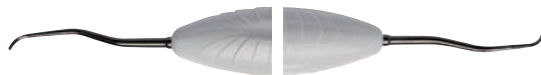

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
201-202 SD ES	00232765	¥9,800

LMシャープダイヤモンド グレーシーキュレット 7-8

ES エルゴセンシス

- 臼歯の頬側・舌側用



種類	商品コード	標準価格 (1 本)
207-208 SD ES	00232766	¥9,800

LMシャープダイヤモンド グレーシーキュレット 9-10

ES エルゴセンシス

- 小臼歯、大臼歯の頬舌面、分岐部用



種類	商品コード	標準価格 (1 本)
209-210 SD ES	00232769	¥9,800

LMシャープダイヤモンド グレーシーキュレット 11-12

ES エルゴセンシス

- 臼歯の近心用




種類	商品コード	標準価格 (1 本)
211-212 SD ES	00232767	¥9,800

LMシャープダイヤモンド グレーシーキュレット 13-14

ES エルゴセンシス

- 臼歯の遠心用

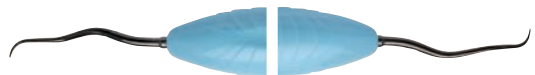

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
213-214 SD ES	00232768	¥9,800

シャープダイヤモンド(グレーシーキュレット)

医療機器届出番号 27B1X00020228039 一般医療機器



LMシャープダイヤモンド グレーシーキュレット 15-16

ES エルゴセンス

- 臼歯の近心用
(#11-12よりシャンクが鋭角)

種類	商品コード	標準価格(1本)
245-246 SD ES	00232770	¥9,800



LMシャープダイヤモンド グレーシーキュレット 17-18

ES エルゴセンス

- 臼歯の遠心用
(#13-14よりシャンクが鋭角)

種類	商品コード	標準価格(1本)
247-248 SD ES	00232771	¥9,800

シャープダイヤモンド ミニ グレーシーキュレット



LMシャープダイヤモンド ミニ グレーシー 1-2

ES エルゴセンス

- 前歯用

種類	商品コード	標準価格(1本)
201-202 MSD ES	00232753	¥9,800



LMシャープダイヤモンド ミニ グレーシー 7-8

ES エルゴセンス

- 臼歯の頬側・舌側用

種類	商品コード	標準価格(1本)
207-208 MSD ES	00232754	¥9,800



LMシャープダイヤモンド ミニ グレーシー 11-12

ES エルゴセンス

- 臼歯の近心用

種類	商品コード	標準価格(1本)
211-212 MSD ES	00232755	¥9,800



LMシャープダイヤモンド ミニ グレーシー 13-14

ES エルゴセンス

- 臼歯の遠心用

種類	商品コード	標準価格(1本)
213-214 MSD ES	00232756	¥9,800



LMシャープダイヤモンド ミニ グレーシー 15-16

ES エルゴセンス

- 臼歯の近心用(#11-12よりシャンクの屈曲が強い)

種類	商品コード	標準価格(1本)
245-246 MSD ES	00232757	¥9,800



LMシャープダイヤモンド ミニ グレーシー 17-18

ES エルゴセンス

- 臼歯の遠心用(#13-14よりシャンクの屈曲が強い)

種類	商品コード	標準価格(1本)
247-248 MSD ES	00232758	¥9,800

シャープダイヤモンド (シクルスケーラー)

医療機器届出番号 27B1X00020228039 一般医療機器
医療機器届出番号 27B1X00020228040 一般医療機器

シャープダイヤモンド シクルスケーラー



LMシャープダイヤモンド シャープジャック

ES エルゴセンス

- 全ての部位
- ブレードが細く傾斜があるため、
臼歯隣接面や歯間部にも最適

種類	商品コード	標準価格 (1本)
315-316 SD ES	00232745	¥9,800



LMシャープダイヤモンド ネプラスカ

ES エルゴセンス

- 前歯用
- ブレードが細く歯間部にも最適

種類	商品コード	標準価格 (1本)
128-128 SD ES	00232746	¥9,800



LMシャープダイヤモンド シクルLM23

ES エルゴセンス

- 全ての部位
- ミニシクルよりブレードが短く
第一シャンクが長い

種類	商品コード	標準価格 (1本)
313-314 SD ES	00232748	¥9,800



LMシャープダイヤモンド シクル LM23 スリム

ES エルゴセンス

- 全ての部位
- シクルLM23よりもブレードが細く歯間
部に最適

種類	商品コード	標準価格 (1本)
343-344 SD ES	00232778	¥9,800



LMシャープダイヤモンド スケーラーH6-H7

ES エルゴセンス

- 前歯から小臼歯用
- 隣接歯間部に最適

種類	商品コード	標準価格 (1本)
146-147 SD ES	00232749	¥9,800

シャープダイヤモンド マイクロ/ミニ シクルスケーラー



LMシャープダイヤモンド マイクロシクル

ES エルゴセンス

- 刃部が非常に細い
- タイトな歯間空隙に使用

種類	商品コード	標準価格 (1本)
301-302 SD ES	00232750	¥9,800



LMシャープダイヤモンド ミニシクル

ES エルゴセンス

- 全額、特に隣接面に使用

種類	商品コード	標準価格 (1本)
311-312 SD ES	00232751	¥9,800

シャープダイヤモンド(ユニバーサルキュレット)

医療機器届出番号 27B1X00020228041 一般医療機器

シャープダイヤモンド ユニバーサルキュレット



LMシャープダイヤモンド コロンビア 4L-4R

ES エルゴセンス

- 全ての部位
- 特に臼歯用

種類	商品コード	標準価格(1本)
219-220 SD ES	00232775	¥9,800



LMシャープダイヤモンド パーンハルト 5-6

ES エルゴセンス

- 全ての部位
- 第一シャンクが短い

種類	商品コード	標準価格(1本)
227-228 SD ES	00232776	¥9,800



LMシャープダイヤモンド ミニ マッコール 13S-14S

ES エルゴセンス

- 全ての部位
- 深く狭いポケット用

種類	商品コード	標準価格(1本)
222-223 MSD ES	00232777	¥9,800

シャープダイヤモンド ミニ シンテット



LMシャープダイヤモンド ミニ シンテット

ES エルゴセンス

- グレーシーキュレット(11-12と13-14) を
組み合わせたユニバーサルキュレット(両刃)
- 隣接面・根分岐部用

種類	商品コード	標準価格(1本)
215-216 MSD ES	00232752	¥10,800



LMシャープダイヤモンド ミニ シンテット アンテリア

ES エルゴセンス

- グレーシーキュレット(1-2と7-8) を
組み合わせたユニバーサルキュレット(両刃)
- 前歯部や小臼歯部の歯面に対応
- 前歯・小臼歯・臼歯頬舌面用

種類	商品コード	標準価格(1本)
275-276 MSD ES	00232779	¥10,800

M-Dグレイシーキュレット

医療機器届出番号 27B1X00020221062 一般医療機器

メジアル ディスタル グレイシーキュレット

1本で頬側/舌(口蓋)側に使用できるため、処置の流れに沿ってインストゥルメントを使用することができます。



LM M-Dグレイシー #11-14

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1本)
211-214 Si	00231801	¥6,600
211-214 XSi	00231802	¥7,000

LM M-Dグレイシー #12-13

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1本)
212-213 Si	00231805	¥6,600
212-213 XSi	00231806	¥7,000

LM M-Dグレイシー #15-18

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1本)
245-248 Si	00231809	¥6,600
245-248 XSi	00231810	¥7,000

LM M-Dグレイシー #16-17

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1本)
246-247 Si	00231813	¥6,600
246-247 XSi	00231814	¥7,000

メジアル ディスタル グレイシーミニキュレット

LM M-Dグレイシーミニ #11-14

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス



種類	商品コード	標準価格 (1本)
211-214M Si	00231803	¥6,600
211-214M XSi	00231804	¥7,000

LM M-Dグレイシーミニ #12-13

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス



種類	商品コード	標準価格 (1本)
212-213M Si	00231807	¥6,600
212-213M XSi	00231808	¥7,000

LM M-Dグレイシーミニ #15-18

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス



種類	商品コード	標準価格 (1本)
245-248M Si	00231811	¥6,600
245-248M XSi	00231812	¥7,000

LM M-Dグレイシーミニ #16-17

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス



種類	商品コード	標準価格 (1本)
246-247M Si	00231815	¥6,600
246-247M XSi	00231816	¥7,000

LMエルゴミックス(インプラント用)

医療機器届出番号 27B1X00020223001 一般医療機器
医療機器届出番号 27B1X00020223002 一般医療機器

エルゴミックス(インプラントメンテナンス)

チップ部分の取り替えが可能なので、無駄が無く経済的。
チップの交換はロックグリップをゆるめてチップを差し込み、ロックグリップを締めるだけ。道具を必要とせず簡単。

つなぎ目はしっかりと封鎖されており衛生的。通常のインスツルメントと同様に滅菌可能。



インプラントメンテナンス用チタン製チップ
インプラントと同じチタン製なので、インプラントに傷が付きにくい。



LM エルゴミックス ユニバーサルキュレット ミニ インプラント用

EM エルゴミックス



- 細い刃部
- タイトな歯間空隙に最適

種類	商品コード	標準価格(1本)
283-284MTi EM	00231945	¥16,000

LM エルゴミックス グレーシーミニ #1-2 インプラント用

EM エルゴミックス



- 前歯、小臼歯用

種類	商品コード	標準価格(1本)
201-202MTi EM	00231946	¥16,000

LM エルゴミックス グレーシーミニ #11-12 インプラント用

EM エルゴミックス



- 小臼歯、大臼歯の近心面

種類	商品コード	標準価格(1本)
211-212MTi EM	00231947	¥16,000

LM エルゴミックス グレーシーミニ #13-14 インプラント用

EM エルゴミックス



- 小臼歯、大臼歯の遠心面

種類	商品コード	標準価格(1本)
213-214MTi EM	00231948	¥16,000

エルゴミックス - スペアパーツ

商品名	種類	商品コード	標準価格
ハンドル			
エルゴミックス ハンドル ダークグレー	9011 EM	00231986	¥7,000
スペアロックグリップ 2個入			
オレンジ	9020 EM	00231990	¥7,000
ライトブルー	9021 EM	00231991	¥7,000
グレー	9022 EM	00231992	¥7,000
イエロー	9023 EM	00231993	¥7,000
ダークグレー	9024 EM	00231994	¥7,000
レッド	9025 EM	00231995	¥7,000

商品名	種類	商品コード	標準価格
チタン製スペアチップ(インプラント用)			
インプラント用 ユニバーサルミニ L	283MTi EM	00231955	¥4,200
インプラント用 ユニバーサルミニ R	284MTi EM	00231956	¥4,200
インプラント用 グレーシーミニ #1	201MTi EM	00231957	¥4,200
インプラント用 グレーシーミニ #2	202MTi EM	00231958	¥4,200
インプラント用 グレーシーミニ #11	211MTi EM	00231959	¥4,200
インプラント用 グレーシーミニ #12	212MTi EM	00231960	¥4,200
インプラント用 グレーシーミニ #13	213MTi EM	00231961	¥4,200
インプラント用 グレーシーミニ #14	214MTi EM	00231962	¥4,200

SURGERY

- マイクロサージカルインスツルメント
- 外科用メスハンドル



マイクロサージカルインストルメント

医療機器届出番号 27B1X00020307003 一般医療機器

マイクロサージカルインストルメント

アルゼンチン・ブエノスアイレスのProf. Axel Endruhnとの共同開発により誕生した、7種の歯周外科用マイクロジェリーインストルメントです。精度の高い治療を可能にし、幅広い術式に対応します。低侵襲かつ高いコントロール性を実現し、術後の合併症を抑えながら、審美的な仕上がりを提供します。また、LMエルゴセンスハンドルにより、優れた操作性と快適なグリップ感を確保し、術者の疲労軽減にも貢献します。



高度な歯周外科技術

切開範囲を最小限に抑えることで、患者さんへの侵襲を軽減し、高度な歯周外科治療を可能にします。

術後の痛みや腫れの軽減

組織へのダメージを最小限にとどめることで、術後の不快感を抑え、快適な回復を促します。

軟組織の保護

血管網を温存する術式により、術後の組織回復を助け、良好な治癒環境を確保します。

高い治療成功率と審美性

精密な操作と組織保持により、機能面だけでなく審美面にも優れた治療結果を実現します。

さらなる精度と確実性の向上

マイクロスコープやルーペの併用により、細部まで正確な処置が可能になります。



LMイニシア

ES エルゴセンス

歯肉溝内の切開、および上皮と歯槽頂結合組織線維の分離に使用される、固定刃のマイクロサージカルナイフ。

種類	商品コード	標準価格(1本)
171-172 ES	00233051	¥17,000



QRコードを読み取って動画をcheck!



使用方法



LMエレヴァ

ES エルゴセンス

粘膜骨膜弁の全層剥離に使用される、マイクロサイズのペリオステアルエレベーター。

種類	商品コード	標準価格(1本)
173-174 ES	00233052	¥17,000




QRコードを読み取って動画をcheck!



使用方法

NEW

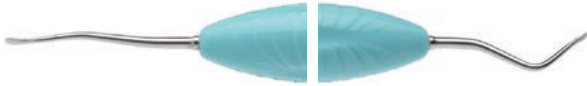

LMトゥネラ

ES エルゴセンス

2種類のシャンクアングルを持つ小型のトンネリングナイフで、スプリットフラップ(骨膜上層)剥離に使用されます。

種類	商品コード	標準価格(1本)
175-177 ES	00233053	¥17,000



QRコードを読み取って動画を *check!*



使用方法

NEW



LMパピラソレヴァ

ES エルゴセンス

歯間乳頭基部と歯槽骨からの分離および挙上に用いる、歯間乳頭・骨膜剥離用インスツルメント。

種類	商品コード	標準価格(1本)
181-182 ES	00233054	¥17,000



QRコードを読み取って動画を *check!*



使用方法

NEW



LMパピラリモータ

ES エルゴセンス

遠隔からの垂直切開や歯間乳頭の挙上に用いる、骨膜・マイクロパピラエレベーター。

種類	商品コード	標準価格(1本)
179-1780 ES	00233055	¥17,000



QRコードを読み取って動画を *check!*



使用方法

NEW



LMコルテロ

ES エルゴセンス

初期切開や骨膜の剥離、部分層の分離に使用するマイクロサージカルナイフ。

種類	商品コード	標準価格(1本)
187-188 ES	00233056	¥12,000



QRコードを読み取って動画を *check!*



使用方法

NEW



LMオルバンレドンド

ES エルゴセンス

オルバンナイフを改良したデザインで、歯肉溝内切開や部分層剥離に適したマイクロサージカルナイフ。

種類	商品コード	標準価格(1本)
185-186 ES	00233057	¥12,000



QRコードを読み取って動画を *check!*



使用方法

マイクロサージカルインスツルメント、外科用メスハンドル

医療機器届出番号 27B1X00020221043 一般医療機器

アイエツプロトコル

I E T S


INICIA ELEVA TUNELLA SOLLEVA

TREATMENT PROTOCOL

— トンネリング治療を成功に導くプロトコル —

根面被覆術、結合組織移植術（CTG）、歯冠側移動術（CAF）

IETS プロトコルは、低侵襲的なトンネリング治療*のために、Prof. Axel Endruhn により設計されました。それぞれのステップで使用するインスツルメントの名称に基づいて名付けられたこのプロトコルは、トンネリング治療における精度の向上と治療成果の最適化を目的としています。

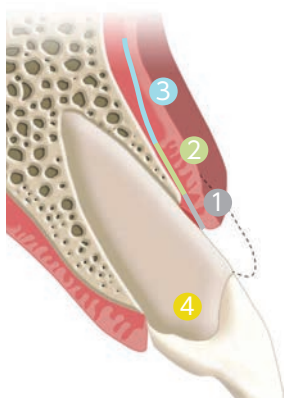

※トンネリング治療 …

結合組織などの移植を行う際に、歯肉の表面を広く切らず、歯肉内部をトンネル状に剥離する低侵襲手法。

STEP 1 LM Inicia

歯肉溝内への初期切開



STEP 2 LM Eleva

全層骨膜剥離



STEP 3 LM Tunella

歯肉および粘膜組織の部分層切開と骨膜上剥離



STEP 4 LM Inicia and LM Papilla Solleva

隣接骨から歯間乳頭の前面および基部の分離、乳頭基部の挙上



エルゴホールド3

外科用メスのハンドルです。



- ・握りやすい
- ・刃部を正確に操作可能
- ・回転をコントロール
- ・刃部の位置が把握しやすい
- ・組織を自在にカット
- ・No.3 の刃に対応
- ・弾力性のあるシリコンコーティング

LM エルゴホールド3
替え刃メスホルダー

エルゴホールド

種類	商品コード	標準価格(1本)
9003	00234108	¥7,800

RESTORATION

- エキスカベーター
- ジンジバルマージン トリマー
- スパチュラ
- コードパッカー
- ベースキャリア
- プラガー (CR用)
- バーニッシャー
- アルテ
- ダークダイヤモンド
- コンポジット用
- カーバー
- エクセススケーラー
- フィリングリムーバー
- クラウンオフ
- マルチホルダー

修復



エキスカベーター


医療機器届出番号 27B1X00020221035 一般医療機器

スプーンエキスカベーター

軟化象牙質や暫間充填材の除去に使用します。

形態:

- ・スプーン型の刃部
- ・丸い刃先
- ・カッティングエッジが長いので広範囲に及び齲蝕の処置に便利

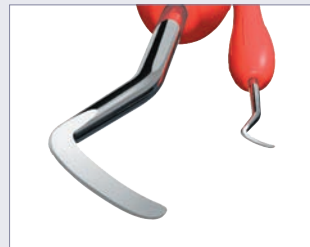

LMスプーンエキスカ 1.0mm

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
522-523 Si	00230652	¥5,600
522-523 XSi	00230752	¥6,000



LMスプーンエキスカ 1.5mm

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
533-534 Si	00230653	¥5,600
533-534 XSi	00230753	¥6,000



ラウンドエキスカベーター

齲蝕:

- ・軟化した齲蝕デンチンの除去
- ・暫間充填材の除去

外科:

- ・抜歯前の歯周靱帯の切断
- ・抜歯後の肉芽組織の除去


形態:

- ・丸い刃先
- ・カーブがついたカッティングエッジ



QRコードを読み取って動画を
check!

シャープニング

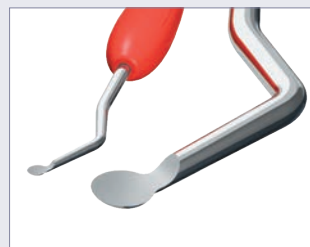

LMエキスカベーターラウンド 1.0mm

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
61-62 Si	00230661	¥5,600
61-62 XSi	00230610	¥6,000



LMエキスカベーターラウンド 1.5mm

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
63-64 Si	00230663	¥5,600
63-64 XSi	00230615	¥6,000



LMエキスカベーターラウンド 2.0mm

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
65-66 Si	00230665	¥5,600
65-66 XSi	00230620	¥6,000



バックアクション エキスカベーター

齲蝕治療:

- ・軟化象牙質を効果的に除去
- ・非侵襲的な窩洞形成法に使用

歯周治療:

- ・下顎前歯の舌側等、到達しにくい部位の歯石除去
- ・歯根面の窪みや根分歧部の清掃

外科治療:

- ・抜歯、フラップ手術、根尖切除時の肉芽組織除去

形態:

丸い刃部とカーブの付いたカッティングエッジ、シャンクに角度が付いているので到達しづらい頬側、遠心、舌側面に容易にアクセスできます。先端が屈曲しているため、アンダーカット部、狭い開口部付近や隅角部にも対応できます。



シャープニング



LMバックアクションエキスカ 1.0 mm

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス



種類	商品コード	標準価格 (1 本)
611-621 Si	00230761	¥5,600
611-621 XSi	00230710	¥6,000



LMバックアクションエキスカ 1.5mm

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス



種類	商品コード	標準価格 (1 本)
631-641 Si	00230763	¥5,600
631-641 XSi	00230715	¥6,000

LMバックアクションエキスカ 2.0 mm

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス



種類	商品コード	標準価格 (1 本)
651-661 Si	00230765	¥5,600
651-661 XSi	00230720	¥6,000

LMバックアクションエキスカ 3.5 mm

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス



種類	商品コード	標準価格 (1 本)
671-681 Si	00230667	¥5,600
671-681 XSi	00230767	¥6,000

ジンジバルマーゼントリマー

窩洞辺縁部外側の水平方向の仕上げに使用します。
エナメルマージンにベベルを付けるために2本をペアで使用します。

LMジンジバルマーゼントリマー 1.2mm(遠心用)

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス



種類	商品コード	標準価格 (1 本)
121-122 Si	00231903	¥6,000
121-122 XSi	00231904	¥6,400



LMジンジバルマーゼントリマー 1.2mm(近心用)

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス



種類	商品コード	標準価格 (1 本)
125-126 Si	00231909	¥6,000
125-126 XSi	00231910	¥6,400



スパチュラ、コードパッカー、ベースキャリア

医療機器届出番号 27B1X00020221070 一般医療機器
 医療機器届出番号 27B1X00020221032 一般医療機器
 医療機器届出番号 27B1X00020221031 一般医療機器

スパチュラ



LMスパチュラ

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
450-460 Si	00232301	¥5,000
450-460 XSi	00232302	¥5,400

コードパッカー

ブレードが屈曲しているので、容易に圧排糸を歯の周囲に巻きつけたり歯周ポケット内に押し込むことができます。



LMコードパッカー 2.0mm

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス



種類	商品コード	標準価格(1本)
490-491 Si	00232303	¥6,200
490-491 XSi	00232304	¥6,600

LMコードパッカー 2.6mm

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス



種類	商品コード	標準価格(1本)
492-493 Si	00232305	¥6,200
492-493 XSi	00232306	¥6,600

ベースキャリア

ベース材や薄いライナーをデンチン表面に塗布する際に使用します。



LMベースキャリアリジッド

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
29H-30H Si	00232309	¥5,000
29H-30H XSi	00232310	¥5,400

LMベースキャリア コンデンサー
マリアブルチップ

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス



LM30の先端は到達困難な部位にアクセスしやすいように曲げてご使用ください。

種類	商品コード	標準価格(1本)
30-34 Si	00232311	¥5,000
30-34 XSi	00232312	¥5,400

LMベースキャリア コンデンサー
リジッド

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス



種類	商品コード	標準価格(1本)
30H-34 Si	00232313	¥5,000
30H-34 XSi	00232314	¥5,400

プラグー (CR用)、バーニッシャー

医療機器届出番号 27B1X00020221029 一般医療機器
医療機器届出番号 27B1X00020221034 一般医療機器

プラグー (CR用)

LMプラグー 1.0-1.5mm

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス



種類	商品コード	標準価格 (1本)
340-360 Si	00232509	¥5,600
340-360 XSi	00232510	¥5,800

LMプラグー
1.2-2.0mm

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス



種類	商品コード	標準価格 (1本)
350-380 Si	00232511	¥5,600
350-380 XSi	00232512	¥5,800

LMプラグー
1.8-2.5mm

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス



種類	商品コード	標準価格 (1本)
370-390 Si	00232513	¥5,600
370-390 XSi	00232514	¥5,800

バーニッシャー

LMバーニッシャー #31-32

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス



種類	商品コード	標準価格 (1本)
31-32 Si	00232601	¥5,600
31-32 XSi	00232602	¥5,800

LMバーニッシャー 1.5-2.5 mm

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス



種類	商品コード	標準価格 (1本)
471-473 Si	00232603	¥5,600
471-473 XSi	00232604	¥5,800

LMバーニッシャー #27-29

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス



種類	商品コード	標準価格 (1本)
476-477 Si	00232605	¥5,600
476-477 XSi	00232606	¥5,800

コンポジットレジン充填器

医療機器届出番号 27B1X00020224017 一般医療機器



アルテ

審美歯科を専門とする歯科医師のグループ「Style Italiano」と協力して開発されたインスツルメントで、審美的なコンポジットレジンの築盛に使用します。

QRコードを読み取って動画を *check!*

Facebook



臨床例




LMアルテ アプリカ

XSi エルゴマックス

- 薄型で柔軟性があるスパチュラ
- コンポジットレジンの適用と審美的な形成に使用します。

種類	商品コード	標準価格(1本)
46-49 XSi	00232735	¥8,500

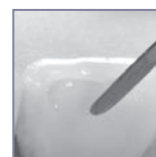

LMアルテ アプリカ ツイスト

XSi エルゴマックス

- 薄く幅が狭いスパチュラ
- 手の位置を何度も変えることなく到達困難な部位にアクセス可能です。マトリックスを装着した歯の隣接面や辺縁隆線の築盛を容易に行うことができます。

種類	商品コード	標準価格(1本)
464-494 XSi	00232734	¥8,500



LMアルテ モデラ

XSi エルゴマックス

- 非常に薄く幅の広いコンポジットレジン形成用インスツルメント。幅広のブレードで表面を効率的に滑らかに形成可能です。コンポジットレジンから取り出し適用することも容易に行えます。

種類	商品コード	標準価格(1本)
442-443 XSi	00232736	¥8,500



LMアルテ コンデンサー

XSi エルゴマックス

- コンポジットレジン形成用のシャンクが長く丸いプラガー

種類	商品コード	標準価格(1本)
488-489 XSi	00232737	¥8,500




LMアルテ フィスラ

XSi エルゴマックス

- 先が非常に尖った形成用インスツルメント

種類	商品コード	標準価格(1本)
481-487 XSi	00232739	¥8,500

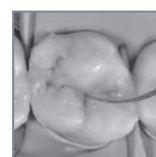




LMアルテ ミスラ

- 前歯部修復物におけるコンポジットレジンの水平的、垂直的な厚みを計測するインストルメント

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
496-497 XSi	00232741	¥8,500

XSi エルゴマックス

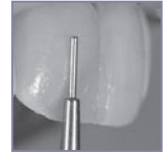

LMアルテ ポステリア ミスラ

- 臼歯部修復におけるコンポジットレジンの水平的厚みを計測するインストルメント。また、チップを隣接部の壁に当てることでマトリックスを挟んだ状態の隣接歯の復元が可能です。

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
498-499 XSi	00232742	¥8,500

XSi エルゴマックス



LMアルテ エクセン

- 余剰コンポジットレジンやボンディング材の除去用インストルメント

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
307-308 XSi	00232743	¥8,500

XSi エルゴマックス



LMアルテ カスプ ミスラ

- ダイレクトレジン修復を行う際のカスプの厚さや高さを測定するためのユニークなインストルメント

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
468-469 XSi	00232733	¥8,500

XSi エルゴマックス



LMアルテ ソロ アンテリア

- 審美的な前歯部修復のためのインストルメント

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
431-433 XSi	00232738	¥8,500

XSi エルゴマックス




LMアルテ ソロ ポステリア

- 臼歯部におけるコンポジットレジンの修復に用いられるインストルメント

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
434-438 XSi	00232740	¥8,500

XSi エルゴマックス

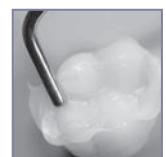

LMアルテ レプリカ ポステリア

- 咬合面の築盛を簡素化するために設計された多機能なインストルメント

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
448-449 XSi	00232744	¥8,500

XSi エルゴマックス



コンポジットレジン充填器

医療機器届出番号 27B1X00020224017 一般医療機器

アルテ ダークダイヤモンド

12種あるLMアルテより、臨床で幅広くご使用いただいている代表的なインストルメント5種のダークダイヤモンドを発売中です。



LMアルテ エクセンDD

ES エルゴセンス

- 余剰なコンポジットレジンやボンディング材を除去するインストルメント



種類	商品コード	標準価格(1本)
307-308DDES	00232843	¥9,800



LMアルテ モデラDD

ES エルゴセンス

- 非常に薄く幅の広いコンポジットレジン形成用インストルメント。幅広のブレードで表面を効率的に滑らかに形成可能です。コンポジットレジンから取り出し適用することも容易に行えます。




種類	商品コード	標準価格(1本)
442-443DDES	00232836	¥9,800



LMアルテ フィスラDD

ES エルゴセンス

- 先端が細く尖った形成用インストルメント

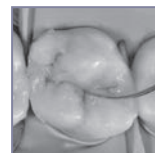

種類	商品コード	標準価格(1本)
481-487DDES	00232839	¥9,800



LMアルテ アプリカDD

ES エルゴセンス

- 薄型で柔軟性があるスパチュラ
- コンポジットレジンの適用と審美的な形成に使用します。



種類	商品コード	標準価格(1本)
46-49DDES	00232835	¥9,800



LMアルテ コンデンサーDD

ES エルゴセンス

- コンポジットレジン形成用のシャンクが長く丸いブラガー



種類	商品コード	標準価格(1本)
488-489DDES	00232837	¥9,800

レジンが付着しにくいコーティング

ダークダイヤモンド

チップ部分に高硬度で傷や摩耗に強いPVDメソッド（Physical Vapor Deposition：物理蒸着法）を用いたコーティングを採用。平滑性が高いのでレジン離れが良く、操作性に優れています。

PVDメソッドを用いたコーティング:

疎水性が高く、レジン離れが良いので築盛や形態付与をスムーズに行えます。

硬い表面:

表面が硬質なので、傷がつきにくく低摩耗

滑らかな表面:


表面が滑沢で清掃が容易

ダークカラーコーティング:

レジンとのコントラストが強いので見やすい。黒色が光の反射を軽減

硬い表面:

把持部は握りやすく、触感を確実に手指に伝える形状

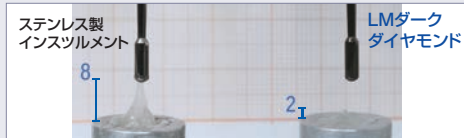

臨床例

QRコードを読み取って動画を check!



LMバーニッシャー ダークダイヤモンド

ES エルゴセンス

- レジンの充填・形成

種類	商品コード	標準価格(1本)
31-32 DD ES	00232725	¥9,000



LMバーニッシャー プラガー
ダークダイヤモンド1.5-2.5mm

ES エルゴセンス

- レジンの形成

種類	商品コード	標準価格(1本)
471-473 DD ES	00232728	¥9,000



LMモデラーMH ダークダイヤモンド

ES エルゴセンス

- 多量のレジン充填時に使用
- シリンダー状の先端はレジン離れが良く、正確な処置が可能

種類	商品コード	標準価格(1本)
708-709 DD ES	00232731	¥9,000



LMモデラーMH ミニ ダークダイヤモンド

ES エルゴセンス

- 少量のレジン充填時に使用
- シリンダー状の先端はレジン離れが良く、正確な処置が可能

種類	商品コード	標準価格(1本)
707-708 DD ES	00232730	¥9,000



LMパッカーモデラーIO ダークダイヤモンド

ES エルゴセンス

- レジンの充填・形成
- 円錐状の先端は咬合面の形成に最適

種類	商品コード	標準価格(1本)
482-483 DD ES	00232729	¥9,000



LMコンポジット インスツルメント アンテリア
ダークダイヤモンド

ES エルゴセンス

- レジンの築盛・充填・形成

種類	商品コード	標準価格(1本)
43-47 DD ES	00232726	¥9,000

ダークダイヤモンド、コンポジット用

医療機器届出番号 27B1X00020221072 一般医療機器
 医療機器届出番号 27B1X00020221071 一般医療機器
 医療機器届出番号 27B1X00020224015 一般医療機器



LMコンボジット インストルメント ポステリア ダークダイヤモンド

ES エルゴセンス

- レジンの築盛・充填・形成

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
48-702 DD ES	00232727	¥9,000



LMミニスパチュラ ダークダイヤモンド

ES エルゴセンス

- レジンの築盛・充填・形成

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
444-445 DD ES	00232732	¥9,000

コンポジット用



LMフロー インストルメント IO

XSi エルゴマックス

- フロアブルコンポジットレジンの形成に適しています。

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
484-485 XSi	00232700	¥6,400



LMモデラー MH

XSi エルゴマックス

- 多量のレジン充填時に使用
 - シリンダー状の先端はレジン離れが良く、正確な処置が可能

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
708-709 XSi	00232690	¥6,400



LMモデラー MH ミニ

XSi エルゴマックス

- 少量のレジン充填時に使用
 - シリンダー状の先端はレジン離れが良く、正確な処置が可能



種類	商品コード	標準価格 (1 本)
707-709 XSi	00232695	¥6,400



LMパッカーモデラー

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- 刃部は円錐形になっており咬合面の形態付与やコンポジットの充填に適しています。
 - プレード部分はしっかりと研磨されているのでコンポジットが付着しません。
 - 小穿裂溝に用いる

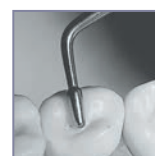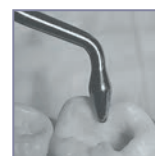

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
482-483 Si	00232703	¥6,000
482-483 XSi	00232704	¥6,400

コンポジット用

医療機器届出番号 27B1X00020221072 一般医療機器
医療機器届出番号 27B1X00020221071 一般医療機器



LMパッカーモデラー

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- 小臼歯用

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
482-702 Si	00232705	¥6,000
482-702 XSi	00232706	¥6,400



LMパッカーモデラー

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- 大臼歯用

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
483-703 Si	00232707	¥6,000
483-703 XSi	00232708	¥6,400

LMプラスチックインスツルメント
アンテリア

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
43-47 Si	00232709	¥6,000
43-47 XSi	00232710	¥6,400

LMプラスチックインスツルメント
ポステリア

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
48-702 Si	00232711	¥6,000
48-702 XSi	00232712	¥6,400

LMフォームコンデンサー
1.5-2.5 mm

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
702-703 Si	00232713	¥6,000
702-703 XSi	00232714	¥6,400



LMコンポジットスパチュラ

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
446-447 Si	00232717	¥6,000
446-447 XSi	00232718	¥6,400



LMミニスパチュラ

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
444-445 Si	00232715	¥6,000
444-445 XSi	00232716	¥6,400

カーバー

医療機器届出番号 27B1X00020221033 一般医療機器

カーバー

形態に合わせて余分な CR などを除去するために使用



LMカーバー

Si エルゴノーム

XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
741-751 Si	00232801	¥5,800
741-751 XSi	00232802	¥6,200



LMカーバー

Si エルゴノーム

XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
74-75 Si	00232803	¥5,800
74-75 XSi	00232804	¥6,200



LMカーバー

Si エルゴノーム

XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
76-77 Si	00232805	¥5,800
76-77 XSi	00232806	¥6,200



LMカーバー

Si エルゴノーム

XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
71-73 Si	00232807	¥5,800
71-73 XSi	00232808	¥6,200



LMカーバー

Si エルゴノーム

XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
71-72 Si	00232809	¥5,800
71-72 XSi	00232810	¥6,200



LMカーバー

Si エルゴノーム

XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
731-732 Si	00232811	¥5,800
731-732 XSi	00232812	¥6,200

エクセススケーラー、フィリングリムーバー、クラウンオフ

医療機器届出番号 27B1X00020221045 一般医療機器
医療機器届出番号 27B1X00020228027 一般医療機器

修復

エクセススケーラー

LMエクセススケーラー

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- 接着材、セメント、コンポジットの余剰分除去に使用
- 剃刀のようにシャープなので隣接スペースで効果的



種類	商品コード	標準価格 (1本)
785-795 Si	00232907	¥7,400
785-795 XSi	00232908	¥7,800

LMミニエクセススケーラー

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- 非常にタイトな歯間空隙で効果的に余剰材を除去



種類	商品コード	標準価格 (1本)
784-794 Si	00232909	¥7,400
784-794 XSi	00232910	¥7,800

フィリングリムーバー

LMフィリングリムーバー

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- 一端はプローブ型で他端はウェッジ型
- 暫間充填材やクラウンの除去に使用
- 試適したブリッジの除去に使用



種類	商品コード	標準価格 (1本)
764-766 Si	00232915	¥7,600
764-766 XSi	00232916	¥8,000

クラウンオフ

LMクラウンオフ

XSi エルゴマックス

- 予めクラウンに切り込みを入れておきます。
- その切り込みにLMクラウンオフを差し込み、スリットを開くように力を加えます。



種類	商品コード	標準価格 (1本)
767-768 XSi	00232930	¥6,200



マルチホルダー

医療機器届出番号 27B1X00020221046 一般医療機器
 医療機器届出番号 27B1X00020221059 一般医療機器
 医療機器届出番号 27B1X00020221060 一般医療機器
 医療機器届出番号 27B1X00020221068 一般医療機器
 医療機器届出番号 27B1X00020301008 一般医療機器

マルチホルダーシステム

2種類のマルチホルダーインスツルメントと可撤式の多様なプラスチック製チップから構成される多機能的インスツルメントです。

- シャンク部分が様々な角度に屈曲しているので複雑な形態の部位にも容易にアクセスできます。
- スチール製のシャンク部分は硬く、プラスチック製のワーキングエンドには柔軟性があります。



LMマルチホルダー PK I

XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
750-756 XSi	00233602	¥6,600



LMマルチホルダー PK II

XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
752-754 XSi	00233604	¥6,600




LMマルチレバー

プラスチック製のワーキングエンドを取り外す際に使用



種類	商品コード	標準価格 (1 箱)
7550	00233750	¥1,600

マルチホルダーのワーキングエンド

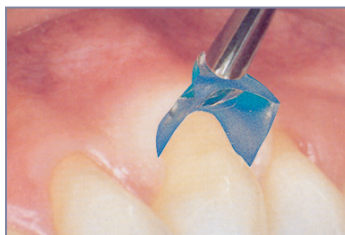

LMジンジバル リトラクター

歯肉辺縁の処置を行いやすくします。
 サイズは3種類、1箱60個入り

商品名	種類	商品コード	標準価格
S 前歯用(60ヶ入)	7502	00233902	¥6,800
M 小臼歯用(60ヶ入)	7504	00233904	¥6,800
XL 大臼歯用(60ヶ入)	7506	00233906	¥6,800
アソート(90ヶ入) 各サイズ30ヶ入	7500	00233900	¥9,000



LMサービカル マトリックス

解剖学的に正しい形態の充填を歯肉辺縁で行う際に、湿気・気泡ができるのを防止します。
 サイズ・形態が異なる4種類、1箱60個入り

商品名	種類	商品コード	標準価格
S 前歯 インサイザル用(60ヶ入)	7602	00233962	¥5,600
M 犬歯、小臼歯 プリモラー用(60ヶ入)	7604	00233964	¥5,600
L 小さな大臼歯 スモールモラー用(60ヶ入)	7606	00233966	¥5,600
XL 大きな大臼歯 ラージモラー用(60ヶ入)	7608	00233968	¥5,600
アソート(120ヶ入) 各サイズ30ヶ入	7600	00233960	¥10,500



LMコンタクトフォーマー

タイトな隣接部や窩洞に使用し、正確な形成ができます。
 サイズは4種類、1箱60個入り

商品名	種類	商品コード	標準価格
XS 前歯用(60ヶ入)	7622	00233981	¥5,400
S 犬歯・小臼歯用(60ヶ入)	7624	00233982	¥5,400
M 小臼歯・大臼歯用(60ヶ入)	7626	00233983	¥5,400
L 大臼歯用(60ヶ入)	7628	00233984	¥5,400
アソート(120ヶ入) 各サイズ30ヶ入	7620	00233980	¥10,500



LMマルチホルダー イントロキット

商品名	種類	商品コード	標準価格
LMマルチホルダー イントロキット	7555KXSi	00233951	¥18,000

セット内容

LMマルチホルダー-PK I LM 750-756(XSi)	LMジンジバル リトラクター(各種×4ヶ/3サイズ)
LMマルチホルダー-PK II LM 752-754(XSi)	LMサービカルマトリックス (各種×4ヶ/4サイズ)
LMマルチレバー7550	LMコンタクトフォーマー (各種×4ヶ/4サイズ)

ENDODONTICS

- エクスプローラー
- エキスカベーター
- エンドスプレッダー
- プラガー

歯内療法



エクスプローラー、エクスカベーター、エンドスプレッター、プラグー

医療機器届出番号 27B1X00020221005 一般医療機器
 医療機器届出番号 27B1X00020221035 一般医療機器
 医療機器届出番号 27B1X00020228028 一般医療機器
 医療機器届出番号 27B1X00020221030 一般医療機器


ルートカナルエクスプローラー



LMルートカナルエクスプローラー

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

刃部がシャープで長いので、容易に根管を調べたり開孔したりすることができます。

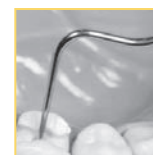

種類	商品コード	標準価格(1本)
27-28 Si	00232201	¥3,000
27-28 XSi	00232202	¥3,400

ルートカナルエクスカベーター

ルートカナルエクスカベーターはラウンドエクスカベーターよりも第一シャンクが長くブレード角度が鋭い

- ・非常に効果的なブレード角度と、適切な角度がついた長いシャンクはあらゆるタイプの歯髄腔の形成を可能にします。
- ・髄室の清掃、根管の形成、暫間充填材の除去に効果的です。



LMルートカナルエクスカ 1.0 mm

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
612-622 Si	00232203	¥5,800
612-622 XSi	00232204	¥6,200



LMルートカナルエクスカ 1.5 mm

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
632-642 Si	00232205	¥5,800
632-642 XSi	00232206	¥6,200



LMルートカナルエクスカ 2.0 mm

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
652-662 Si	00232207	¥5,800
652-662 XSi	00232208	¥6,200

エンドスプレッター



LMエンドスプレッター 0.4 mm

XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
24 XSi	00232225	¥6,000



LMエンドスプレッター 0.23 mm

XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
22 XSi	00232226	¥6,000

エンドプラグー



LMエンドプラグー 0.5-1.0 mm

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- 先端径 0.5mmと1.0mm
- 根管充填の際に使用

種類	商品コード	標準価格(1本)
41-42 Si	00232209	¥5,600
41-42 XSi	00232210	¥6,000

EXTRACTION

- ツイストアウト
- リフトアウト
- 抜歯用インスツルメントのお手入れ
- スリムリフト
- 残根除去用インスツルメント

外科



ツイストアウト

医療機器届出番号 27B1X00020223043 一般医療機器

抜歯用インスツルメント

- 人間工学に基づいたデザインなので手にしっくり馴染む
- 滑りにくく握りやすいグリップ
- バランスが良く操作しやすい
- 軽いので手への負担が少ない
- カラーコーディングで識別が容易
- ブレードは丈夫でシャープなLM-デュラグレードMAXスチール製
- ブレードと柄の接続部分に隙間が無く衛生的
- オートクレーブで滅菌可能



QRコードを読み取って動画を check!



シャープニング



ツイストアウト

LMツイストアウト インスツルメントは抜歯の際に、強い力や捻りが必要な際に使用します。

ストレートブレード



LMツイストアウト S3 ストレート3mm

- ストレート 3mm ブレード幅

種類	商品コード	標準価格 (1 箱)
814230	00233160	¥18,000



LMツイストアウト S4 ストレート4mm

- ストレート 4mm ブレード幅

種類	商品コード	標準価格 (1 箱)
814240	00233162	¥18,000



LMツイストアウト S5 ストレート5mm

- ストレート 5mm ブレード幅

種類	商品コード	標準価格 (1 箱)
814250	00233161	¥18,000

カーブブレード



LMツイストアウト C3 カーブ3mm

- カーブ 3mm ブレード幅

種類	商品コード	標準価格 (1 箱)
814430	00233165	¥18,000



LMツイストアウト C4 カーブ4mm

- カーブ 4mm ブレード幅

種類	商品コード	標準価格 (1 箱)
814440	00233167	¥18,000



LMツイストアウト C5 カーブ5mm

- カーブ 5mm ブレード幅


種類	商品コード	標準価格 (1 箱)
814450	00233166	¥18,000



QRコードを読み取って動画を *check!*



シャープニング

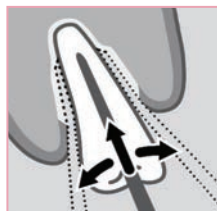

リフトアウト

LMリフトアウト インスツルメントは極力無理な力をかけずに抜歯を行うためのインスツルメントです。組織の損傷を最小限に抑えることができるので、治療が速く、スムーズにインプラントの埋入へと移行できます。

重要!! LMリフトアウトは、適用部位に対する用途とその使用法を考慮して、先端部が特に細くなっています。誤った抜歯方法を使用したり、過剰な力やてこの動作を加えたりすると先端部が破損する恐れがあります。

ストレートブレード



LMリフトアウト S2 ストレート2.5mm

- ストレート 2.5mm ブレード幅

種類	商品コード	標準価格 (1 箱)
812220	00233150	¥18,000



LMリフトアウト S3 ストレート3mm

- ストレート 3mm ブレード幅

種類	商品コード	標準価格 (1 箱)
812230	00233151	¥18,000



LMリフトアウト S4 ストレート4mm

- ストレート 4mm ブレード幅

種類	商品コード	標準価格 (1 箱)
812240	00233153	¥18,000



LMリフトアウト S5 ストレート5mm

- ストレート 5mm ブレード幅

種類	商品コード	標準価格 (1 箱)
812250	00233152	¥18,000

カーブブレード



LMリフトアウト C3 カーブ3mm

- カーブ 3mm ブレード幅

種類	商品コード	標準価格 (1 箱)
812430	00233155	¥18,000



LMリフトアウト C4 カーブ4mm

- カーブ 4mm ブレード幅

種類	商品コード	標準価格 (1 箱)
812440	00233157	¥18,000



LMリフトアウト C5 カーブ5mm

- カーブ 5mm ブレード幅

種類	商品コード	標準価格 (1 箱)
812450	00233156	¥18,000

抜歯用インスツルメントのお手入れ

専用カセット

LMリフトアウト・LMツイストアウト専用カセットはお手入れ時の怪我やインスツルメントの破損を未然に防ぎます。

また、滅菌バッグに穴があく可能性が減り、より確実に滅菌を行えます。

カラーコードボタン(P63参照)を利用すると識別が容易です。



専用のLMシャープニングストーンはブレードの形状にフィットするので効率良くシャープニングできます。

商品名	商品コード	標準価格(個)
シャープニングストーン リフトアウト/ツイストアウト用	00233170	¥5,200



スリムリフト、残根除去用インスツルメント

医療機器届出番号 27B1X00020225034 一般医療機器
医療機器届出番号 27B1X00020224016 一般医療機器
医療機器届出番号 27B1X00020225033 一般医療機器

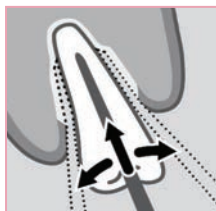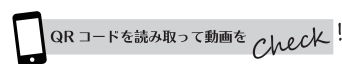

スリムリフト

LMスリムリフトインスツルメントは、ブレードが非常に薄く歯根膜に挿入しやすい歯科用剥離子です。ブレード先端を歯根膜空隙に挿入し、根尖に向かってゆっくりと上下運動させながら靱帯を切断します。

重要!! LMスリムリフトは適用部位に対する用途とその使用法を考慮して、先端部の厚さが特に薄くなっています。誤った方法で抜歯を行ったり、捻ったり、過剰な力やテコの動作を加えたりすると先端部が破損する恐れがあります。

ストレートブレード



LMスリムリフト S3 3mm

- ストレート 3mm ブレード幅

種類	商品コード	標準価格 (1 箱)
812630	00233130	¥18,000



LMスリムリフト S4 4mm

- ストレート 4mm ブレード幅

種類	商品コード	標準価格 (1 箱)
812640	00233131	¥18,000



LMスリムリフト S5 5mm

- ストレート 5mm ブレード幅

種類	商品コード	標準価格 (1 箱)
812650	00233132	¥18,000

カーブブレード



LMスリムリフト C3 3mm

- カーブ 3mm ブレード幅

種類	商品コード	標準価格 (1 箱)
812830	00232135	¥18,000



LMスリムリフト C4 4mm

- カーブ 4mm ブレード幅

種類	商品コード	標準価格 (1 箱)
812840	00233136	¥18,000



LMスリムリフト C5 5mm

- カーブ 5mm ブレード幅

種類	商品コード	標準価格 (1 箱)
810850	00233137	¥18,000



残根除去用インスツルメント



LMルートチップピック

- アクセスが困難な残根の除去に適しています。

XSil エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1 本)
769-771 XSi	00233175	¥8,400



LMルートアウト

種類	商品コード	標準価格 (1 箱)
812210	00233176	¥18,000

MAINTENANCE

- トレーシステム
- コードボタン
- コードリング
- シャープナー
- メンテナンス

メンテナンス



トレーシステム

セルボマックストレーシステム

LMセルボマックストレーシステムは、診療・メンテナンス時にインスツルメントやアクセサリ類を衛生的に効率良く管理します。


- トレーパーツを入れ替えることによって多様なニーズに対応
- 感染予防に有効
- インスツルメントが傷みにくい
- 鋭利器材損傷(SI:Sharps Injury)防止



臨床例

QRコードを読み取って動画を *check!*

セルボマックス

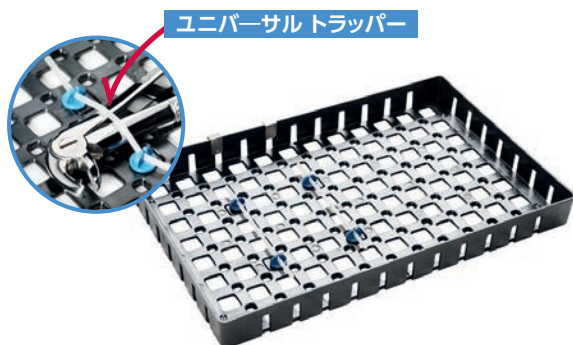

ユニバーサルトラッパー

LMセルボマックス トレーセット

- ユニバーサルトラッパー 1セット メタルクリップ 2ヶ入
- W185×L287×H30mm

種類	商品コード	標準価格(1セット)
6410	00233190	¥11,500

LMセルボマックス ユニバーサルトラッパー 2個入

種類	商品コード	標準価格(2個入)
6416	00233192	¥4,200

LMセルボマックス メタルクリップ 2個入

種類	商品コード	標準価格(2個入)
6415	00233191	¥2,000

アクセサリ用



LMセルボマックス スタンダードケース

- W65×L136×H34mm

種類	商品コード	標準価格(個)
6420	00233193	¥4,200

LMセルボマックス レストレーション / エンドファイルケース

- W65×L130×H40mm

種類	商品コード	標準価格(個)
6430	00233194	¥7,000

LMセルボマックス フォーム 20個入

- ファイル清掃用

種類	商品コード	標準価格(箱)
6435	00233195	¥2,400

LMセルボマックス ウルトラソニック チップケース

- 超音波スケーラー、エラスケーラーなどのチップ6ヶ収容可能
- W65×L128×H38mm

種類	商品コード	標準価格(個)
6460	00233197	¥6,000

トレーシステム、コードボタン、コードリング



LMセルボマックス バー / エンドファイルケース

- バー8ヶ、ファイル14ヶ収納可能
- W70×L128×H60mm

種類	商品コード	標準価格 (1 個)
6450	00233196	¥7,000



LMセルボマックス カップホルダー

種類	商品コード	標準価格 (1 個)
6490	00233198	¥2,800

手用インスツルメント用

LMセルボカセットはインスツルメントをしっかりとロックし、隅々まできれいに清掃することができます。
シリコン製のコードボタンをはめ込むとカセットを容易に識別できます。
LMセルボマックス メタルクリップでLMセルボマックストレーに取付可能。

トレーカセットは、耐久性に優れた特殊プラスチック製。通常の洗浄・消毒・滅菌方法に対応しています。
(最高滅菌温度:高圧蒸気滅菌器で134℃)



LMインスツルメントカセット 5本用

- インスツルメント 5本用カセット
- W86×L180×H28mm

種類	商品コード	標準価格 (1 個)
6650	00233205	¥6,400



LMインスツルメントカセット 8本用

- インスツルメント 8本用カセット
- W136×L180×H28mm

種類	商品コード	標準価格 (1 個)
6680	00233208	¥7,200

コードボタン/コードリング

LMセルボコードボタン

カセットの両側面にLMコードボタンをはめ込む穴が3個ずつ空いています。
- 各色1箱20個入り



LMコードリング

インスツルメント識別用リング
- 各色1箱50個入り



商品名	種類	商品コード	標準価格
コードボタン 1箱20個入			
ブルー	6000	00233210	¥2,000
グリーン	6001	00233211	¥2,000
オレンジ	6002	00233212	¥2,000
レッド	6003	00233213	¥2,000
イエロー	6004	00233214	¥2,000
ブラウン	6005	00233215	¥2,000
コードリング 1箱50個入			
ブルー	5000	00234200	¥1,800
グリーン	5001	00234201	¥1,800
オレンジ	5002	00234202	¥1,800
レッド	5003	00234203	¥1,800
イエロー	5004	00234204	¥1,800
ブラック	5005	00234205	¥1,800
ホワイト	5006	00234206	¥1,800
ブラウン	5007	00234207	¥1,800
ライラック	5008	00234208	¥1,800

シャープナー

ロンドプラス シャープナー

硬組織を処置するインスツルメントはすぐに切れなくなり、治療の効率が悪くなります。歯周治療用のインスツルメントは毎回使用後にシャープニングを行う必要があります。手でシャープニングを行うと時間がかかる上、必要以上にインスツルメントを削ってしまいます。そのような問題を解決するのがLMロンドプラス シャープナーです。

簡単、迅速

- 簡単な使用方法 インスツルメントのブレードを正しいシャープニング位置で保持し、グライディングストーンを回転させます。
- ほんの数秒で1本のインスツルメントをシャープニングすることができます。

多様性

- 各種スケーラー類のほかにエキスカ等の形成用インスツルメントにも対応
- 左利き、右利き、両方に対応
- 回転方向を選択可能

正確、安全

- インスツルメントの位置は2段階に調整可能。高いレスト位は 形成用のインスツルメントに、低いレスト位は歯周用のインスツルメントに使用
- ブレードの原型を維持しながらシャープニングが行えます。
- 低速回転:ブレードが熱により変形することがありません。

目の細かい400グリットのセラミックストーンで研磨するのでインスツルメントの摩耗を最小限に抑えることができ、インスツルメントをより長く使うことができます。



LM ロンドシャープナーシルバーの使用法やお手入れ方法の動画を白水ホームページで公開しています。

使用動画
公開中!



白水 HP



QRコードを読み取って動画を check!



LMロンドプラス シャープナー シルバー

包装内容:

LMロンドプラス シャープナー、フットペダル、400グリッド シャープニングストーン、LMフィンゴ×2、エメリーテープ×5、イラスト付取扱説明書

種類	商品コード	標準価格(台)
8600	00234020	¥190,000



LMロンドプラス シャープナーの本体には両サイドにインスツルメントの切れ味をチェックするLMフィンゴが付いています。本体に取り付けたままでも、指にはめても使用できます。


補充品

商品名	種類	商品コード	標準価格
シャープニングストーン(ロンドプラス用)			
600グリッド(白・細目)	8660	00234101	¥12,800
400グリッド(グレー・中目)	8640	00234102	¥12,800
320グリッド(黒・粗目)	8632	00234100	¥12,800
その他補充品			
フットペダル(ロンドプラス用)	8630	00234103	¥23,000
エメリーテープ 5入(ロンドプラス用)	8550	00234104	¥1,600
LMフィンゴ テストスティック(2ヶ入)	8602	00233302	¥2,800
LMフィンゴ テストスティック(6ヶ入)	8606	00233306	¥7,400

関連商品


マグネットゲージ

商品コード	標準価格
00481565	¥1,600

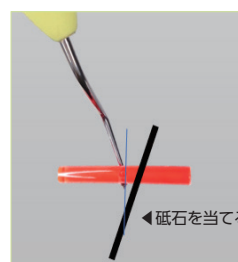

刃部のフェイス(内面)にマグネットを乗せるだけでエッジの傾きが簡単に分かります。

メンテナンスの手順

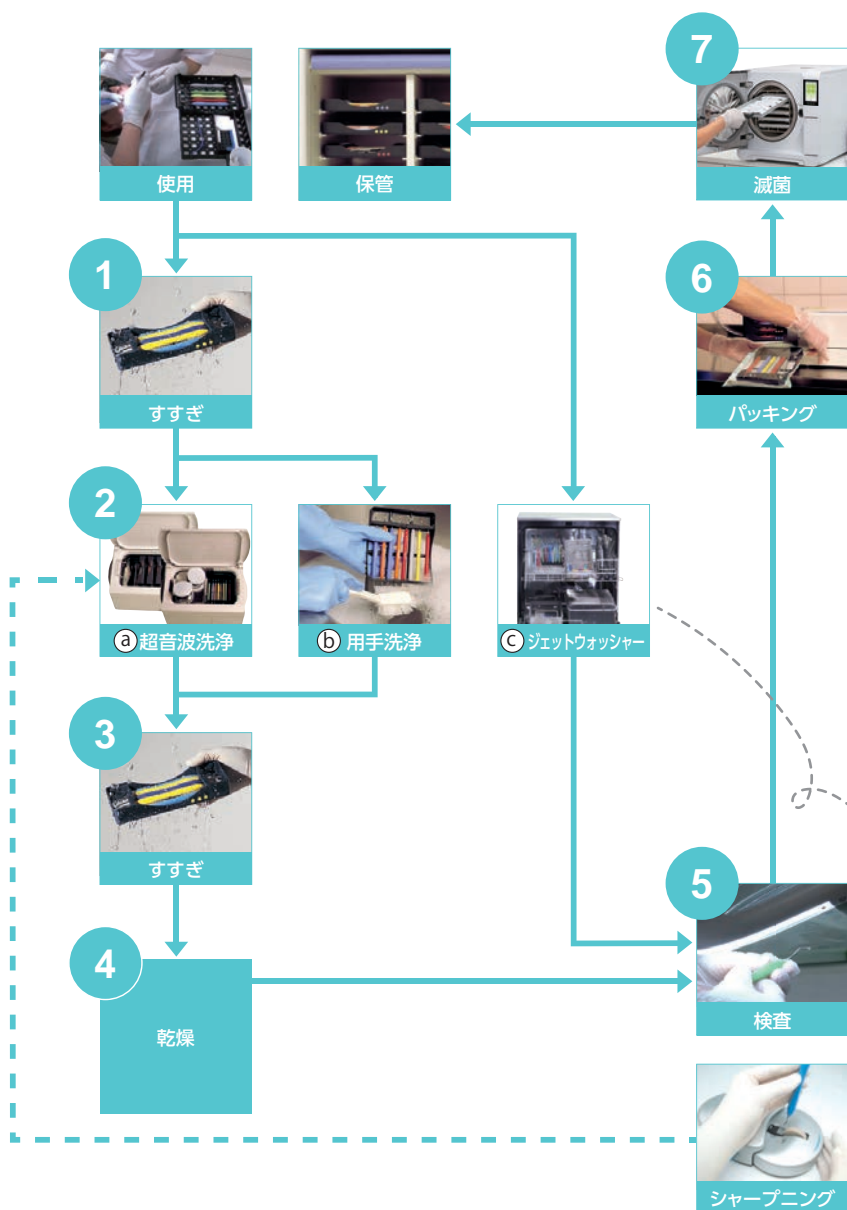

- 1 すすぎ（用手洗浄、超音波洗浄）
40℃以下のぬるま湯でインスツルメントをきれいにすすぎます。
- 2 洗浄・消毒
 - ① 超音波洗浄：インスツルメントの破損を防止するため、インスツルメントカセットを使用してください。
 - ② 用手洗浄：厚手のグローブと化学洗剤を使用した予備消毒/洗浄を行います。
 - ③ ジェットウォッシャー：洗浄・消毒を行います。
- 3 すすぎ（用手洗浄、超音波洗浄）
40℃以下のぬるま湯でインスツルメントをきれいにすすぎます。
- 4 乾燥（用手洗浄、超音波洗浄）
滅菌の前にインスツルメントを乾燥させます。
- 5 検査とシャープニング
必要に応じてインスツルメントのシャープニングや手入れ・交換を行います。
- 6 パッキング
清掃、研磨を終えたインスツルメントを滅菌用にパッキングします。
- 7 滅菌
オートクレーブ：洗浄、乾燥した後、パッキングしたインスツルメントをオートクレーブ滅菌器の中に入れます。



おすすめ！

関連商品

滅菌には…

 製品情報は
こちら↓

W&H
lisa

クラスBオートクレーブ リサ22Eli
小型未包装品用高圧蒸気滅菌器
医療機器認証番号:228ALBZX00008000
管理医療機器 特定保守管理医療機器

パッキングには…

5本用カセット
におすすめ！

07807002 100mm幅(200M)
07807003 150mm幅(200M)

W&H滅菌ロール

8本用カセット
におすすめ！
 製品情報は
こちら↓

W&H
Seal²

ヒートシーラー Seal2

洗浄・消毒には…

 製品情報は
こちら↓

Miele

ミーレ ジェットウォッシャー PWD8692、PWD8682
器具除染用洗浄器
製造販売届出番号 13B2X10362000022、13B2X10362000020 一般医療機器

シャープニングには…

 製品情報は
こちら↓

LM
RondoPlus

LMロンドプラス シャープナーシルバー
インスツルメント電動シャープナー

索引

アルファベット

M

M-Dグレイシー #11-14	35
M-Dグレイシー #12-13	35
M-Dグレイシー #15-18	35
M-Dグレイシー #16-17	35
M-Dグレイシーミニ #11-14	35
M-Dグレイシーミニ #12-13	35
M-Dグレイシーミニ #15-18	35
M-Dグレイシーミニ #16-17	35

かな

あ

アルテ アプリカ	46
アルテ アプリカDD	48
アルテ アプリカ ツイスト	46
アルテ エクセゾ	47
アルテ エクセゾDD	48
アルテ カスプ ミスラ	47
アルテ コンデンサー	46
アルテ コンデンサーDD	48
アルテ ソロ アンテリア	47
アルテ ソロ ポステリア	47
アルテ フィスラ	46
アルテ フィスラDD	48
アルテ ポステリア ミスラ	47
アルテ ミスラ	47
アルテ モデラ	46
アルテ モデラDD	48
アルテ レプリカ ポステリア	47

い

イニシア	38
インストルメントカセット	63

え

エキスカパーターラウンド 1.5mm	42
エキスカパーターラウンド 2.0mm	42
エキスカパーターラウンド 1.0mm	42
エキスプローラー 3-6	13
エキスプローラー 5-8	12
エキスプローラー 5-9	12
エキスプローラー 9	14
エキスプローラー 11-12	13
エキスプローラー 17-23	13
エキスプローラー センタード 9-17C	13
エキスプローラー センタード 17C-23	13
エキスプローラー プロセテック 18-19	14
エキスプローラー ホルスト 29	14
エクセスケーラー	53
エッジスター テストスティック	25
エミリーテープ 5入(ロンドプラス用)	64
エルゴシングル ミラーハンドル	12
エルゴホールド3	40
エルゴミックス グレイシーミニ #1-2(チタン)インプラント用	36
エルゴミックス グレイシーミニ #11-12(チタン)インプラント用	36
エルゴミックス グレイシーミニ #13-14(チタン)インプラント用	36
エルゴミックス スペアハンドル	36
エルゴミックス スペアロックグリップ 2個入	36
エルゴミックス チタン製スベアチップ(インプラント用)	36
エルゴミックス ユニバーサルキュレット ミニ (チタン)インプラント用	36
エレヴァ	38
エンドスプレッター 0.4 mm	56
エンドスプレッター 0.23 mm	56
エンドブラガー 0.5-1.0 mm	56

お

オルバンレンド	39
---------	----

か

カーバー	52
------	----

<

クラウンオフ	53
グレイシーキュレット #1-2	26
グレイシーキュレット #3-4	26
グレイシーキュレット #5-6	26
グレイシーキュレット #7-8	26
グレイシーキュレット #9-10	26
グレイシーキュレット #11-12	27
グレイシーキュレット #13-14	27
グレイシーキュレット #15-16	27
グレイシーキュレット #17-18	27
グレイシーキュレット #P3-P4	26
グレイシーキュレット マクロAF #5-6 スタンダード	30
グレイシーキュレット マクロAF #7-8 スタンダード	30
グレイシーキュレット マクロAF #11-12 スタンダード	30
グレイシーキュレット マクロAF #13-14 スタンダード	30
グレイシーキュレット ミニ #1-2	29
グレイシーキュレット ミニ #7-8	29
グレイシーキュレット ミニ #11-12	29
グレイシーキュレット ミニ #13-14	29
グレイシーキュレット ミニ #15-16	29
グレイシーキュレット ミニ #17-18	29
グレイシーキュレット リジッド #1-2	28
グレイシーキュレット リジッド #7-8	28
グレイシーキュレット リジッド #11-12	28
グレイシーキュレット リジッド #13-14	28
グレイシーキュレット リジッド #15-16	28

こ

コードバッカー 2.0mm	44
コードバッカー 2.6mm	44
コードボタン	63
ゴールドマンフォックス 3	22
コレテロ	39
コロンビア 2L-2R	22
コロンビア 4L-4R	22
コロンビア キュレット 13-14	22
コンタクトフォーマー	54
コンボジット インストルメント アンテリア ダークダイヤモンド	49
コンボジット インストルメント ポステリア ダークダイヤモンド	50
コンボジットスパチュラ	51

さ

サービカル マトリックス	54
--------------	----

し

シクルスケーラー LM23	18
シクルスケーラー LM204S	18
シクルスケーラー カプラン	19
シクルスケーラー ミクロ	18
シクルスケーラー ミニ	18
シクルスケーラー ミニカプラン	19
シャープダイヤモンド グレイシーキュレット 1-2	31
シャープダイヤモンド グレイシーキュレット 7-8	31
シャープダイヤモンド グレイシーキュレット 11-12	31
シャープダイヤモンド グレイシーキュレット 13-14	31
シャープダイヤモンド ネプラスカ	33
シャープダイヤモンド コロンビア 4L-4R	34
シャープダイヤモンド シクルLM23	33
シャープダイヤモンド シクル LM23 スリム	33
シャープダイヤモンド シャープジャック	33
シャープダイヤモンド スケーラーH6-H7	33
シャープダイヤモンド ネプラスカ	33
シャープダイヤモンド バーン/リット 5-6	34
シャープダイヤモンド マイクロ シクル	33
シャープダイヤモンド ミニ グレイシーキュレット 1-2	32
シャープダイヤモンド ミニ グレイシーキュレット 7-8	32
シャープダイヤモンド ミニ グレイシーキュレット 11-12	32
シャープダイヤモンド ミニ グレイシーキュレット 13-14	32
シャープダイヤモンド ミニ グレイシーキュレット 15-16	32
シャープダイヤモンド ミニ グレイシーキュレット 17-18	32
シャープダイヤモンド ミニ シクル	33
シャープダイヤモンド ミニ シンテット	34
シャープダイヤモンド ミニ シンテット アンテリア	34
シャープダイヤモンド ミニ マッコール 13S-14S	34
シャープニングストーン リフトアウト/ツイストアウト用	59
ジンジリルマー-jintリマー 1.2mm(遠心用)	43
ジンジリルマー-jintリマー 1.2mm(近心用)	43
ジンジリル リトラクター	54
シンテット	23
シンテットミニ	23

す

スパチュラ	44
スプーンエキスカ 1.0mm	42
スプーンエキスカ 1.5mm	42
スリムリフト C3	60
スリムリフト C4	60
スリムリフト C5	60
スリムリフト S3	60
スリムリフト S4	60
スリムリフト S5	60

セ

セルボマックス ウルトラソニック チップケース	62
セルボマックス カップホルダー	63
セルボマックス スタンダードケース	62
セルボマックス トレーセット	62
セルボマックス バー / エンドファイルケース	63
セルボマックス フォーム	62
セルボマックス メタルクリップ	62
セルボマックス ユニバーサルトラッパー	62
セルボマックス レストレーション / エンドケース	62

た

ダイヤモンドファイル SV 5-6	23
ダイヤモンドファイル SV 7-8	23

つ

ツイストアウト C3	58
ツイストアウト C4	58
ツイストアウト C5	58
ツイストアウト S3	58
ツイストアウト S4	58
ツイストアウト S5	58

と

トゥネラ	39
------	----

ね

ネイバースプローブ	16
ネブラスカ	19

の

ノースカロライナ プローブ 54B	16
-------------------	----

は

バーニッシャー	45
バーニッシャー 1.5-2.5 mm	45
バーニッシャー #27-29	45
バーニッシャー ダークダイヤモンド	49
バーニッシャー プラガー ダークダイヤモンド1.5-2.5mm	49
バーンハルト 5-6	22
ハイジニストスケーラー H4-H5	19
ハイジニストスケーラー H6-H7	19
バックーモデラー	50,51
バックーモデラーIO ダークダイヤモンド	49
バックアクションエキスカ 1.0 mm	43
バックアクションエキスカ 1.5mm	43
バックアクションエキスカ 2.0 mm	43
バックアクションエキスカ 3.5 mm	43
パピラリヴァ	39
パピラリモータ	39

ふ

ファーケーター	23
フリングリムーバー	53
フィンゴ テストスティック	64
フォームコンデンサー 1.5-2.5 mm	51
フットペダル(ロンドプラス用)	64
ブラガー 1.0-1.5mm	45
ブラガー 1.2-2.0mm	45
ブラガー 1.8-2.5mm	45
プラスチェックインスツルメント	51
プリマミラー	12
フレックスプローラー 11F-12F	13
フロー インスツルメント IO	50

へ

ベースキャリア コンデンサー マリアブルチップ	44
ベースキャリア コンデンサー リジッド	44
ベースキャリアリジッド	44
ペリオプローブ 8-520B	15
ペリオプローブ 23-52B	14
ペリオプローブ 23-520B	15
ペリオプローブ 23-530B	15
ペリオプローブ WHO 8-550B	15
ペリオプローブ WHO 23-550B	15
ペリオプローブ WHO 550B	15
ペリオプローブ ウィリアム 51	15
ペリオプローブ ファークーション	16

ほ

ホースケーラー アンテリア	24
ホースケーラー ポステリア	24
ホースケーラー ラテラル	24

ま

マーキス12 プローブ 53B	16
マグネットゲージ	64
マッコール 13S-14S	20
マッコール 17-18	20
マッコール17S-18S	20
マルチホルダー PK I	54
マルチホルダー PK II	54
マルチホルダー イントロキット	54
マルチレバー	54

み

ミニエクセススケーラー	53
ミニスパチュラ	51
ミニスパチュラ ダークダイヤモンド	50
ミニマッコール 13S-14S	20
ミラーハンドル	12
ミラーハンドルJM	12

も

モデラー MH	50
モデラーMH ダークダイヤモンド	49
モデラー MH ミニ	50
モデラーMH ミニ ダークダイヤモンド	49

ゆ

ユニバーサルキュレット15-16	20
------------------	----

ら

ラップランダー	19
ランガーキュレット1-2	21
ランガーキュレット3-4	21
ランガーキュレット5-6	21
ランガーキュレットミニ1-2	21
ランガーキュレットミニ3-4	21
ランガーキュレットミニ5-6	21

り

リフトアウト C3	59
リフトアウト C4	59
リフトアウト C5	59
リフトアウト S2	59
リフトアウト S3	59
リフトアウト S4	59
リフトアウト S5	59

る

ルートアウト	60
ルートカナルエキスカ 1.0 mm	56
ルートカナルエキスカ 1.5 mm	56
ルートカナルエキスカ 2.0 mm	56
ルートカナルエキスプローラー	56
ルートチップピック	60

ろ

ロンドプラス シャーブナー シルバー	64
--------------------	----



記載内容は2026年1月現在のものです。尚、記載価格は全て税別です。



札幌 | 札幌市中央区北4条西20-2-1 Nord 420BLD1階 (011)616-5814
関東北 | さいたま市南区南浦和3-34-2 (048)884-3951
東京 | 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クロス12階 (03)5217-4618
名古屋 | 名古屋市千種区内山3-10-17 今池セントラルビル2階 (052)733-1877
本社 | 大阪府大阪市淀川区新高1-1-15 (06)6396-4400
広島 | 広島市南区西蟹屋3-2-1 日通ビル1階 (082)207-2870
福岡 | 福岡市博多区博多駅東2-18-30 八重洲博多ビル5階 (092)432-4618
白水貿易株式会社 <https://www.hakusui-trading.co.jp/>

定価 (本体500円+税)

2026.01.P1,000 B18 Ver.3.8.2