

# SALE

# 13%

# OFF

LM マイクロサージカルインスツルメント

## スターターキット キャンペーン



期間中、LM マイクロサージカルインスツルメント  
スターターキット 5 本 (LM イニシア・LM エレヴァ・  
LM トゥネラ・LM パピラソレヴァ・LM コルテロ) に  
LM インスツルメントカセット (5 本用) をセット  
にして **特別価格** にてご提供いたします。

キャンペーン期間

2026 **1/21** 水

**3/19** 木

歯肉溝内の切開、および上皮と  
歯槽頂の結合組織の分離用

### LM Inicia

粘膜骨膜弁の全層剥離用

### LM Eleva

部分層弁の骨膜剥離用

### LM Tunella

歯間乳頭・骨膜剥離用

### LM Papilla Solleva

初期切開や骨膜の剥離、  
部分層の分離用

### LM Coltello

臨床動画公開中



製品詳細はこちら

低侵襲へのこだわり

精密な刃部設計により切開範囲を最小限にし、  
患者さんへの負担を軽減します。

エルゴセンスハンドル

人間工学に基づいた設計で効率よく処置ができます。  
持ちやすく、疲れにくいハンドルです。

歯周外科用インスツルメント

LM マイクロサージカルインスツルメント

共同開発で生まれた精密マイクロインスツルメント。  
低侵襲かつ高い操作性で幅広い歯周外科に対応します。

デュラグレード MAX スチール

高い耐摩耗性で切れ味が長持ちします。

LM feel the difference

## 歯周外科でまず揃えるならこの 5 本 LM スターターキット

LM マイクロサージカルインスツルメント  
スターターキット (5 本) カセット付

商品コード 00233060


キャンペーン 標準価格

# 75,000円

で提供いたします

**特別価格で  
ご提供します!**

洗浄 滅菌 保管  
器具を保護する専用カセット

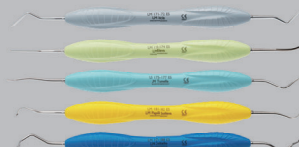

LM マイクロサージカル  
インスツルメント (5 本)



LM インスツルメントカセット 5 本用

## LM イニシア

171-172 ES



## LM Inicia



歯肉溝内の切開、および上皮と歯槽頂の結合組織の分離に使用される、固定刃のマイクロサージカルナイフ。

鋭利な先端と丸みのある側面により、安全かつスムーズな切開が可能。薄く柔軟性のある構造でイニシアの角度設計により狭小部での操作性も良好。歯肉溝内切開やトンネリング法など、精密な処置に適しています。

ご使用方法を  
動画で **CHECK**




## LM エレヴァ

173-174 ES



## LM Eleva

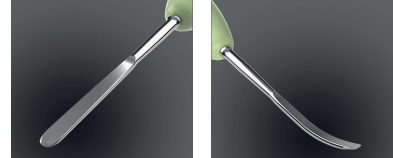

粘膜骨膜弁の全層剥離に使用される、マイクロサイズのペリオステラルエレベーター。

わずかに面取りされた先端で骨膜を正確に剥離し、刃のない構造が軟組織の損傷を防止。カーブ型とストレート型の両端により多様な部位に対応し、深部へのアクセスも容易。移植片の導入にも有用で、低侵襲な処置に最適です。

ご使用方法を  
動画で **CHECK**




## LM トゥネラ

175-177 ES



## LM Tunella

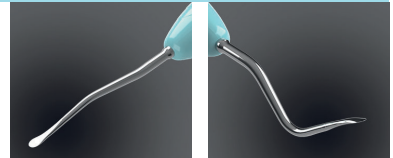

2種類のシャンクアングルを持つ小型のトンネリングナイフで、部分層弁の骨膜剥離に使用されます。

狭小部への挿入が容易で、組織への負担を軽減。刃の配置により穿孔リスクを抑え、アングル付きとストレートの両端で部位に応じた使い分けが可能。繊細な切開や骨膜剥離、スプリットフラップに最適です。

ご使用方法を  
動画で **CHECK**



## LM パピラソレヴァ

181-182 ES



## LM Papilla Solleva



歯間乳頭と歯槽骨の分離および挙上に用いる、歯間乳頭・骨膜剥離用インスツルメント。

鋭利な先端で乳頭基部の線維を正確に切離し、鈍角な側面が歯肉損傷を防止。対称かつ角度付きの両端により近心・遠心からの操作が可能で、長めの作業部は唇側・口蓋側からのアプローチに対応。トンネリングや非切開的挙上にも適しています。

ご使用方法を  
動画で **CHECK**




## LM コルテロ

187-188 ES



## LM Coltello

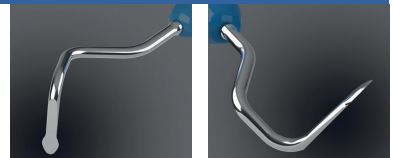

初期切開や骨膜の剥離、部分層の分離に使用するマイクロサージカルナイフ。

鋭利な先端で骨面への正確な接触と切開が可能。角度付きシャンクと小型作業端により狭い部位にも対応し、軟組織マージンの剥離に必要な圧力操作も容易。骨膜挙上・初期切開・癒着除去など多用途に活躍します。

ご使用方法を  
動画で **CHECK**



LM

feel the  
difference

記載内容は 2026 年 1 月現在のものです。価格はすべて税別です。

札幌 | 札幌市中央区北4条西20-2-1 Nord 420BLD1階 (011)616-5814  
 関東北 | さいたま市南区南浦和3-34-2 (048)884-3951  
 東京 | 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クロス2階 (03)5217-4618  
 名古屋 | 名古屋市千種区内山3-10-17 今池セントラルビル2階 (052)733-1877  
 本社 | 大阪府大阪市淀川区新高1-1-15 (06)6396-4400  
 広島 | 広島市南区西蟹屋3-2-1 日通ビル1階 (082)207-2870  
 福岡 | 福岡市博多区博多駅東2-18-30 八重洲博多ビル5階 (092)432-4618  
 白水貿易株式会社 <https://www.hakusui-trading.co.jp/> 2026.01 P13,000 K06